



取扱説明書

家庭用美容器
リフトロジー プロ
YJFD5

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に「安全上のご注意」(P.2~9)を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みにになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

もくじ

安全上のご注意 ————— p 2

海外でのご使用について ——— p 10

各部のなまえとはたらき ——— p 11

お使いになる前に ————— p 13

使いかた ————— p 18

使い終わったら ————— p 25

お知らせ ————— p 27

●故障かな?と思ったら ——— p 27

●よくあるご質問 ————— p 29

●製品仕様 ————— p 32

アフターサービス ————— p 33

■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

危険 (ご使用に関して)

- 次に該当する人は使用しない。
医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。
- ◆ 医用電気機器を使用している人
 - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心肺など生命維持用医用電気機器
 - ・心電計などの装着型医用電気機器



禁止

警告 (ご使用に関して)

- 次のような人は使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
 - ・心臓疾患、障害及びその疑いのある人 ・幼児や自分で意思表示できない人
 - ・温度や刺激の感覚が自覚できない人 ・自己免疫疾患のある人
 - ・妊娠初期から出産直後までの人 (顔への使用は可)
- 次の人はご使用前に医師にご相談ください。
 - ・急性疾患の人 ・感染症疾患の人 ・悪性腫瘍のある人 ・有熱性疾患の人
 - ・高血圧の人や血液疾患のある人 ・発熱している人
 - ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人 ・神経障害のある人
 - ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人 ・通院して薬を服用中の人
 - ・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人
- 次のような場合や部位には使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
 - ・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合 ・酒気帯びの場合 ・頭部 ・口内や陰部、粘膜など
 - ・眼球 ・上まぶた ・下まぶた及び目尻 (EYEモードは使用可) ・のど ・膨らんだホクロ
 - ・ウイルス性のイボ ・骨折をしている部位
 - ・外科手術 (形成、整形、美容) 等で体内に金属を埋め込んだ部位
 - ・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位



禁止

※施術後2週間のご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。
(施術例: ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)

警告（ご使用に関して）

- 皮膚が薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。
お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。

- オーバーケアをしない。
使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。
身体に危害を与えるおそれがあります。



禁止

- 使用前に電極やヘッドの割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。
けが・肌トラブルの原因となります。

- 取扱説明書に記載されている用途・部位以外には使用しない。
故障・けがの原因となります。

用途以外
禁止

- 子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。
事故・けがの原因となります。

使用者の
制限

注意（ご使用に関して）

- 強く押しあてず、一ヶ所に集中して使用しない。

必要以上に強く押し付けたり一ヶ所に集中して使用するとお肌を傷める原因となります。



禁止

- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。自身にあったレベルで使用する。

レベルは少しずつ調節してください。事故・けがの原因となります。

- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。

使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。

お肌に合わないときはご使用をおやめください。

翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 次のような場所で機器を使用・保管・充電しない。
火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。
 - ・浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近く
(浴室での使用は可。浴槽での使用は不可)
 - ・ほこりの多い場所 ・直射日光の当たる場所や屋外 ・傾斜、振動、衝撃のある場所
 - ・強い電波や磁気の発生する場所
 - ・引火性のもの(アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど)の近く
 - ・油煙、湯気の当たる場所 ・発熱器具(ストーブ等)の近くなど高温になる場所
 - ・温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)
- 通電したまま放置しない。
火災・事故の原因となります。



禁止

- プラグを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く(金属部に触れないようにする)。また、濡れた手で抜き差しはしない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 地震や雷を感じたら電源をオフにし、プラグを抜く。
火災・感電のおそれがあります。
- 使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにし、プラグを抜く。
充電が終わったときはACアダプターをコンセントから抜いてください。



プラグを
抜く

警告（ご使用、保管に関して）

- 本体は子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。また、子供に遊ばせない。事故・けがの原因となります。



- 火中投入・加熱・高温・高圧での充電・使用・保管をしない。
本製品は充電式電池を内蔵しています。
発熱・発火・破裂の原因となります。



- 分解や修理・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



- 機器を落したり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する。
火災・感電のおそれがあります。



⚠ 注意 (ご使用、保管に関して)

- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。

他の電気製品(電気毛布・敷布・こたつ等)との同時使用はしない。

誤動作による事故のおそれがあります。

- 車両運転中に使用しない。
事故やけがの原因となります。



禁止

- シャワーや蛇口から出る強い水圧を当てたり、水中に沈めたりしない。

本体は防滴仕様です(IPX5)。

シャワーや水道の蛇口から出る強い水圧や水中には対応していませんので、故意に水をかけないでください。故障の原因となります。

- 歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、レベルを下げ、使用部位を調整する。

EMSによりほお・あごに刺激を強く感じたり不快に感じたりすることがあります。強い違和感を覚える場合は、医師にご相談ください。

- 同一部位には推奨時間以上の使用は避ける。

再度同一部位に使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。過度なご使用はお肌を傷める可能性があります。あくまでも目安ですので、お肌の状態をみながらご使用ください。

- 使用時間を守って使用する。1日1回2分(各部位最大10分まで)、1日合計30分以内を目安にご使用ください。

過度の使用はお肌を傷める原因となります。



必ず守る

警告（電源に関して）

- 専用の充電用USBケーブル以外は使用しない。
感電、ショート、発火の原因となります。



禁止

- 充電用USBケーブルが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

- コンセントや配線器具の定格容量を超えて配線(タコ足配線)しない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。



タコ足配線
禁止

- 充電用USBケーブルを破損、加工しない。束ねたりねじったりなど無理に力を加えない。
ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。
収納時にはコードのねじれを直してください。



無理な扱い
禁止

■ 海外でのご使用について

警告

- 必ず直流5VのUSB電源で使用する。
火災・感電・事故の原因となります。
※無料修理保証は国内でのご使用に限ります。



必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用する。
発熱・発火・故障の原因となります。



発火注意

- ・地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- ・プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

英語・中国語でも安全上の注意を確認することができます。

You can also check safety precautions in English from the QR code below.

您可以扫二维码了解更多“安全注意”信息。

English



[https://www.ya-man.co.jp/
support/caution/en/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/en/)

中文




[https://www.ya-man.co.jp/
support/caution/cn/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/cn/)

TO ACCESS SCAN WITH YOUR CAMERA PHONE


■ 各部のなまえとはたらき

■ 本体

● 正面

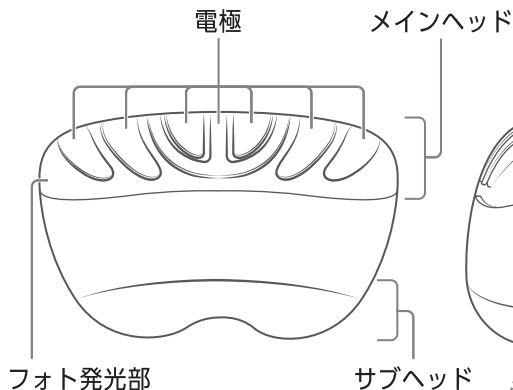

● 背面

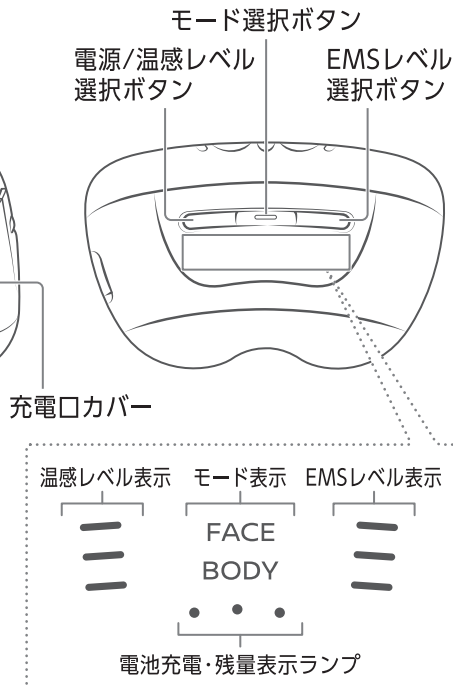

充電口

付属品

- 置台
- 充電用USBケーブル (USB Type-C)
- 化粧品
- 取扱説明書 (保証書付)

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

はたらき

防滴仕様

本体はIPX5 (JIS防水保護等級) ですが、シャワーや水道の蛇口から出る強い水圧や水中には対応していないため、故意に水をかけないでください。

パーソナル記憶機能

モード終了時のレベルを記憶して、次回電源オン時に同じ設定となります。

オートオフ機能

電源オンから、5セット (10分) 使用後に自動で電源が切れます。

※1セットは2分間です。

温度制御

お肌やメインヘッドの温度が高くなった場合に、安全のため出力を低くします。

タイマー・スタンバイ機能

1分ごとに半顔アラームが「ピーッ」と鳴ります。
2分ごとに「ピピピッ」と鳴りスタンバイ状態となります。

スタンバイ状態は最長5分とし、5分間操作がない場合は「ピピピッ」と鳴り自動で電源が切れます。
スタンバイ状態になってからもう一度使用したい場合はモード選択ボタンを短押ししてください。

■ お使いになる前に


使用上のご注意

お使いになる前に、以下の内容をよくお読みのうえ正しくお使いください。


- 使用時には身体から金属類（時計・ネックレス・指輪・イヤリング）を外してください。
事故・けがの原因となります。
- 必ずメイクを落として使用してください。
メイクの上から使用すると、ファンデーションによりお肌が黒く汚れることがあります。
- 本製品を初めてご使用になるときは、必ずプレテストを行ってください（P.16）。
- 付属の化粧品またはローション、ジェル、水でお肌を湿らせてから、直接お肌にあててください。
お手持ちの化粧品を使用する場合は、とろみのある化粧水や美容液をご使用ください。
- 長期間使用しなかった場合、再使用する前には、正常に作動するか点検をしてください。
事故・故障のおそれがあります。
- 使用後は毎回、「使い終わったら」（P.25）を参照して、製品に付着した皮脂汚れや化粧品などを取り除いてください。
故障や、肌トラブルの原因となります。
- 機器のお肌に触れる部分は、毎回お手入れし、常に清潔な状態で使用してください。
肌トラブルの原因となります。
- 電極とお肌の間に、常に化粧品・水などがあるようにし、少なくなったら途中で補充してください。
化粧品・水などが少ないと、刺激の伝達が悪くなったり、肌トラブルの原因となります。
- 推奨環境温度は10℃～40℃です。

充電する

家庭用コンセントを使用する

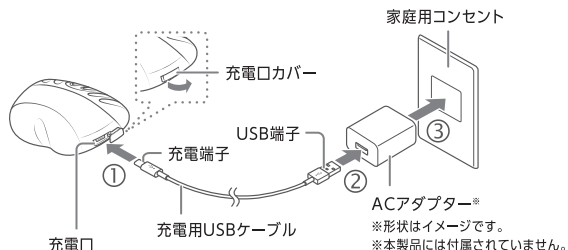

パソコンを使用する

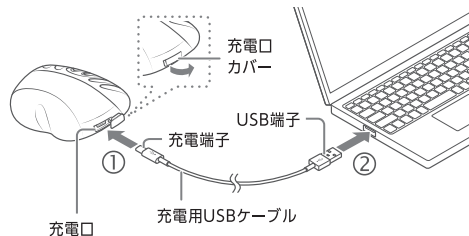

- 充電口カバーを開き、充電用USBケーブルを挿すと充電が開始されます。充電中は電池充電・残量表示ランプが点滅します。
- 充電が完了すると、電池充電・残量表示ランプがすべて点灯し、約5秒後に消灯します。
- 室温約25℃の場合、約3.5時間で満充電となり、約30分動作します。電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。

充電時間

約3.5時間

動作時間

約30分


注意

- 本体、充電端子、USB端子に水滴がついている場合は、水滴をしっかりと拭き取ってください。水滴が残ったまま充電すると、感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してから使用してください。
- 初めて使用するときや長時間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してからご使用ください。
- ACアダプター（市販品）は記載されている電流値をご確認ください。1Aより低いものでは充電できない可能性があります。

●充電時のランプ表示

☼ = 点滅 ● = 点灯 ○ = 消灯

充電量	左	中央	右
少	☼	○	○
↓	●	☼	○
多	●	●	☼
満充電	●	●	●

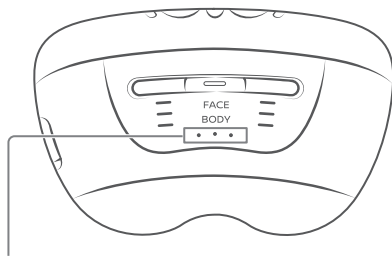

電池充電・残量表示ランプ

- 充電中は、電池充電・残量表示ランプが充電量に応じて点滅します。
- 充電が完了すると、電池充電・残量表示ランプがすべて点灯し、約5秒後に消灯します。

●電池残量表示（電源をオンにした時に充電残量をお知らせします）

● = 点灯(白色) ○ = 消灯

電池残量	左	中央	右
多	●	●	●
↓	●	●	○
少	●(赤色)	○	○
なし*	○	○	○

* 電源をオンにした直後、左の電池充電・残量表示ランプが3回点滅、ピッと6回鳴り、その後電池充電・残量表示ランプがすべて消灯し、電源がオフになります。

お肌へのプレテスト

※初めてご使用になるときは、必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

1 腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどで拭き取る

2 洗ったところに付属の化粧品を塗り、電源をオンにしてFACEモードで約2分間使用する (P.19)

EMSと温感は必ずレベル1でテストを行ってください。

3 お肌に異常がないことを確認する

24時間後にお肌に赤みやほてりを感じなければ、本製品をご使用ください。




準備

注意

- お肌と本製品の相性を確認するため、必ず事前に実施してください。
- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止してください。
- お肌に異常を感じた場合は使用しないでください。

モード説明

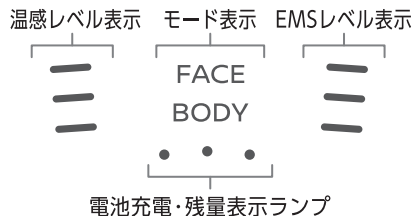

- 温感レベルは1～3、EMSレベルは1～6から選択が可能です。

モード	モード表示	フォト	使用部位	温感レベル	EMSレベル	1回の使用時間目安	使用頻度目安
FACE	FACE点灯	青緑	顔・首	1～3	1～6	2分 (最大10分)	毎日
EYE	FACE点滅	赤	目もと				
BODY	BODY点灯	赤	デコルテ・二の腕・わき腹				

≡ — ≡ = 点滅 — = 点灯 — = 消灯

	レベル 1	レベル 2	レベル 3	レベル 4	レベル 5	レベル 6
温感レベル表示	≡ — ≡	— — —	— — —	/	/	/
EMSレベル表示	≡ — ≡	— — —	≡ — ≡	— — —	≡ — ≡	— — —

■ 使いかた

使用の目安

毎日ご使用いただけます。ただし、1日1回2分（各部位最大10分まで）、1日合計30分以内を目安にご使用ください。

翌日以降ご使用になる場合は、24時間以上あけてご使用ください。

※あくまでも目安です。お肌の状態を見ながらご使用ください。

※過度な使用はお肌を傷める原因となります。

基本的な使いかた

付属の化粧品で十分に保湿してからご使用ください。お手持ちの化粧品を使用する場合は、とろみのある化粧水や美容液をご使用ください。

オイルやスクラブなど刺激の強い化粧品や温感効果のある化粧品、脂肪燃焼成分を含む化粧品は使用しないでください。製品が故障したり、肌トラブルの原因となります。

※お肌が乾いた状態ではEMSを感じにくくなります。


1 電源をオンにする

電源/温感レベル選択ボタンを長押しします（約1秒）。

「ピピッ」と音が鳴り、温感レベル表示・モード表示・EMSレベル表示が点灯し、FACEモードが開始します。

各モード終了時のレベルを記憶して、次回電源オン時に同じレベル設定となります。


電源/
温感レベル
選択ボタン

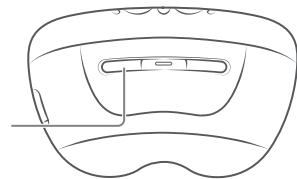

2 モードを選ぶ

- モード選択ボタンを短押ししてモードを選択します。
- FACEモード (FACE点灯) → EYEモード (FACE点滅) → BODYモード → FACEモード (FACE点灯) …の順で切り替わります。
- FACEモード選択時はフォト発光部の青緑色LEDが点灯し、EYEモード・BODYモード選択時にはフォト発光部の赤色LEDが点灯します。


モード
選択ボタン

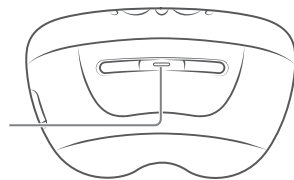

3 温感レベルを選ぶ

- 電源/温感レベル選択ボタンを短押しして温感レベルをレベル1～3から選択します (P.17)。
- ※使い始めは必ずレベル1でご使用ください。
- ※無理のないレベルを選んでご使用ください。

電源/
温感レベル
選択ボタン

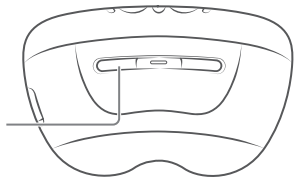

注意

- モードを選択して2分経過するとスタンバイ状態になります。スタンバイ状態のまま、5分間操作がない場合は自動で電源がオフになります。
- 使用途中でモードを変更するとその時点でタイマーがリセットされるため、使用時間にご注意ください。


4 EMSレベルを選ぶ

EMSレベル選択ボタンを短押ししてEMSレベルをレベル1～6から選択します (P.17)。

※使い始めは必ずレベル1でご使用ください。

※無理のないレベルを選んでご使用ください。

EMSレベル
選択ボタン

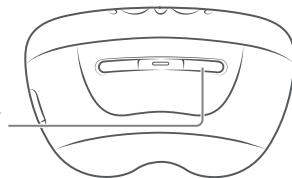

5 お肌にあてる

お肌にメインヘッドを軽くあてます。

各部位へのあてかたは、「各部位へのあてかた」(P.21)をご参照ください。

※お肌に強く押しあてすぎないでください。

6 電源をオフにする

電源/温感レベル選択ボタンを長押しします (約2秒)。

注意

- 使用中に疲労を感じたり、お肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。
翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。
- 力を入れてお肌にこすりつけない。
お肌を傷める原因となります。
- 同一部位には推奨時間以上の使用は避ける。
再度同一部位に使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。

各部位へのあてかた

以下のようにメインヘッドをあてると効果的です。

FACEモード

使用目安：1セット（2分）

※最大5セット（10分）まで

図の通り、①～⑥の順で押しあてるようにしてご使用ください。

- 半顔1分、全顔2分でご使用ください。

1分で半顔アラームが鳴るので、もう片側のケアに移ってください。

1セット（2分）で足りない場合は、再度①～⑥の順でご使用ください。

- ① 首 10秒 とめ
- ② 顎下（フェイスライン下） 10秒 とめ
- ③ 頬* 20秒 とめ
*口角と耳を結ぶ線が目安の位置です。
- ④ こめかみ 5秒 とめ
- ⑤ おでこの際 5秒 とめ
- ⑥ 頬 10秒 肌表面をやさしくスライド*
*本体を口に対して垂直に持ち、斜め上に向かって動かすイメージでご使用ください。



- モードを選択し1分経過すると「ピーッ」とアラームが鳴ります。(タイマー機能)
その後さらに1分経過(計2分経過)すると「ピピピッ」とアラームが鳴り、スタンバイ状態になります。
(スタンバイ機能)
- モード表示が点滅し、温感レベル表示とEMSレベル表示が消灯するため、ケアの準備が整ったらモード選択ボタンを押して再開してください。
- 電源を入れずに、本体下側のサブヘッドをかつさのように滑らせて、ケアをすることも可能です。

詳しい使い方は
こちらの動画をチェック



注意

- EMSが歯の神経に刺激を与える場合があります。メインヘッドを強くあて過ぎず、レベルを下げるか、部位をずらしてご使用ください。特に歯の治療中の方、歯に詰め物がある方はご注意ください。
- 首すじに使用する場合は強く押しあてないように注意し、途中で気分が悪くなった際は直ちに使用を中止してください。

また、EMSの刺激が強く感じられる場合がありますのでご注意ください。

各部位へのあてかた

以下のようにメインヘッドをあてると効果的です。

EYEモード

使用目安：1セット（2分）


※最大5セット（10分）まで

図の通り、①～②の順で5秒ずつ押しあてるようにしてご使用ください。

- 半顔1分、全顔2分でご使用ください。

1分で半顔アラームが鳴るので、もう片側のケアに移ってください。

1セット（2分）で足りない場合は、再度①～②の順でご使用ください。

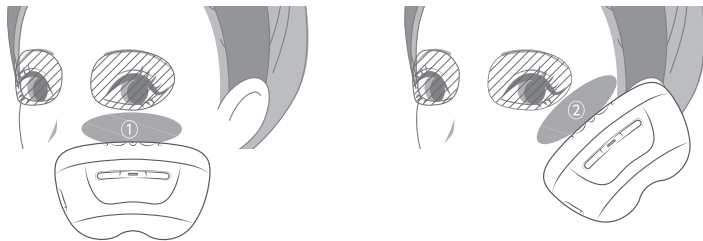

使用できない部位：
上まぶた
※下まぶた、目尻には
使用可


- モードを選択し1分経過すると「ピーッ」とアラームが鳴ります。（タイマー機能）
その後さらに1分経過（計2分経過）すると「ピピピッ」とアラームが鳴り、スタンバイ状態になります。（スタンバイ機能）
- モード表示が点滅し、温感レベル表示とEMSレベル表示が消灯するため、ケアの準備が整ったらモード選択ボタンを押して再開してください。

BODYモード

使用目安：1セット（2分）
※最大5セット（10分）まで

デコルテ


鎖骨の下を内側から外側に動かします。

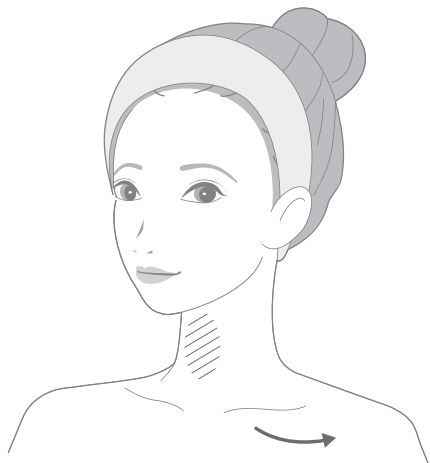

 使用できない部位

二の腕

ひじから脇に向かって動かします。

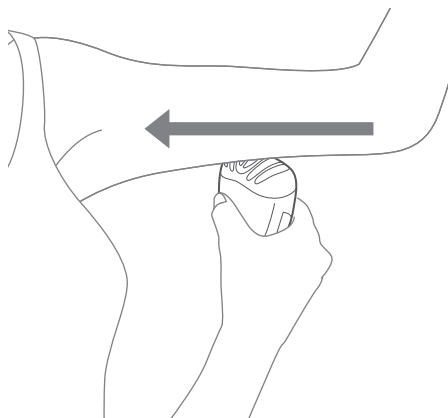

使う

■ 使い終わったら

お手入れのしかた



警告

お手入れするときは必ず電源をオフにする
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。

1 タオルなどの布で汚れを拭き取る

- 電極は濡らしてかたく絞った布で拭き取り、その他の部分は乾いた布で拭き取ってください。
- 本体に水分が残らないよう、十分に拭き取ってください。

2 風通しの良い場所で乾燥させる

本体に汚れや水分が残ったまま放置すると、故障やにおいの原因になることがあります。

注意

- 水洗いしないでください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かないでください。
本体の表面に損傷を与える原因となります。



保管のしかた

- 使用後は、必ず水分を拭き取り十分に乾燥させてから保管してください。本体に水分がついた状態で放置すると、本体内部が腐食する原因となります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、AC アダプター（市販品）のプラグを壁面コンセントから抜いてください。または、パソコンからUSB端子を抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置しないで、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな？と思ったら」（P.27）を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター（P.36）までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

■ お知らせ

故障かな？と思ったら 本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を依頼する前に以下をご確認ください。

こんな症状

考えられる原因と対処法

電源が入らない

- 電源/温感レベル選択ボタンを約1秒長押ししてください。
- 電池残量がありません。充電してください(P.14)。

充電しても 数分しか使えない

- 電池残量が少なくなっています。充電してください(P.14)。
- 電池の寿命です。販売店またはヤーマンコールセンター(P.36)にご連絡ください。
- 寒い場所で充電や保管をしていると、短い時間しか使えないことがあります。暖かい場所にしばらく置いてから、再度お試しください。

充電が 開始されない

- 本体に充電用USBケーブルをしっかり差し込んでください。
- USB端子とパソコンを正しく接続してください(P.14)。
- ACアダプター(市販品)のプラグを壁面コンセントに差し込んでください(P.14)。

電源がオフになる

- モードを選択して2分経過するとスタンバイ状態となり、スタンバイ状態のまま5分間操作がないと自動で電源がオフになります。

こんな症状

考えられる原因と対処法

EMSが強い (ピリピリする・痛い)

- 設定レベルが高いので、レベルを下げてください。初めて使うときは必ずレベル1で使用してください。
- お肌が乾燥しています。付属の化粧品または化粧水、ローション、ジェル、水などを塗って、お肌を湿らせてください。

EMSが弱い

- 設定レベルが低いので、レベルを上げてください。
- お肌が乾燥している場合は、付属の化粧品または化粧水、ローション、ジェル、水などで湿らせてからご使用ください。

EMSを感じない

- 使用中に誤って電源/温感レベル選択ボタンを押していないか確認してください。
- 電池残量が不足している場合は、充電してください(P.14)。
- お肌が乾燥している場合は、付属の化粧品または化粧水、ローション、ジェル、水などで湿らせてからご使用ください。
- 筋肉のつきかたによって感じにくい場所があります。

レベルが1から 始まらない

- パーソナル記憶機能が搭載されているため、前回使用時のレベルから開始します。

ヒーターが温まらない

- 浴室での使用時のほか、冬場や外気温が低い場合は、温かさを感じにくいことがあります。

よくあるご質問

Q 使用頻度の
目安はありますか？

毎日ご使用いただけます。ただし、1日1回2分（各部位最大10分まで）、1日合計30分以内を目安にご使用ください。

※お肌の状態を見ながらご使用ください。

※お肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。お肌に合わないときは使用を中止してください。

※翌日以降ご使用になる場合は、24時間以上あけてご使用ください。

Q お風呂で
使用できますか？

本体は防滴仕様ですので、浴室など水まわりでの使用もできますが、水中に沈めたり、シャワーや水道の蛇口からの流水はかけないでください。故障の原因となります。

Q サウナや岩盤浴で
使用できますか？

サウナや岩盤浴など、本体が高温になる場所ではやけどの危険がありますので絶対に使用しないでください。

Q お肌が乾いた状態でも
EMSは使用できますか？

A

お肌が乾いた状態では、EMSの刺激を感じにくくなる場合があります。EMSが弱いと感じる場合は、お肌を付属の化粧品または化粧水、ローション、ジェル、水などで湿らせてご使用ください。

Q 敏感肌なのですが
使っても大丈夫ですか？

A

初めてご使用になるときは、必ずプレテスト(P.16)を行っていただき、お肌の様子を確認してください。お肌に異常がなければご使用いただけます。
お肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。

Q メイクの上から
使用できますか？

A

ファンデーションによりお肌が黒く汚れるおそれがあるため、メイクを落としてからご使用ください。

Q 部位によって同じEMSの
レベルでも刺激の感じが
違うことがありますか？

A

EMSは筋肉を刺激する機能のため、部位によっては刺激を感じにくい場合があります。

Q 力を入れて
本体をあてるほうが
よいですか？

A 力を入れすぎるとお肌を傷める原因となります。特に顔
へのご使用は力を入れずに優しく本体をあててくださ
い。ご自身が心地よく感じる強さで動かしてください。

Q クリームの上から
使用できますか？

A 油分が含まれている化粧品は推奨できません。付属の
化粧品または化粧水、ローション、ジェル、水など、
水溶性のものをご使用ください。

製品仕様

定 格 電 源	DC5V 1A
消 費 電 力	約4W(充電時)
電 源 方 式	充電式
充 電 時 間	約3.5時間 ※充電残量や充電環境、ACアダプター(市販品)によって、充電時間は変わります。
動 作 時 間	約30分 ※充電残量や充電環境、ACアダプター(市販品)によって、充電時間は変わります。
防 水 機 能	IPX5
外 形 寸 法	約W114×D42.5×H71.5(mm)
製 品 質 量	約206g
材 質	本体:ABS、PU メインヘッド:PET樹脂、ステンレス
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
製 造 国	中国
付 属 品	置台1個 充電用USBケーブル(USB Type-C) ..1個 化粧品1個 取扱説明書(保証書付)

■ アフターサービス

おすすめ化粧品について

- 製品詳細・お買い求めはヤーマンコールセンター（P.36）にお問い合わせください。

※予告なく販売を終了する場合があります。

フローレスセラム ハイドレイティング



内容量：80g

品 番：CS21004

価 格：¥3,300（税込）

充電電池について

- 充電電池は消耗品です（保証対象外）。
充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます（充電回数は300回が目安です）。
充電電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.36）にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
- この製品に使用しているリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。




内蔵電池の取り出し方法

- 電池を取り出す前に、必ず電源をオフにしてください。
- 電池を取り出す際はドライバーを使用し、けががないように十分に注意して取り出してください。
- 電池を取り出す際は硬いもの等で電池を傷つけないようにご注意ください。※発熱発火の原因となります。
- 取り外した電池は自治体の分別ルール（廃棄やリサイクル方法）に従って処理してください。


操作STEP

①～⑧を参照し、電池を取り外してください。


①USB接続部の蓋を引き抜き、パネルを取り外す。

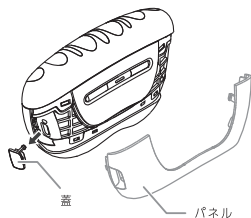


②4カ所のネジを外し、反対側のパネルを取り外し、ボタン側のパネルも外す。
※ボタン側のパネルは強粘着テープで接着されています。

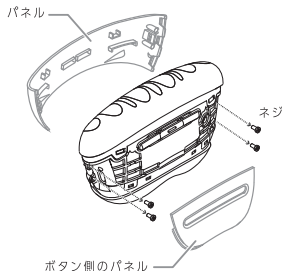

③底側から2カ所のネジを外し、上ケースを取り外す。
※上ケースは外周の5カ所のツメを先の細いもので外してください。

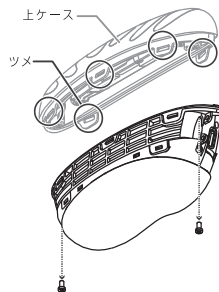


④2カ所のネジを外し、下ケースを取り外す。
※下ケースは外周の4カ所のツメを先の細いもので外してください。

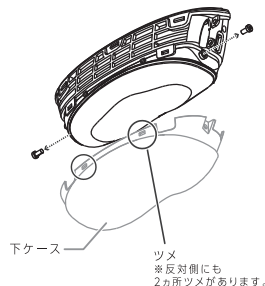


上記は製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。

お客様ご自身で分解した場合、故障の原因となりますのでご注意ください。


⑤ 上側から2か所のネジを外す。

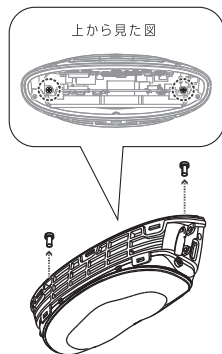


⑥ 内ケースを取り外す。
※内ケースは外周の4ヶ所のツメを
先の細いものなどで外してください。

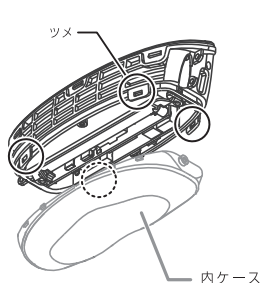

⑦ 電池のケーブルをコネクタから外し、
電池ケースを取り外す。

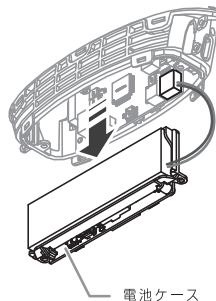

⑧ プラスチック定規のような薄いもので、
電池ケースから電池を取り外します。
※強粘着テープで接着されています。

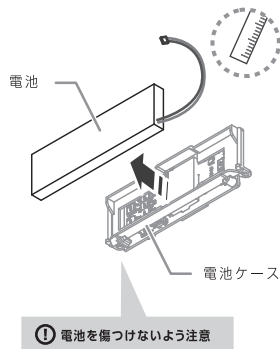

上記は製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
お客様ご自身で分解した場合、故障の原因となりますのでご注意ください。

お問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

 **0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話

 **0570-550-637** (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっております。

日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。

Memo

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から 1 年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.36）にご相談ください。
- 弊社製品保証約款に照らしお客様の言動がカスタマーハラスメント行為に該当すると判断した場合は、保証対応をお断り、または中止させていただくことがございます。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
 - (ロ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
 - (ハ) 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
 - ① 使用上の誤り ② お買い上げ後の輸送、転倒・落下 ③ 弊社以外の第三者による修理・改造 ④ 高温・多湿等の温度・湿度の使用環境 ⑤ 接続する他の機器の異常 ⑥ (家庭用製品の業務用使用等) 想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用 ⑦ (説明書等で指定がある場合) 指定方法以外での給電 ⑧ 非純正部品の使用 ⑨ 車両・船舶への搭載 ⑩ 海外でのご使用
 - (ニ) 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
 - (ホ) 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
 - (ヘ) 改造・分解の形跡がある場合
 - (ト) 説明書、注意書等で弊社から案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法（レンタル行為を含みます）でご利用された場合
 - (チ) 保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
 - (リ) 弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品（オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます）と判断した場合
 - (ヌ) 製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
 - (ル) その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でないと弊社が判断した場合
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

No. _____

保証書

持込修理

品 名	家庭用美容器	型 番	YJFD5
形 名	リフトロジー プロ		
無料 修理 保証	対 象 部 分	期 間	
	本体のみ	お買い上げ日から 1 年 間	
※販売者名	店名・住所・電話		
	 ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など



0120-776-282

携帯電話



0570-550-637

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。
左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※上記期間は目安となりますため、箇所により生産完了から3年以内でも部品在庫が無くなる可能性がございます。

※製造・販売から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。



www.ya-man.com