

No.

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	YJFM24V
形名	フォトプラス プレステージ SP II		
無料修理保証	対象部分：本体のみ	期間	ご購入日から1年間
※販売者名	店名・住所・電話 ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
●所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日・お買い上げ店がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態であった場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無料修理を要する場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。
 - と転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
 - ご来店時で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
 - 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理となります。
 - (イ) お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
 - (ロ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
 - (ハ) 以下①～⑨が原因による故障および修理の場合
 - ①使用上の誤り ②お買い上げ後の輸送、転居、落下 ③弊社以外の第三者による修理・改造 ④高温・多湿等の温度・湿度の使用環境
 - ⑤接続する他の機器の異常 ⑥(家庭用製品の業務用使用等)想定を大幅に超える長期間又は異常電圧下での使用 ⑦(説明書等で指定がある場合) 指定方法以外での給電 ⑧非純正品の使用 ⑨車両船への搭載 ⑩海外でのご使用
 - (ニ) 火災・地震・水害その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
 - (ホ) 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
 - (ヘ) 改造・劣形の形成がある場合
 - (ト) 説明書、注意事項等弊社からの案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法でのご使用が確認された場合
 - (チ) 保証書又は明細書のご提示が無い場合又は、お買い上げ年月日販売店名簿の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
 - (リ) 弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品(オークション)購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合
 - (ヌ) 製造・販売から相当の期間を経て、修理・交換用品の手配が難しい場合
 - (ル) その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でない弊社が判断した場合
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。
※その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/)および「ヤーマン製品保証約款」(https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/)をご確認ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※製造・販売から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」(https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/)および「ヤーマン製品保証約款」(https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/)をご確認ください。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

ヤーマンコールセンター受付 9:00～17:00(土日祝日年末年始除く)

固定電話など

☎ 0120-776-282(通話料無料)

携帯電話

☎ 0570-550-637(通話料有料)

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4



www.ya-man.com

YAMAN

TOKYO JAPAN

保管用
保証書付

取扱説明書

家庭用美容器

フォトプラス プレステージ SP II

YJFM24V



もくじ

安全上のご注意	1
海外でのご使用について	7
各部のなまえ	8
ご使用前に	9
使いかた	17
使い終わったら	22
こんなときには	23
アフターサービス	28
●製品仕様	30
●保証について	30




このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。




安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。 *物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について

	してはいけないことを示しています。
	しなければならないことを示しています。
	注意しなければならないことを示しています。

危険

次に該当する人は使用しない。



禁止

- 医用電気機器の誤動作を招く原因となります。
- ◆医用電気機器を使用している人
 - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器
 - ・人工心肺など生命維持用医用電気機器
 - ・心電計などの装着型医用電気機器

警告

次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- ・心臓疾患、障害およびその疑いのある人
- ・温度や刺激の感覚が自覚できない人・自己免疫疾患のある人
- ・幼児や自分で意思表示できない人

次の人はご使用前に医師にご相談ください。

- ・急性疾患の人・感染症疾患の人・悪性腫瘍のある人・有熱性疾患の人
- ・高血圧の人や血液疾患のある人・発熱している人
- ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人
- ・神経障害のある人
- ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人・通院して薬を服用中の人
- ・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人



禁止

次のような場合や部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- ・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合・酒気帯びの場合
- ・口内や陰部、粘膜など・眼球
- ・上まぶた(COOLモード以外)。LED光は照射可能)
- ・下まぶた及び目尻(EYE CAREモード、COOL以外。LED光は照射可能)
- ・のど・頭部・膨らんだホクロ・ウイルス性のイボ・骨折をしている部位
- ・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等の有る部位
- ※施術後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。(施術例：ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)
- ・外科手術(形成、整形、美容)等で体内に金属を埋め込んだ部位



禁止

皮膚が薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。

お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。



禁止

オーバーケアをしない。使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。

身体に危害を与える原因となります。



禁止

使用前に電極/ヘッドの割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。

けが・肌トラブルの原因となります。

警告

次のような場所で機器の使用・保管・充電しない。

- ・浴室や浴槽、シャワー、洗面器または水の入った他の容器の近く
 - ・ほこりの多い場所・直射日光の当たる場所や屋外
 - ・傾斜、振動、衝撃のある場所
 - ・強い電波や磁気の発生する場所
 - ・引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近く
 - ・油煙、湯気の当たる場所
 - ・発熱器具（ストーブ等）の近くなど高温になる場所
 - ・温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具のそば）
- 火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。



禁止

ACアダプターが破損したら使用しない。

ヤーマンコールセンター（P.30）にお問い合わせの上、専用ACアダプターをお使いください。



禁止

使用中に、プラグをコンセントから抜いたり、本体側からプラグを抜かない。

感電・ショートによる発火・火災の原因となります。必ず電源をオフにしてからプラグを抜いてください。



禁止

取扱説明書に記載されている用途・部位以外には使用しない。故障・けがの原因となります。



用途以外
禁止

子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。

事故・けがの原因となります。



使用者の
制限



禁止

指定環境温度以下で使用しない。

電極がお肌から離れずにお肌を傷めることがあります。



禁止

通電したまま放置しない。火災・事故の原因となります。



使用者の
制限

本体/ACアダプターは子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。また、子供に遊ばせない。事故・けがの原因となります。



発火注意

火中投入・加熱・高温・高圧での充電・使用・保管をしない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱・発火・破裂の原因となります。

警告



必ず守る

機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する。火災・感電の原因となります。



分解禁止

分解や修理・改造はしない。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



プラグを抜く

地震や雷を感じたら電源をオフにし、プラグを抜く。火災・感電の原因となります。



禁止

専用のACアダプター以外は使用しない。感電、ショート、発火の原因となります。



タコ足配線
禁止

コンセントや配線器具の定格容量を超えて配線（タコ足配線）しない。感電・ショート・発火・故障の原因となります。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

ACアダプターが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。感電・ショート・発火・故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



プラグを抜く

プラグを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く（金属部に触れないようにする）。また、濡れた手で抜き差しはしない。感電・ショート・発火・故障の原因となります。



プラグを抜く

使用後や使用しないとき、機器のお手入れをするときは、必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。充電が終わったときはACアダプターをコンセントから抜いてください。火災・事故の原因となります。



無理な扱い
禁止

ACアダプターを破損、加工しない。束ねたりねじったりなど無理に力を加えない。ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。収納時にはコードのねじれを直してください。



必ず守る

必ず交流100～240Vで使用する。コンセントは根元まで確実に差し込む。火災・感電・事故の原因となります。※無料修理保証は国内でのご使用に限ります。

注意



禁止

強く押しあてず、一ヶ所に集中して使用しない。

必要以上に強く押し付けたり一ヶ所に集中して使用するとお肌を傷める原因となります。



禁止

車両運転中に使用しない。

事故やけがの原因となります。



禁止

COOLモードを連続して使用しない。

連続使用すると、冷え方が弱く感じられるようになります。再度使用するときは30分以上間をあけてから使用してください。



必ず守る

初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。自身にあったレベルで使用する。

レベルは少しずつ調節してください。事故・けがの原因となります。



禁止

電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。他の電気製品(電気毛布・敷布・こたつ等)との同時使用はしない。

誤動作による事故の原因となります。



禁止

シャワーや蛇口から出る強い水圧を当てたり、水中に沈めたりしない。

本体はJIS保護等級IPX5の性能を有していますが、防滴仕様です。シャワーや水道の蛇口から出る強い水圧や水中には対応していませんので、故意に水をかけないでください。故障の原因となります。



必ず守る

お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、直ちに使用を中止する。

お肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

注意



禁止

LED光を直接のぞき込まない。LED光で上まぶた、下まぶた、目尻へのケアをするときは、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離して使用する。

目やお肌を傷める原因となります。



必ず守る

歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、レベルを下げ、使用部位を調整する。

EMSによりほお・あごに刺激を強く感じたり不快に感じたりすることがあります。強い違和感を覚える場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

同一部位に15分以上の使用は避ける。

再度同一部位に使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。過度なご使用はお肌を傷める可能性があります。あくまでも目安ですので、お肌の状態をみながらご使用ください。



プラグを抜く

停電したときは、直ちに電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。事故の原因となります。

警告



必ず守る

必ず交流100～240Vで使用する。(無料修理は国内のみ)
火災・感電・故障の原因となります。




発火注意

必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用する。
発熱・発火・故障の原因となります。

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。


●本体

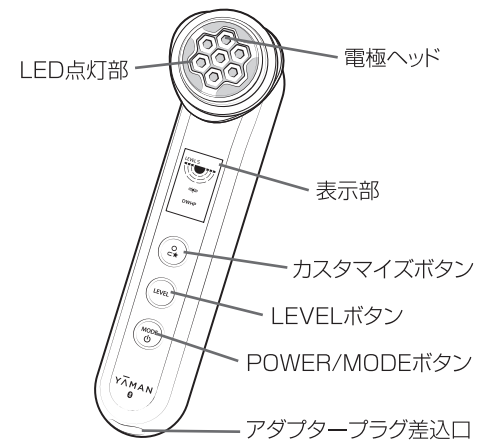

【付属品】

●コットンストッパー

※ご購入時は本体の電極ヘッドに付いています。
※コットンを電極ヘッドに固定できます。

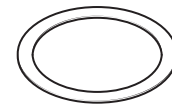

●ACアダプター

※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

ご使用の前に

表示部の見かた

充電のしかた

本製品は充電式でコードレスでの使用、またはACアダプターを接続しての使用ができます。コードレスで使用する場合は、必ず充電してから使用してください。

- ・ 使い始め(購入直後や長時間使用しなかった場合は)必ず充電し、充電表示が点滅から点灯に変わったことを確認してから使用してください。
- ・ アダプタープラグ差込口に水が付着していないことを確認してから接続してください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。

●充電時間の目安


充電時間	動作時間
約3時間	約30分

- ※充電環境 室温約25℃において。
- ※満充電直後からの動作時間です。
- ※動作時間は使用モード・使用レベル・使用環境によって変わります。
- ※電池の残量、使用環境によって、充電時間は前後します。

●充電のしかた

- 1 本体のアダプタープラグ差込口にアダプタープラグを差し込む。
- 2 ACアダプターをコンセントに差し込む。
 - ・ 必ず専用のACアダプターを使用してください。
 - ・ ACアダプターは壁面のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしないでください。
 - ・ 充電を開始すると充電表示が点滅します。充電が完了すると充電表示が点灯します。
- 3 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜き、アダプタープラグを本体から抜く。

●表示部・ボタン

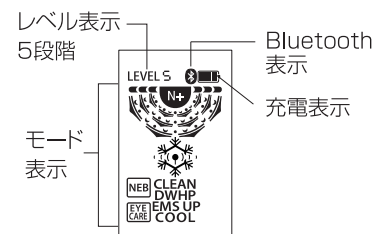






- カスタマイズボタン
- LEVELボタン
- POWER/MODEボタン

- ・ POWER/MODEボタンを長押しして電源をオンにします。(スタンバイ状態になります。)
- ・ 各モード動作時にPOWER/MODEボタンを押すとモードが切り替わります。
- ・ デフォルトケア、カスタマイズケアどちらもCLEAN・DWHP/NEB・EMS UP・EYE CAREモードではレベルを選択することができます。レベルは5段階あり、LEVELボタンで選択することができます。
- ・ POWER/MODEボタンを長押しすると電源オフになります。
- ・ カスタマイズ時にはモード表示にBluetoothマークが付きまます。

●モード表示

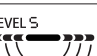・デフォルトケア

POWER/MODEボタンを長押しし、電源をオンにしたあと再度POWER/MODEボタンを押すと、CLEAN→DWHP→EMS UP→EYE CARE→COOL→CLEAN(繰り返し)・・・の順にモードが切り替わります。






モード	CLEAN	DWHP	EMS UP	EYE CARE	COOL
機能	CERTEC*/イオン導出/LED(赤)	CERTEC*/DYHP/DWHP/LED(赤・橙)	CERTEC*/EMS/LED(赤)	CERTEC*/マイクロカレント/目元専用EMS/LED(赤)	冷却/LED(青)
モード表示	LEVEL 5  CLEAN	LEVEL 5  DWHP	LEVEL 5  EMS UP	LEVEL 5  EYE CARE	 COOL

・カスタマイズケア

POWER/MODEボタンを押したあと、カスタマイズボタンを押すと、CLEAN→NEB→EMS UP→EYE CARE→COOL→CLEAN(繰り返し)・・・の順にモードが切り替わります。WeChatのミニプログラムでモードをカスタマイズできます。カスタマイズ時にはモード表示にBluetoothマークがつかます。

※中華人民共和国本土の電話番号を使用している方のみ対象です。

WeChatにつながなくても初期設定として以下のモードが使用できます。

モード	CLEAN	NEB	EMS UP	EYE CARE	COOL
機能	CERTEC*/イオン導出/LED(赤)	CERTEC*/DYHP/LED(赤・橙)	CERTEC*/EMS/LED(赤)	CERTEC*/マイクロカレント/目元専用EMS/赤LED	冷却/LED(青)
モード表示	LEVEL 5  CLEAN	LEVEL 5  NEB	LEVEL 5  EMS UP	LEVEL 5  EYE CARE	 COOL

* Cell Energy Regeneration Technology

●レベル表示

初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。レベルは5段階あり、心地よいと感じるレベルを選んでください。LEVELボタンを押すたびレベルが切り替わります。

●充電目安表示

充電量に合わせて、充電表示が1個から3個まで順に点灯/点滅します。


コードレス使用時:点灯

充電しながら使用時:消灯

充電中:点滅

充電が完了すると充電表示が点灯します。

※コードレスで使用時、充電残量が少ないとピーピーと3回鳴り、充電表示が3回点滅し、電源が切れます。

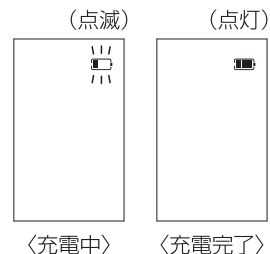

●安全機能

・温度センサー

お肌や電極ヘッドの温度が高くなってくると、安全のため出力を低くします。

また、高温になり過ぎると、安全のため電源がオフになります(ブザー音10回でお知らせ)。その場合は、約30分間本体を休ませてください。

・電流センサー

出力される電流値を測定し出力が流れすぎないように制御します。

・モーションセンサー

本体の動きを検知し、電極ヘッドを同じ箇所にあて続けている場合は、安全のため出力を停止します。本体を動かす速度が遅くなると、モーションセンサーの動きにより温感が弱まる場合があります。

・タッチセンサー

お肌に触れたことと離れたことを探知し出力を調整します。

●タイマー・スタンバイ機能

モード設定時間の約半分が経過すると「ピー」という音でお知らせします。

反対側のケアへの目安にしてください。(タイマー機能)

電源をオンにしたあとと各ケアのCLEAN・DWHPまたはNEB・EMS UP・EYE CAREモードが終了するとスタンバイ状態*となり、次のモードの表示が点滅します。各モード終了後のスタンバイ時間は約5分です。

※POWER/MODEボタンを押すと、点滅表示しているモードがスタートします。

※約5分間操作をしないと「ビッピッ」と音がなり、自動で電源が切れます。

●オートオフ機能(自動電源オフ)

スタンバイ状態から約5分間操作しないと「ピッピッ」と音がなり、自動で電源が切れます。デフォルトケア、カスタマイズケアどちらもCOOLモードの終了時は「ピッピッ」と音がなり、自動で電源が切れます。

●パーソナル記憶機能

モード終了時のレベルを記憶して、次回電源オン時に同じ設定となります。

●抵抗因子制御

お肌の電流の流れやすさを検知し適切な出力でトリートメントができるように制御します。

●防滴仕様

本製品はIPX5(JIS 防水保護等級)の防滴仕様です。

※完全防水仕様ではありません。水中にしずめたり、流水をあてないでください。

※ACアダプターは防水ではありません。

お肌へのプレテスト

※製品や使用する化粧品を初めてご使用になる際は必ず相性をプレテストしましょう。

1 お肌を清潔な状態にします。

- ・腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどでふきとります。
- ・使用時には身体から金属類(時計・ネックレス・指輪・イヤリング)を外してください。事故・けがの原因となります。

2 腕の内側に化粧品(ゲル・化粧水)または水を塗り、デフォルトケアのDWHPモードで約3分間製品を使用します。

- ・プレテストをした部分は水でぬらしたりこすったりしないでください。

24時間以内にお肌に異常(赤みやほてり)を感じなければ使用できます。



注意

- ・肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
- ・実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
- ・お肌に異常を感じた場合は使用しないでください。

各モードについて

本製品はデフォルトケアとカスタマイズケアを搭載しています。

- ・ デフォルトケア

モード	機能	おすすめの化粧品	コットン	時間	レベル	使用頻度(目安)
CLEAN	・CERTEC* ・イオン導出 ・LED(赤)	化粧水 または 水	コットン あり	約3分	5段階	週に 2~3回
DWHP	・CERTEC* ・DYHP ・DWHP ・LED(赤・橙)	美容液 または シートマスク	どちらでも	約3分	5段階	
EMS UP	・CERTEC* ・EMS ・LED(赤)	美容液 または シートマスク	どちらでも	約3分	5段階	
EYE CARE	・CERTEC* ・マイクロカレント ・目元専用EMS ・LED(赤)	目元用 化粧品	どちらでも	約3分	5段階	週に5回
COOL	・冷却 ・LED(青)	乳液または クリームを 塗布した後 に使用する	コットン なし	約3分	なし	毎日 でも可

* Cell Energy Regeneration Technology

- ・ カスタマイズケア

カスタマイズケアはWeChatのミニプログラムでモードをカスタマイズできます。

※中華人民共和国本土の電話番号をお持ちの方のみ対象です。

WeChatにつながなくても初期設定として以下のモードが使用できます。


モード	機能	おすすめの化粧品	コットン	時間	レベル	使用頻度(目安)
CLEAN	・CERTEC* ・イオン導出 ・赤LED	化粧水 または 水	コットン あり	約3分	5段階	週に 2~3回
NEB	・CERTEC* ・DYHP ・LED(赤・橙)	美容液 または シートマスク	どちらでも	約3分	5段階	
EMS UP	・CERTEC* ・EMS ・LED(赤)	美容液 または シートマスク	どちらでも	約3分	5段階	
EYE CARE	・CERTEC* ・マイクロカレント ・目元専用EMS ・LED(赤)	目元用 化粧品	どちらでも	約3分	5段階	週に5回
COOL	・冷却 ・LED(青)	乳液または クリームを 塗布した後 に使用する	コットン なし	約3分	なし	毎日 でも可

* Cell Energy Regeneration Technology

- ・ 必ずお肌の上を動かしながら使用してください。(EYE CARE・COOLモード使用時以外)
- ・ COOLモードを連続使用すると、冷え方が弱く感じられるようになります。再度使用するときは30分以上間を空けてから使用してください。
- ・ お手持ちの化粧品をご使用いただく場合は、必ず水溶性の化粧品を使用してください。(COOLモード以外)オイル系、スクラブ系は使用しないでください。

コットンの付けかた

1 本体からコットンストッパーを外す。

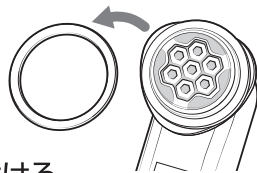

2 電極ヘッド部分にコットンを1枚のせ、コットンストッパーを押し込むように付ける。

※コットンストッパーでコットンがとまりづらい場合は、大きめで、薄手のコットンを使用してください。厚手のコットンはとまりづらいため、半分に割いて使用してください。

※コットンが厚すぎるとCERTEC*の温感が弱くなる可能性があります。

3 コットンにお手持ちの化粧水やゲルを付ける。

※電極ヘッド面全体に化粧水やゲルがいきわたるように付けてください。

※さらとした化粧水では、温感が弱くなる場合があります。

おすすめ化粧水…とろみのある化粧水

※使用後は電極ヘッドに付いた化粧水やゲルを必ず拭き取ってください。

基本の使いかた

●使用上の注意

●お手持ちの化粧品をご使用いただく場合は、必ず水溶性の化粧品を使用してください。(COOLモード以外)オイル系、スクラブ系は使用しないでください。

●必ずお肌の上を動かしながら使用してください。同じ箇所にあて続けるとやけどの原因となります。

●CERTEC*は使用時の化粧品の種類やお肌の状態によって、温度の感じかたが変わります。

●上まぶたは全モード使用できません。

下まぶた・目尻はEYE CARE・COOLモード以外はご使用できません。

※LED光は上まぶた、下まぶた、目尻に照射できます。目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離してください。

●推奨環境温度15℃～30℃

●使用時には身体から金属類(時計・ネックレス・指輪・イヤリング)を外してください。事故・けがの原因となります。

●機器のお肌に触れる部分は、毎回お手入れし、常に清潔な状態で使用してください。肌トラブルの原因となります。

●ケアのしかた

1 メイクを落として洗顔する。

※顔に使用するときには、必ずメイクを落として使用してください。

メイクの上から使用すると、ファンデーションによりお肌が黒く汚れることがあります。

・油分や汚れを落とし、お肌を清潔な状態にします。

※COOLモードはメイクの上からでもご使用になれます。

・お手持ちの化粧品をご使用いただく場合は、必ず水溶性の化粧品を使用してください(COOLモード以外)。オイル系、スクラブ系は使用しないでください。製品が故障したり、肌トラブルの原因となります。

2 必要な場合はコットンを装着し、化粧水を付ける。

※CLEANモードで使用したコットンは必ず交換してください。

3 POWER/MODEボタンを長押しして、電源をオンにする(スタンバイ状態になっています)。

デフォルトケアでケアする場合はそのまま、モード、レベルを選択する。

カスタマイズケアでケアする場合はカスタマイズボタンを押したあと、モード、レベルを選択する。

4 お肌へのあてかた(P.19-21)を参照して電極ヘッドをお肌にあてて動かす。

・各モードが終了するとスタンバイ状態(約5分間)になり、POWER/MODEボタンを押すと次のモードがスタートします。

※使用中は必ず、電極ヘッドをしっかりとお肌にあててください。

5 POWER/MODEボタンを長押しして電源をオフにする。

※COOLモード終了時は自動的に電源がオフになります。

6 ケア終了後お肌を整える。

・適宜クリームなどを塗布してください。

※使用後は毎回、「使い終わったら」(P.22)を参照して、製品に付着した皮脂汚れや美容液などを取り除いてください。

そのまま放置した場合、製品の故障や、肌トラブルの原因となります。

お肌へのあてかた

矢印に沿ってお肌の上を動かしながら使用してください。

・電極とお肌の間に、常に化粧品・水などがあるように、途中で補充しながらご使用ください。

化粧品・水などが少ないと、刺激の伝達が悪くなったり、肌トラブルの原因となります。

・必ずお肌の上を動かしながら使用してください。(EYE CARE・COOLモード使用時以外)

一ヶ所にあて続けるとやけど・低温やけどの原因となります。


・上まぶた、下まぶた、目尻には電極ヘッドをあてないでください。


(EYE CARE・COOLモード以外。LED光は照射可能)


<CLEAN・DWHP・NEBモード>

・熱く感じる場合は少し速めに動かしてください。または、コットンなどを使用すると熱さを抑えることができます。

・電極ヘッド全体がお肌に触れるように使用してください。

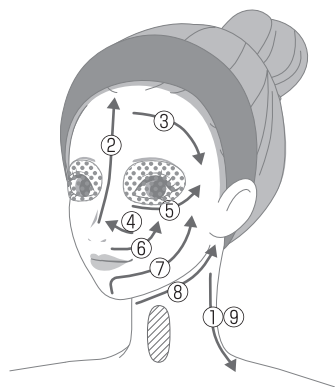

 使用できない部位

 LED光のみ使用可能な部位
(使い方はP.21参照)

※目を閉じ、電極ヘッドをお肌から
5cm以上離してください。

本体を動かすスピードの目安：1秒間に2cm





<EMS UPモード>

肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げたり、部位をずらして使用してください。


または水・ローション・ジェルなどでお肌を湿らせてから使用してください。

そのまま使用すると、お肌を傷める原因となります。

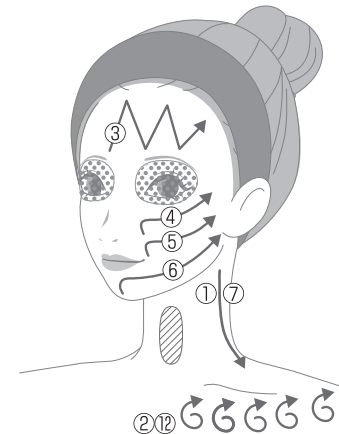

 矢印のようにくるくる動かす

 使用できない部位

 LED光のみ使用可能な部位
(使い方はP.21参照)

※目を閉じ、電極ヘッドをお肌から
5cm以上離してください。





<EYE CAREモード>

目頭から目尻に向かってスタンプを押すように「押しあて→離す→移動」を繰り返してください。

※3秒以上連続で押しあてないようにしてください。

※押しあてながら動かさしないでください。

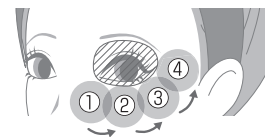

 使用できない部位：上まぶた
※下まぶた、目尻には使用可

押しあてる時間の目安：一箇所約3秒



目もとの乾燥が気になる方は片側約3分、
計6分の使用がおすすめです。

<COOLモード>

顔にスタンプを押すように「押しあて→離す→移動」を繰り返してください。
※上まぶた、下まぶた、目尻にもご使用いただけます。



●LED光での上まぶた、下まぶた、目尻へのケア

コットンを外して目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離して光をかざしてください。



※機器のお肌に触れる部分は、毎回お手入れし、常に清潔な状態で使用してください。
肌トラブルの原因となります。

●お手入れ・保管のしかた

- 1 電源をオフにして、ACアダプターを外す。
- 2 電極ヘッド・コットンストッパーの汚れは、水を含ませてかたく絞った布で拭き取る。コットンストッパーは水洗いする。
 - ・コットンストッパーは本体から外した状態で水洗いし水分を拭き取ってください。
 - ・本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かないでください。
本体の表面に損傷を与える原因となります。
 - ・使用後は化粧水やゲルをよく拭き取り、化粧水やゲルが付着した状態で放置しないでください。故障の原因となります。
- 3 電極ヘッド・コットンストッパー以外の汚れは、乾いた布で拭き取る。

保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いて保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった場合、再使用する前には、正常に作動するか点検をしてください。事故・故障のおそれがあります。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.23～P.24)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.30)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

こんなときには

困ったときは

こんな症状	考えられる原因と処置方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> → POWER/MODEボタンを長押しして、電源をオンにしてください(P.18)。 → 充電残量が不足しています。充電してください(P.9)。または、ACアダプターを接続して使用してください。
充電しても数分しか使えない	<ul style="list-style-type: none"> → 充電残量が不足しています。充電してください(P.9)。または、ACアダプターを接続して使用してください。 → 充電電池の寿命(充電回数の目安:300回)です。販売店またはヤーマンコールセンターにご連絡ください(P.30)。※故障の原因となるためお客様では交換できません。 → ボタンを押し間違えた可能性があります。POWER/MODEボタンを長押しして、再度電源をオンにしてください(P.18)。 → スタンバイ状態またはオートオフになっています(P.12-13)。POWER/MODEボタンを押してください。 → 低温環境ですと、電源がすぐ切れる可能性があります。充電しながらご使用ください。
電源が切れる	<ul style="list-style-type: none"> → ピーピーピーと音がなって切れる場合は、充電不足です。充電してください(P.9)。または、ACアダプターを接続して使用してください。 → 低温環境下に長時間置かれると、電源が切れることがあります。推奨環境温度15℃~30℃にしばらく置いていただいた後、充電状態も確認の上、再度お試しください。
充電が開始されない(充電表示が点滅しない)	<ul style="list-style-type: none"> → アダプタープラグが本体に差し込まれていません。アダプタープラグを本体に差し込んでください(P.9)。 → ACアダプターを壁面コンセントに差し込み、電源オフの状態ではLEVELボタンとPOWER/MODEボタンを同時に押ししてください(リセット)。
本体が熱い	<ul style="list-style-type: none"> → 連続して使用しています。電源をオフにして30分以上本体を休ませてください。

こんなときには

こんな症状

考えられる原因と処置方法

COOLモードで冷えない	<ul style="list-style-type: none"> → COOLモードを連続使用しています。電源をオフにして30分以上本体を休ませてください。 → 推奨環境温度以外で使用しています。15℃~30℃の環境で使用してください。
ピリピリする・痛い	<ul style="list-style-type: none"> → LEVELボタンでレベルを下げてください。 → 電極ヘッド全体がお肌にあてていません。鏡で確認しながら、電極ヘッド全体をお肌にあててください。
EMSが弱い・感じない	<ul style="list-style-type: none"> → LEVELボタンでレベルを上げてください。 → お肌に水分が足りないか乾燥しています。お肌を化粧水やゲルで湿らせてからご使用ください。 → 筋肉に沿ってあてていません。鏡で確認しながら、電極ヘッドを筋肉に沿ってあててください(P.20)。 → 充電残量が不足しています。充電してください(P.9)。または、ACアダプターを接続して使用してください。
熱い(COOLモード使用時以外)	<ul style="list-style-type: none"> → 電極ヘッドをお肌に長時間あて続けています。COOLモード使用時以外は、必ず動かしながら使用してください。 → 電極ヘッドをゆっくり動かしています。少し速く動かしてください。 → 使用する化粧品、コットンの有無によっては、非常に熱く感じる場合があります。熱いと感じる場合は、以下をお試しください。 <ul style="list-style-type: none"> ・コットンを使用する、またはコットンを使用していかなしで使用する ・使用する化粧品を変える
CERTEC*の熱さを感じない	<ul style="list-style-type: none"> → スタンバイ状態またはオートオフになっています(P.12-13)。電源を入れ直すか、POWER/MODEボタンを押してモードをスタートさせてください。 → お肌に水分が足りないか乾燥しています。お肌を化粧水やゲルで湿らせてからご使用ください。 → 電極ヘッドを速く動かしています。少しゆっくり動かしてください。
レベルが変わらない	<ul style="list-style-type: none"> → COOLモードはレベル変更できません。
操作できない	<ul style="list-style-type: none"> → LEVELボタンとPOWER/MODEボタンを同時に押ししてください(リセット)。

こんなときには


よくあるご質問


Q	A
化粧水やゲルは1回どれくらい使用すればよいですか？	本製品の特長として、化粧水やゲルを多く使用したほうがより温熱の体感を得ることができます。目安として、コットンを使用する場合は、電極ヘッド全体が化粧水でぬれるくらい使用してください。ゲルはパール粒2つ分程度使用してください。化粧水やゲルが少ないと感じたら付け足すことをおすすめします。
お風呂で使用できますか？ また、本体は水洗いできますか？	お風呂（浴室、浴槽）での使用はできません。本体はJIS保護等級IPX5の性能を有していますが、防滴仕様であり、シャワーや水道の蛇口から出る水流、水中には対応していません。故障の原因となりますため、本体の水洗いはできません。コットンストッパーのみ水洗い可能です。
CLEAN・DWHP・NEB・EMS UP・EYE CAREモード使用時にCERTEC*の温まりを感じません	電極ヘッドをゆっくり動かしたり、押し付け具合を強くしてみてください。 また、コットンの水分量が足りない可能性があります。化粧水やゲルを足してください。
コットンに汚れが付きますか	目に見えなくても汚れは落ちています。また、汚れの付きかたには個人差があります。
シートマスクの上から使用できますか	シートマスクの上からご使用可能です（CLEANモード除く）。デフォルトケアのDWHPモード、カスタマイズケアのNEBモード使用時がおすすめです。

* Cell Energy Regeneration Technology

●Bluetooth®機能について

- ・本製品は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。
- ・Bluetooth機能を使用した通信にデータや情報の漏えいが発生しなくても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品の周波数帯は次のとおりです。

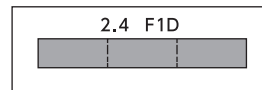

- 2.4 : 2.400MHz帯を使用しています。
- F : 主搬送波の変調の形式のうち、周波数変調であることを示します。
- 1 : 主搬送波を変調する信号の性質のうち、デジタル信号である単一チャンネルのもので変調のための副搬送波を使用しないことを示します。
- D : 転送情報の形式で、データ転送、遠隔測定または遠隔指令であることを示します。
-  : 2.402MHz～2.480MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

- ・Bluetooth機器使用上の注意事項
本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家庭製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用機内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。
 - 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
 - 2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
 - 3. その他、ご不明な点につきましては、ヤーマンコールセンター（P.30）までお問い合わせください。
- 本製品には、電波法に基づく工事設計認証を受けた特定無線設備を用いています。

- ・本製品およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ・本製品についてのご注意
改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。
- ・電波に関わるご注意
本製品はBluetooth機能を搭載しています。国や地域によって、法律によりBluetooth機能が使用できない場合があります。ご購入された国や地域以外の使用については、各国および地域の当局に確認ください。

●商標

- ・Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, inc.が所有する登録商標であり、ヤーマン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

●充電機について

- ・充電機は消耗品です(保証対象外)。
- ・充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は約300回が目安です)。
- ・充電機交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.30)にご相談ください。

●廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。廃棄方法については、下記「電池の廃棄について」と「電池の取り出し方」をご確認ください。





<電池の廃棄について>

- この製品に使用しておりますリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。
- ・電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
 - ・電池を取る前には必ず電源をオフにし、ACアダプターを抜いてください。
 - ・電池を取り出す際はドライバーを使用し、けがをしないように十分に注意しながら取り出してください。
 - ・電池を取り出す際は固いもの等で電池を傷つけないようにご注意ください。
※発熱、発火の原因となります。
 - ・取り出した電池は自治体の分別ルール(廃棄やリサイクル方法)に従って、処理をお願いいたします。


<電池の取り出しかた>

操作STEP 下図①～④を参照し、電池を取り出してください。


- ① 先の細いものなどを使って、外カバーを取り外します。
※強粘着テープで接着されています
- ② 内カバーの6ヶ所のゴム栓とネジを外します。

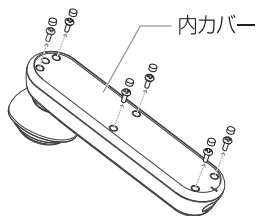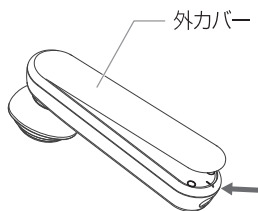

- ③ 内カバーを外して、バッテリーのケーブルをコネクタから外します。
- ④ 定規のような薄いものでバッテリーを取り外します。
※強粘着テープで接着されています

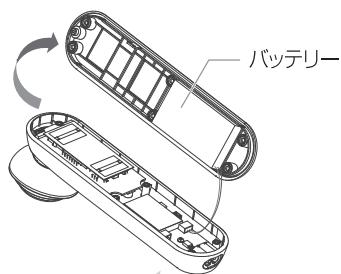

① ケーブルは切らない

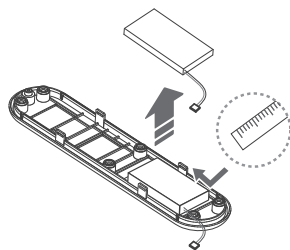

① バッテリーを傷つけないよう注意



⚠ この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
お客様ご自身で分解した場合、故障の原因となりますのでご注意ください。

●お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター 固定電話など **0120-776-282** (通話料無料)
受付 9:00～17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)
携帯電話 **0570-550-637** (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日・お買い上げ店が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※月曜日はお電話が混み合っております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっております。

●日本国外からのお問い合わせ先

販売店またはヤーマングローバルサイト(<https://www.ya-man.com/en/>)までお問い合わせください。

●製品仕様

定 格	DC9V 2.0A
消 費 電 力	約18W
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約3時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
外 形 寸 法	本体(コットンストッパー付):約W52 x D62 x H203(mm)
製 品 質 量	本体(コットンストッパー付):約312g
材 質	本体:ABS樹脂 パネル:アクリル樹脂、PU樹脂(一部アルミニウム) 電極ヘッド:PET樹脂/ステンレス 本体金属調部分:ABS樹脂(インジウム蒸着)
製 造 国	日本
付 属 品	コットンストッパー、ACアダプター
推 奨 環 境	15℃～30℃
防 水 機 能	JIS保護等級 IPX5

●保証について

- ・ 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。
また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただいております。
- ・ 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・ 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・ 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(上記)にご相談ください。