

No.

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	YJFM25
形名	フォトプラス プレステージ SP III		
無料修理保証	対象部分: 本体のみ	期間: お買い上げ日から1年間	
※販売者名	店名・住所・電話 ご購入日の見かる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管して下さい。		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印のお客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままだたりお買い上げ日やお買い上げ店がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に修理して無料修理を受ける場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご相談の場合は、事務局までお問い合わせください。
- ご報告にて直ちに修理を依頼する場合は、本製品と本書が依頼できない場合は、ヤマソロセンターご相談ください。
- 保証期間中でも、つづきの場合は有料修理になります。
 - (イ) 地震・火災・水害・その他の天災地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
 - (ホ) 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
 - (ヘ) 改造・分解の形跡がある場合
 - (ト) 説明書・注意書き等の警告から差し違った使用方法による方法又は弊社の指示がない方法で、シール等を剥がして使用された場合
 - (チ) 保証書は明確に記載してある場合では、お買い上げ年月日、販売店名等の記入又は押印が無い、あるいは字の書き込みがされている場合
 - (リ) 整体部品記録などに書き、部品、軸部、中古品(オーバー)購入や個人売却、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合
 - (ヌ) 修理販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
 - (ル) その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でない弊社が判断した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

* 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

* ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

* その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※ 性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※ 製造・販売から相当の期間を経て修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

個人情報の取り扱いについて

個人情報の取り扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

ヤーマンコールセンター受付 9:00~17:00(土日祝日年末年始除く)

固定電話など

0120-776-282(通話料無料)

携帯電話

0570-550-637(通話料有料)



www.ya-man.com

YAMAN
TOKYO JAPAN

保管用

保証書付



取扱説明書

家庭用美容器

フォトプラス プレステージ SP III

YJFM25

もくじ

安全上のご注意	1
海外でのご使用について	7
各部のなまえ	8
ご使用の前に	9
使いかた	15
使い終わったら	20
こんなときには	21
アフターサービス	24
●製品仕様	26
●保証について	26

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

英語・中国語でも取扱説明書をご覧になれます

You can also check the instruction use's manual in English and Chinese.
<https://www.ya-man.co.jp/en/support/documents/>



安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをして生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



危険

次に該当する人は使用しない。



医用電気機器の誤動作を招く原因となります。

◆医用電気機器を使用している人

- ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器
- 人工心肺など生命維持用医用電気機器
- 心電計などの装着型医用電気機器

禁止



警告

次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・心臓疾患、障害およびその疑いのある人

・温度や刺激の感覚が自覚できない人 ・自己免疫疾患のある人

・幼児や自分で意思表示できない人

次の人はご使用前に医師にご相談ください。

・急性疾患の人・感染症疾患の人・悪性腫瘍のある人・有熱性疾患の人

・高血圧の人や血液疾患のある人・発熱している人

・糖尿病などの高度な末梢循環機能障害による知覚障害のある人

・神経障害のある人

・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人・通院して薬を服用中の

・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人



禁止



禁止

皮膚が薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。

お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。



禁止

使用前に電極/ヘッドの割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。

けが・肌トラブルの原因となります。



禁止

オーバーケアをしない。

使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。

身体に危害を与える原因となります。



警告

次のような場所で機器の使用・保管・充電しない。



禁止

- ・浴室や浴槽、シャワー、洗面器または水の入った他の容器の近く
 - ・ほこりの多い場所・直射日光の当たる場所や屋外
 - ・傾斜、振動、衝撃のある場所
 - ・強い電波や磁気の発生する場所
 - ・引火性のもの(アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど)の近く
 - ・油煙、湯気の当たる場所
 - ・発熱器具(ストーブ等)の近くなど高温になる場所
 - ・温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)
- 火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。



禁止

ACアダプターが破損したら
使用しない。

ヤーマンコールセンター
(P.26)にお問い合わせの
上、専用ACアダプターを
お使いください。



禁止

使用中に、プラグをコンセントから抜いたり、本体側から
プラグを抜かない。

感電・ショートによる発火・
火災の原因となります。
必ず電源をオフにしてから
プラグを抜いてください。



用途以外
禁止

取扱説明書に記載されている
用途・部位以外には使用しない。
故障・けがの原因となります。



使用者の
制限

子供は保護者同意のうえ、保
護者または専門家などの監
督下で使用する。

事故・けがの原因となります。



禁止

指定環境温度以下で使用し
ない。

電極がお肌から離れずにお
肌を傷めることができます。



禁止

通電したまま放置しない。

火災・事故の原因となります。



使用者の
制限

本体/ACアダプターは子供
の手の届かない場所に保管
し、一人で使わせない。また、
子供に遊ばせない。

事故・けがの原因となります。



発火注意

火中投入・加熱・高温・高圧で
の充電・使用・保管をしない。

本製品は充電式電池を内
蔵しています。

発熱・発火・破裂の原因と
なります。



必ず守る

機器を落としたり破損した
りした場合は、直ちに電源
をオフにしてプラグを抜き、
必ず修理・点検を依頼する。

火災・感電の原因となります。



プラグ
を抜く

プラグを抜くときは、必ず先端
を持って引き抜く(金属部に触
れないようにする)。また、濡れ
た手で抜き差しはしない。
感電・ショート・発火・故障
の原因となります。



分解禁止

分解や修理・改造はしない。
火災・感電・けがの原因と
なります。
修理はお買い上げの販売
店窓口にご相談ください。



プラグ
を抜く

使用後や使用しないとき、
機器のお手入れをすると
は、必ず電源をオフにし、電
源プラグをコンセントから
抜く。

充電が終わったときはACア
ダプターをコンセントから抜
いてください。火災・事故の
原因となります。



プラグ
を抜く

地震や雷を感じたら電源を
オフにし、プラグを抜く。
火災・感電の原因となります。



禁止

専用のACアダプター以外
は使用しない。

感電・ショート・発火の原因
となります。



無理な扱い
禁止

ACアダプターを破損、加工
しない。束ねたりねじったり
など無理に力を加えない。
ケーブルが破損し、火災・感
電の原因となります。
収納時にはコードのねじれ
を直してください。



タコ足配線
禁止

コンセントや配線器具の定
格容量を超えて配線(タコ
足配線)しない。

感電・ショート・発火・故障
の原因となります。



使用禁止

ACアダプターが傷んだり、
差し込みがゆいときは使
用しない。

感電・ショート・発火・故障
の原因となります。
修理はお買い上げの販売
店窓口にご相談ください。



必ず守る

必ず交流100~240Vで
使用する。

コンセントは根元まで確実
に差し込む。

火災・感電・事故の原因と
なります。
※無料修理保証は国内で
のご使用に限ります。



注意

禁止
強く押しあてず、一ヶ所に集中して使用しない。
必要以上に強く押し付けたり一ヶ所に集中して使用するとお肌を傷める原因となります。

禁止
車両運転中に使用しない。
事故やけがの原因となります。

禁止
COOLモードを連続して使用しない。
連続使用すると、冷え方が弱く感じられるようになります。
再度使用するときは30分以上間をあけてから使用してください。

必ず守る
初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。
刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。自身にあったレベルで使用する。
レベルは少しずつ調節してください。事故・けがの原因となります。

禁止
電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。
他の電気製品(電気毛布・敷布・こたつ等)との同時使用はしない。
誤動作による事故の原因となります。

禁止
シャワーや蛇口から出る強い水圧を当てたり、水中に沈めたりしない。
本体はJIS保護等級IPX5の性能を有していますが、防滴仕様です。シャワーや水道の蛇口から出る強い水圧や水中には対応ていませんので、故意に水をかけないでください。故障の原因となります。

必ず守る
お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。
使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、直ちに使用を中止する。
お肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



注意

禁止
LED光を直接のぞき込まない。LED光で上まぶた、下まぶた、目尻へのケアをするときは、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離して使用する。
目やお肌を傷める原因となります。

必ず守る
歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、レベルを下げ、使用部位を調整する。
EMSによりほお・あごに刺激を強く感じたり不快に感じたりすることがあります。
強い違和感を覚える場合は、医師にご相談ください。

必ず守る
同一部位に15分以上の使用は避ける。
再度同一部位に使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。
過度なご使用はお肌を傷める可能性があります。あくまでも目安ですので、お肌の状態をみながらご使用ください。

必ず守る
停電したときは、直ちに電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。
事故の原因となります。

警 告



必ず交流100～240Vで使用する。(無料修理は国内のみ)

火災・感電・故障の原因となります。




必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用する。

発熱・発火・故障の原因となります。

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。


●本体

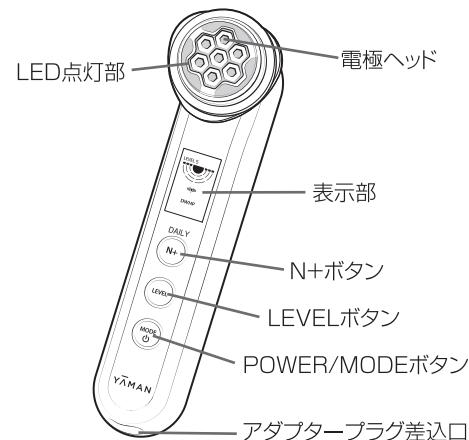

【付属品】

●コットンストッパー (シリバーリング)

※ご購入時は本体の電極ヘッドに付いています。
※コットンを電極ヘッドに固定できます。

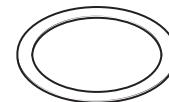

●ACアダプター

※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

ご使用の前に

充電のしかた

本製品は充電式でコードレスでの使用、またはACアダプターを接続しての使用ができます。コードレスで使用する場合は、必ず充電してから使用してください。

- ・使い始め（購入直後や長時間使用しなかった場合）は必ず充電し、充電表示が点滅から点灯に変わったことを確認してから使用してください。
- ・アダプタープラグ差込口に水が付着していないことを確認してから接続してください。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約3時間	約30分


※充電環境 室温約25°Cにおいて。
※満充電直後からの動作時間です。
※動作時間は使用モード・使用レベル・
使用環境によって変わります。
※電池の残量、使用環境によって、
充電時間は前後します。

●充電のしかた

- 1 本体のアダプタープラグ差込口にアダプタープラグを差し込む。
- 2 ACアダプターをコンセントに差し込む。
 - ・必ず専用のACアダプターを使用してください。
 - ・ACアダプターは壁面のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしないでください。
 - ・充電を開始すると充電表示が点滅します。充電が完了すると充電表示が点灯します。
- 3 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜き、アダプタープラグを本体から抜く。

表示部の見かた

●表示部・ボタン

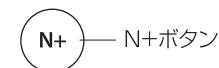

- ・POWER/MODEボタンを長押して電源をオンにします。
- ・各モード動作時にPOWER/MODEボタンを押すとモードが切り替わります。
- ・レベルは5段階あり、LEVELボタンで選択することができます。
- ・POWER/MODEボタンを長押しすると電源オフになります。

●オートオフ機能(自動電源オフ)

スタンバイ状態から約5分間操作しないと「ピッピッ」と音があり、自動で電源が切れます。DWHPコース、NEBコースどちらもCOOLモードの終了時は「ピッピッ」と音があり、自動で電源が切れます。デイリーケアはモード終了時「ピッピッ」と音があり、自動で電源が切れます。

●パーソナル記憶機能

モード終了時のレベルを記憶して、次回電源オン時に同じ設定となります。

●抵抗因子制御

お肌の電流の流れやすさを検知し適切な出力でトリートメントができるように制御します。

●防滴仕様

本製品はIPX5(JIS防水保護等級)の防滴仕様です。

※完全防水仕様ではありません。水中にしづめたり、流水をあてないでください。

※ACアダプターは防水ではありません。

お肌へのプレテスト

※製品や使用する化粧品を初めてご使用になる際は必ず相性をプレテストしましょう。

1 お肌を清潔な状態にします。

- 腕の内側を石鹼で洗い、タオルなどでふきとります。
- 使用時には身体から金属類(時計・ネックレス・指輪・イヤリング)を外してください。
事故・けがの原因となります。

2 腕の内側に化粧品(ゲル・化粧水)または水を塗り、DWHPコースのDWHPモードで約3分間製品を使用します。

- プレテストをした部分は水でぬらしたりこすったりしないでください。

24時間以内にお肌に異常(赤みやほてり)を感じなければ使用できます。



- 肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
- お肌に異常を感じた場合は使用しないでください。

各モードについて

	モード	機能	コットン	時間	レベル	使用頻度(目安)
DWHPコース	CLEAN	・CERTEC* ・イオン導出 ・LED(赤)	コットンあり	約3分	5段階	週に2~3回
	DWHP	・CERTEC* ・DYHP ・DWHP ・LED(赤・橙)	どちらでも	約3分	5段階	
	EMS UP	・CERTEC* ・EMS ・LED(赤)	どちらでも	約3分	5段階	
	EYE CARE	・CERTEC* ・目元専用EMS ・LED(赤)	どちらでも	約3分	5段階	週に5回
	COOL	・冷却 ・マイクロカレント ・LED(青)	コットンなし	約3分	なし	毎日でも可

NEBコース	CLEAN	・CERTEC* ・イオン導出 ・LED(赤)	コットンあり	約3分	5段階	週に2~3回
	NEB	・CERTEC* ・DYHP ・LED(赤・橙)	どちらでも	約3分	5段階	
	EMS UP	・CERTEC* ・EMS ・LED(赤)	どちらでも	約3分	5段階	
	EYE CARE	・CERTEC* ・目元専用EMS ・LED(赤)	どちらでも	約3分	5段階	週に5回
	COOL	・冷却 ・マイクロカレント ・LED(青)	コットンなし	約3分	なし	毎日でも可

デイリーケア	DAILY	・CERTEC* ・EMS ・イオン導入 ・LED(赤)	どちらでも	約6分	5段階	毎日
--------	-------	---------------------------------------	-------	-----	-----	----

※洗顔後、化粧水等でスキンケアをしてから、ご使用下さい。

* Cell Energy Regeneration Technology

・必ずお肌の上を動かしながら使用してください。(EYE CARE・COOLモード使用時以外)


・COOLモードを連続使用すると、冷え方が弱く感じられるようになります。

再度使用するときは30分以上間をあけてから使用してください。

使いかた

コットンの付けかた

1 本体からコットンストッパーを外す。

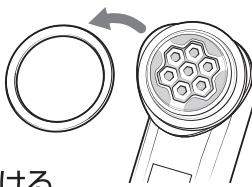

2 電極ヘッド部分にコットンを1枚のせ、コットンストッパーを押し込むように付ける。

※コットンストッパーでコットンがとまりづらい場合は、大きめで、薄手のコットンを使用してください。厚手のコットンはとまりづらいため、半分に割いて使用してください。

※コットンが厚すぎるとCERTEC^{*}の温感が弱くなる可能性があります。

3 コットンにお手持ちの化粧水やゲルを付ける。

※電極ヘッド面全体に化粧水やゲルがいきわたるように付けてください。

※さらっとした化粧水では、温感が弱くなる場合があります。

おすすめ化粧水 … とろみのある化粧水

※使用後は電極ヘッドに付いた化粧水やゲルを必ず拭き取ってください。

基本の使いかた

●使用上の注意

●お手持ちの化粧品をご使用いただく場合は、必ず水溶性の化粧品を使用してください。オイル系、スクラブ系は使用しないでください。
製品が故障したり、肌トラブルの原因となります。

●必ずお肌の上を動かしながら使用してください。同じ箇所にあて続けるとやけどの原因となります。

●CERTEC^{*}は使用時の化粧品の種類やお肌の状態によって、温度の感じかたが変わります。

●上まぶたは、全モードご使用できません。(LED光は照射可能)

下まぶた・目尻はEYE CAREモード以外はご使用できません。(LED光は照射可能)

※LED光は上まぶた、下まぶた、目尻に照射できます。目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離してください。

●LED光を直接のぞき込まないでください。

●推奨環境温度15°C~30°C

●使用時には身体から金属類(時計・ネックレス・指輪・イヤリング)を外してください。
事故・けがの原因となります。

●機器のお肌に触れる部分は、毎回お手入れし、常に清潔な状態で使用してください。
肌トラブルの原因となります。

●ケアのしかた

1 メイクを落として洗顔する。

※顔に使用するときは、必ずメイクを落として使用してください。

メイクの上から使用すると、ファンデーションによりお肌が黒く汚れることがあります。

- ・油分や汚れを落とし、お肌を清潔な状態にします。
- ・お手持ちの化粧品をご使用いただく場合は、必ず水溶性の化粧品を使用してください。オイル系、スクラブ系は使用しないでください。
製品が故障したり、肌トラブルの原因となります。

2 必要な場合はコットンを装着し、化粧水を付ける。

※CLEANモードで使用したコットンは必ず交換してください。

3 POWER/MODEボタンを長押しして電源をオンにする。

DWHPコースでケアする場合はそのまま、モード、レベルを選択する。

NEBコースでケアする場合はN+ボタンを短押ししたあと、モード、レベルを選択する。

デイリーケアでケアする場合はN+ボタンを長押ししたあと、レベルを選択する。(DWHPコース、NEBコースのスタンバイモード時は切り替えられません。)

4 P.17~19を参照して電極ヘッドをお肌にあてて動かす。

・各モードが終了するとスタンバイ状態(約5分間)になり、POWER/MODEボタンを押すと次のモードがスタートします。

※使用中は必ず、電極ヘッドをしっかりとお肌にあててください。

5 POWER/MODEボタンを長押しして電源をオフにする。

※COOLモード終了時は自動的に電源がオフになります。

6 ケア終了後お肌を整える。

・お手入れが終わったら、お肌についた化粧水などをなじませ、日頃ご使用の基礎化粧品で仕上げをしてください。

※使用後は毎回、「使い終わったら」(P.20)を参照して、製品に付着した皮脂汚れや美容液などを取り除いてください。

そのまま放置した場合、製品の故障や、肌トラブルの原因となります。


お肌へのあてかた

矢印に沿ってお肌の上を動かしながら使用してください。

- 電極とお肌の間に、常に化粧品・水などがあるように、途中で補充しながらご使用ください。
- 化粧品・水などがないと、刺激の伝達が悪くなったり、肌トラブルの原因となります。
- 必ずお肌の上を動かしながら使用してください。(EYE CARE・COOLモード使用時以外)
一ヶ所にあて続けるとやけど・低温やけどの原因となります。
- 上まぶた(LED光は照射可能)、下まぶた及び目尻(EYE CAREモード以外。LED光は照射可能)には電極ヘッドをあてないでください。

DWHPコース・NEBコース共通 <CLEAN・DWHP・NEBモード>

- 熱く感じる場合は少し速めに動かしてください。または、コットンなどを使用すると熱さを抑えることができます。
- 電極ヘッド全体がお肌に触れるように使用してください。

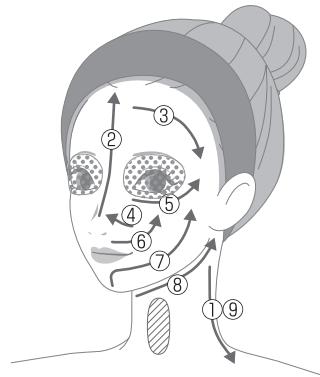

- 使用できない部位
- LED光のみ使用可能な部位
(使い方はP.19参照)
- ※目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離してください。


本体を動かすスピードの目安: 1秒間に2cm

左半分 約1分半 ピッ ピッピッピッ 約3分 右半分 約1分半 スタンバイ 表示

DWHPコース・NEBコース共通 <EMS UPモード>

肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げたり、部位をずらして使用してください。

または水・ローション・ジェルなどでお肌を湿らせてから使用してください。
そのまま使用すると、お肌を傷める原因となります。

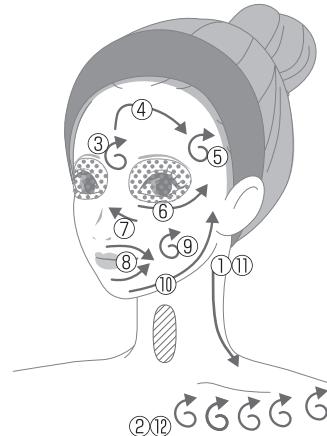


- 矢印のようにくるくる動かす
- 使用できない部位
- LED光のみ使用可能な部位
(使い方はP.19参照)
- ※目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離してください。

左半分 約1分半 ピッ ピッピッピッ 約3分 右半分 約1分半 スタンバイ 表示

DWHPコース・NEBコース共通 <EYE CAREモード>

目頭から目尻に向かってスタンプを押すように「押しあて→離す→移動」を繰り返してください。
※3秒以上連続で押しあてないようにしてください。
※押しあてながら動かさないでください。

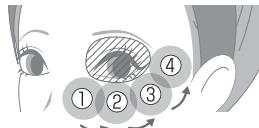

- 使用できない部位: 上まぶた
- ※下まぶた、目尻には使用可
- 押しあてる時間の目安: 一ヶ所約3秒

左半分 約1分半 ピッ ピッピッピッ 約3分 右半分 約1分半 スタンバイ 表示

目もとの乾燥が気になる方は片側約2分、
計4分の使用がおすすめです。

使い終わったら

DWHPコース・NEBコース共通

<COOLモード>

顔にスタンプを押すように「押しあて→離す→移動」を繰り返してください。



●LED光での上まぶた、下まぶた、目尻へのケア

コットンを外して目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離して光をかざしてください。



<デイリーケア>

- 熱く感じる場合は少し速めに動かしてください。
- または、コットンなどを使用すると熱さを抑えることができます。
- 電極ヘッド全体がお肌に触れるように使用してください。



※機器のお肌に触れる部分は、毎回お手入れし、常に清潔な状態で使用してください。
肌トラブルの原因となります。

●お手入れ・保管のしかた

- 電源をオフにして、ACアダプターを外す。
- 電極ヘッド・コットンストッパーの汚れは、水を含ませてかたく絞った布で拭き取る。コットンストッパーは水洗いする。
コットンストッパーは本体から外した状態で水洗いし水分を拭き取ってください。
 - 本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かないでください。
 - 本体の表面に損傷を与える原因となります。
 - 使用後は化粧水やゲルをよく拭き取り、化粧水やゲルが付着した状態で放置しないでください。故障の原因となります。
- 電極ヘッド・コットンストッパー以外の汚れは、乾いた布で拭き取る。

保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いて保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった場合、再使用する前には、正常に作動するか点検をしてください。事故・故障のおそれがあります。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.21～P.22)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンセンター(P.26)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

こんなときには

困ったときは

こんな症状

考えられる原因と処置方法

電源が入らない

- POWER/MODEボタンを長押しして、電源をオンにしてください(P.16)。
- 充電残量が不足しています。充電してください(P.9)。または、ACアダプターを接続して使用してください。

充電しても数分しか使えない

- 充電残量が不足しています。充電してください(P.9)。または、ACアダプターを接続して使用してください。
- 充電池の寿命(充電回数の目安:300回)です。販売店またはヤーマンコールセンターにご連絡ください(P.26)。※故障の原因となるためお客様では交換できません。

- ボタンを押し間違えた可能性があります。
- POWER/MODEボタンを長押しして、再度電源をオンにしてください(P.16)。

- スタンバイ状態またはオートオフになっています(P.12-13)。POWER/MODEボタンを押してください。
- 低温環境でと、電源がすぐ切れる可能性があります。充電しながらご使用ください。

電源が切れる

- ピーピーピーと音がなって切れる場合は、充電不足です。充電してください(P.9)。または、ACアダプターを接続して使用してください。
- 低温環境下に長時間置かれると、電源が切れることがあります。推奨環境温度15°C~30°Cにしばらく置いていただいた後、充電状態も確認の上、再度お試しください。

充電が開始されない
(充電表示が点滅しない)

- アダプタープラグが本体に差し込まれていません。アダプタープラグを本体に差し込んでください(P.9)。
- ACアダプターを背面コンセントに差し込み、電源オフの状態でLEVELボタンとPOWER/MODEボタンを同時に押してください(リセット)。

本体が熱い

- 連続して使用しています。電源をオフにして30分以上本体を休ませてください。

こんな症状

考えられる原因と処置方法

COOLモードで冷えない

- COOLモードを連続使用しています。電源をオフにして30分以上本体を休ませてください。
- 推奨環境温度以外で使用しています。15°C~30°Cの環境で使用してください。

ピリピリする・痛い

- LEVELボタンでレベルを下げてください。
- 電極ヘッド全体がお肌にあたっていません。鏡で確認しながら、電極ヘッド全体をお肌にあててください。

EMSが弱い・感じない

- LEVELボタンでレベルを上げてください。
- お肌に水分が足りないか乾燥しています。お肌を化粧水やゲルで湿らせてからご使用ください。
- 筋肉に沿ってあてていません。鏡で確認しながら、電極ヘッドを筋肉に沿ってあててください(P.18)。
- 充電残量が不足しています。充電してください(P.9)。または、ACアダプターを接続して使用してください。

熱い(COOLモード使用時以外)

- 電極ヘッドをお肌に長時間あて続けています。COOLモード使用時以外は、必ず動かしながら使用してください。
- 電極ヘッドをゆっくり動かしています。少し速く動かしてください。
- 使用する化粧品、コットンの有無によっては、非常に熱く感じる場合があります。熱いと感じる場合は、以下をお試しください。
 - ・コットンを使用する、またはコットンを使用していたらなしで使用する
 - ・使用する化粧品を変える

CERTEC*の熱さを感じない

- スタンバイ状態またはオートオフになっています(P.12-13)。電源を入れ直すか、POWER/MODEボタンを押してモードをスタートさせてください。
- お肌に水分が足りないか乾燥しています。お肌を化粧水やゲルで湿らせてからご使用ください。

レベルが変わらない

- 電極ヘッドを速く動かしています。少しゆっくり動かしてください。
- COOLモードはレベル変更できません。
- LEVELボタンとPOWER/MODEボタンを同時に押してください(リセット)。

操作できない

よくあるご質問

Q	A
化粧水やゲルは1回どれくらい使用すればよいですか?	本製品の特長として、化粧水やゲルを多く使用したほうがより温熱の体感を得ることができます。目安として、コットンを使用する場合は、電極ヘッド全体が化粧水でぬれるくらい使用してください。ゲルはパール粒2つ分程度使用してください。化粧水やゲルが少ないと感じたら付け足すことをおすすめします。
お風呂で使用できますか? また、本体は水洗いでできますか?	お風呂(浴室、浴槽)での使用はできません。本体はJIS保護等級IPX5の性能を有していますが、防滴仕様であり、シャワーや水道の蛇口からなる水流、水中には対応していません。故障の原因となりますため、本体の水洗いはできません。コットンストッパーのみ水洗い可能です。
CLEAN・DWHP・NEB・EMS UP・EYE CAREモード、デイリーケア使用時にCERTEC*の温まりを感じません。	電極ヘッドをゆっくり動かしたり、押し付け具合を強くしてみてください。 また、水分量が足りない可能性があります。化粧水やゲルを足してください。
コットンに汚れが付きます。	目に見えなくても汚れは落ちています。また、汚れの付きかたには個人差があります。
シートマスクの上から使用できますか?	シートマスクの上からもご使用可能(CLEANモード除く)。DWHPコースのDWHPモード、NEBコースのNEBモード使用時、デイリーケアがおすすめです。

* Cell Energy Regeneration Technology

●充電池について

- 充電池は消耗品です(保証対象外)。
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は約300回が目安です)。
- 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.26)にご相談ください。

●廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

- 本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。廃棄方法については、下記「電池の廃棄について」と「電池の取り出しかた(P.25)」をご確認ください。



<電池の廃棄について>

この製品に使用しておりますリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。


- 電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
- 電池を取る前には必ず電源をオフにし、ACアダプターを抜いてください。
- 電池を取り出す際はドライバーを使用し、けがをしないように十分に注意しながら取り出してください。
- 電池を取り出す際は固いもの等で電池を傷つけないようにご注意ください。
※発熱、発火の原因となります。
- 取り出した電池は自治体の分別ルール(廃棄やリサイクル方法)に従って、処理をお願いいたします。

<電池の取り出しかた>


操作STEP 下図①～④を参照し、電池を取り出してください。

- ① 先の細いものなどを使って、外カバーを取り外します。

※強粘着テープで接着されています

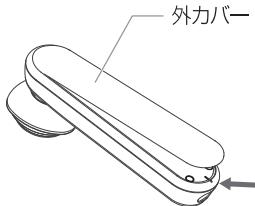


- ③ 内カバーを外して、バッテリーのケーブルをコネクタから外します。

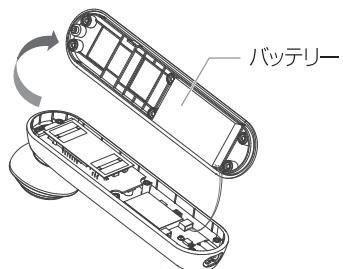


① ケーブルは切らない

- ② 内カバーの6ヶ所のゴム栓とネジを外します。

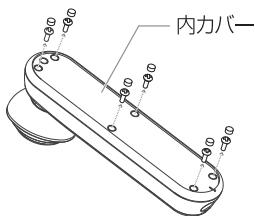

- ④ 定規のような薄いものでバッテリーを取り外します。

※強粘着テープで接着されています

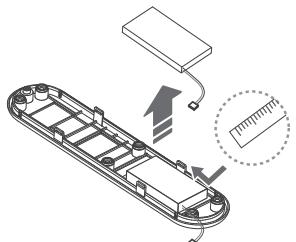

① バッテリーを傷つけないよう注意



この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
お客様ご自身で分解した場合、故障の原因となりますのでご注意ください。

●お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター 固定電話など 0120-776-282(通話料無料)

受付 9:00～17:00

(土・日・祝日・年末年始を除く)

携帯電話

0570-550-637(通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日お買い上げ店が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混み合っております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっています。

●日本国外からのお問い合わせ先

販売店またはヤーマングローバルサイト(<https://www.ya-man.com/en/>)までお問い合わせください。

●製品仕様

定 格	DC9V 2.0A
消 費 電 力	約18W
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約3時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
外 形 尺 法	本体(コットンストッパー付):約W52xD62xH203(mm)
製 品 質 量	本体(コットンストッパー付):約312g
材 質	本体:ABS樹脂 パネル:アクリル樹脂、PC樹脂 電極ヘッド:PET樹脂/ステンレス 本体金属調部分:ABS樹脂(インジウム蒸着)
製 造 国	日本
付 属 品	コットンストッパー、ACアダプター
推 奨 環 境	15°C～30°C
防 水 機 能	JIS保護等級 IPX5

●保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。
- また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただいております。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(上記)にご相談ください。
- 弊社製品保証約款に照らしお客様の言動がカスタマーハラスメント行為に該当すると判断した場合は、保証対応をお断り、または中止させていただくことがあります。