

取扱説明書

家庭用美容器 Bloom 6 (ブルーム シックス) YJFS16PN

もくじ

はじめに……………	1	使い終わったら……………	15
安全上のご注意……………	1	お知らせ……………	17
海外でのご使用について……………	6	● 故障かな?と思ったら……………	17
各部のなまえとはたらき……………	7	● よくあるご質問……………	19
お使いになる前に……………	9	● 製品仕様……………	20
使いかた……………	11	アフターサービス……………	21



はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・ 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ・ お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- ・ 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・ 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・ 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・ 故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・ 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

危険 (ご使用、保管に関して)

- 次に該当する人は使用しない。
医用電気機器の誤動作を招く原因となります。
 - ◆ 医用電気機器を使用している人
 - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心肺など生命維持用医用電気機器 ・心電計などの装着型医用電気機器



禁止

警告 (ご使用、保管に関して)

- 次のような人は使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
 - ・心臓疾患、障害およびその疑いのある人 ・幼児や自分で意思表示できない人 ・温度や刺激の感覚が自覚できない人
 - ・自己免疫疾患のある人次の人はご使用前に医師にご相談ください。
 - ・急性疾患の人 ・感染症疾患の人 ・悪性腫瘍のある人 ・有熱性疾患の人 ・高血圧の人や血液疾患のある人 ・発熱している人
 - ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人 ・神経障害のある人 ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
 - ・通院して薬を服用中の人 ・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人
- 次のような場合や部位には使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
 - ・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合 ・酒気帯びの場合 ・頭部 ・口内や陰部、粘膜など ・眼球 ・上まぶた
 - ・下まぶた、目尻(目もとのケア以外) ・のど ・膨らんだホクロ ・ウイルス性のイボ ・骨折をしている部位
 - ・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位
 - ※ 施術後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。(施術例:ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)
 - ・外科手術(形成、整形、美容)等で体内に金属を埋め込んだ部位
- 皮膚が薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。
お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。



禁止

警告 (ご使用、保管に関して)

- オーバーケアをしない。使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。
身体に危害を与える原因となります。



禁止

- 使用前に電極/ヘッドの割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。
けが・肌トラブルの原因となります。

- 次のような場所で機器の使用・保管・充電しない。
・浴室や浴槽、シャワー、洗面器または水の入った他の容器の近く

・ほこりの多い場所

・直射日光の当たる場所や屋外

・傾斜、振動、衝撃のある場所

・強い電波や磁気の発生する場所

・引火性のもの(アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど)の近く

・油煙、湯気の当たる場所

・発熱器具(ストーブ等)の近くなど高温になる場所

・温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)

火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。

- ACアダプターが破損したら使用しない。
ヤーマンコールセンター(P.21)にお問い合わせの上、専用ACアダプターをお使いください。

- 使用中に、プラグをコンセントから抜いたり、本体側からプラグを抜かない。

感電・ショートによる発火・火災の原因となります。必ず電源をオフにしてからプラグを抜いてください。

- 通電したまま放置しない。
火災・事故の原因となります。



禁止

- 専用のACアダプター以外は使用しない。
感電、ショート、発火の原因となります。

- 取扱説明書に記載されている用途・部位以外には使用しない。
故障・けがの原因となります。



用途以外
禁止

- 子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。
事故・けがの原因となります。



使用者の
制限

- 本体/ACアダプターは子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。また、子供に遊ばせない。
事故・けがの原因となります。

- 火中投入・加熱・高温・高圧での充電・使用・保管をしない。



本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱・発火・破裂 発火注意
の原因となります。

警告 (ご使用、保管に関して)

- 機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する。

火災・感電の原因となります。



必ず守る

- 必ず交流100～240Vで使用する。
(無料修理は日本国内のみ)
コンセントは根元まで確実に差し込む。

火災・感電・故障・事故の原因となります。

- 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



分解禁止

- 地震や雷を感じたら電源をオフにし、プラグを抜く。

火災・感電の原因となります。



プラグを抜く

- プラグを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く(金属部に触れないようにする)。また、濡れた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- 使用後や使用しないとき、機器のお手入れをするときは、必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。

充電が終わったときはACアダプターをコンセントから抜いてください。火災・事故の原因となります。

- コンセントや配線器具の定格容量を超えて配線(タコ足配線)しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



タコ足配線
禁止

- ACアダプターが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

- ACアダプターを破損、加工しない。束ねたりねじったりなど無理に力を加えない。

ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

収納時にはコードのねじれを直してください。



無理な扱い
禁止

注意 (ご使用、保管に関して)

- 強く押しあてず、一ヶ所に集中して使用しない。
必要以上に強く押し付けたり一ヶ所に集中して使用するとお肌を傷める原因となります。
- 車両運転中に使用しない。
事故やけがの原因となります。
- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。
他の電気製品(電気毛布・敷布・こたつ等)との同時使用はしない。
誤動作による事故の原因となります。
- LED光を直接のぞき込まない。LED光で上まぶた、下まぶた、目尻へのケアをするときは、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離して使用する。
目やお肌を傷める原因となります。



禁止

- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。
刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。自身にあったレベルで使用する。
レベルは少しずつ調節してください。事故・けがの原因となります。



必ず守る

- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。
使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、直ちに使用を中止する。
お肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。
- 歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、レベルを下げ、使用部位を調整する。
EMSによりほお・あごに刺激を強く感じたり不快に感じたりすることがあります。
強い違和感を覚える場合は、医師にご相談ください。
- 同一部位に3分以上の使用は避ける。
再度同一部位に使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。
過度なご使用はお肌を傷める可能性があります。あくまでも目安ですので、お肌の状態をみながらご使用ください。



必ず守る

- 停電したときは、直ちに電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。
事故の原因となります。



プラグを抜く

海外でのご使用について

警告

- 必ず交流100～240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)

火災・感電・故障の原因となります。



必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。

発熱・発火・故障の原因となります。



発火注意

- ・地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- ・プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

英語・中国語でも安全上の注意を確認することができます。

You can also check safety precautions in English from the QR code below.

您可以扫二维码了解更多“安全注意”信息。

English



<https://www.ya-man.co.jp/support/caution/en/>

中文




<https://www.ya-man.co.jp/support/caution/cn/>

TO ACCESS SCAN WITH YOUR CAMERA PHONE


各部のなまえとはたらき

本体

●正面

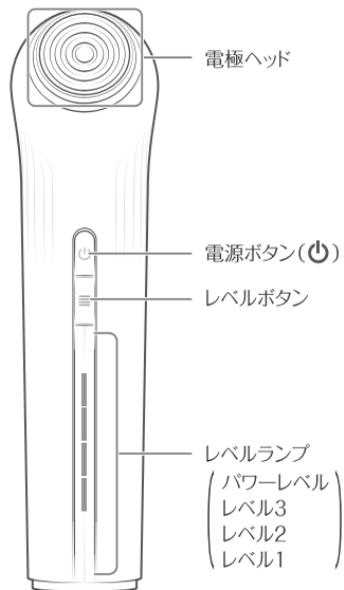

●背面

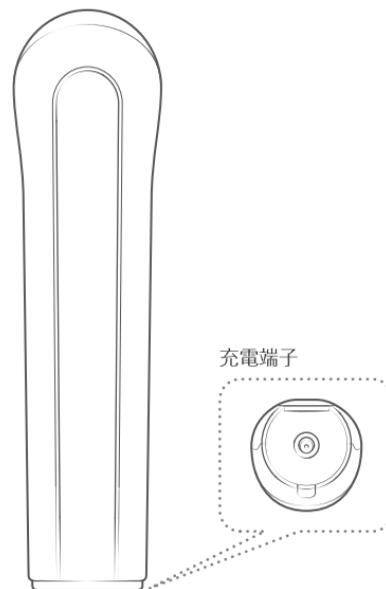

付属品

●ACアダプター

●化粧品

●取扱説明書 (保証書付)

はたらき

安全機能

- 温度センサー お肌や電極ヘッドの温度が高くなってくると、安全のため出力を低くします。また、高温になり過ぎると、安全のため電源がオフになります（電極ヘッドの点滅5回とブザー音5回でお知らせ）。その場合は、約30分間本体を休ませてください。
- 電流センサー 出力される電流値を測定し出力が流れすぎないように制御します。
- モーションセンサー 本体の動きを検知し、電極ヘッドを同じ箇所にあて続けている場合は、安全のため出力を停止します。本体を動かす速度が遅くなると、モーションセンサーの働きにより温感が弱まる場合があります。
- タッチセンサー お肌に触れたことと電流センサー両方を探知すると、LEDが明るくなり、出力します。タイマーはお肌に触れている間だけカウントされます。

タイマー・スタンバイ機能

使用時間の目安は電流センサー+タッチセンサーが作動してから顔全体でレベル1~3のときは約6分、パワーレベルのときは約10分です（ケアの途中でレベル変更する場合、レベル1~3のタイマーは引き継がれます）。レベル1~3のときは半顔ケア終了後3分、パワーレベルのときは各ケア終了後一定時間経過するとブザー音でお知らせし、RFやEMSの出力が一時停止します。（スタンバイ機能）

電源ボタン(🔌)・レベルランプが点滅するため、ケアの準備が整ったら、電源ボタン(🔌)を押して再開してください。

オートオフ機能

全モード終了後すぐ、またはスタンバイ状態発動のまま約5分間操作をしないと「ピッピッ」と音がなり、自動で電源が切れます。（オートオフ）

充電目安表示

電源ボタンの色（白、橙、赤）で充電電池の残量をお知らせします。

電源をオンした時に充電電池の残量が少ない場合は点滅とブザー音でお知らせします。

バッテリーの状態や使用環境によって残量表示は前後します。

パーソナル記憶機能

モード終了時のレベル、EMSのオン/オフを記憶して、次回電源オン時に同じ設定となります。


抵抗因子制御

お肌の電流の流れやすさを検知し適切な出力でトリートメントができるように制御します。

お使いになる前に

充電する

本製品はコードレスまたはACアダプターを接続しての使用ができます。

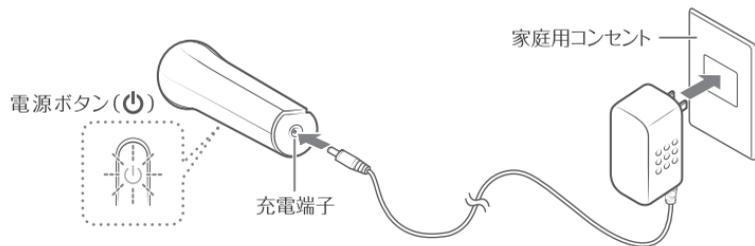

電源ボタン(⏻)で、
充電残量を確認することができます。

充電残量表示	
白点灯	十分に充電されています。
橙点灯	充電が少なくなってきました。
赤点滅	充電してください。 または AC アダプターに繋げながらご使用ください。

- ・充電中は電源ボタン(⏻)が点滅します。
- ・充電が完了すると、電源ボタン(⏻)が約5秒間点灯後に消灯します。ACアダプターを外してください。
- ・室温約25℃の場合、約3時間で満充電となり、約30分間動作可能です。電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。

※約10秒経っても充電を開始しない場合は、ACアダプターの差し込みがゆるんでいないか確認してください。

ご注意

- ・本製品は防水製品ではありません。本体や充電端子に水滴がついた場合は、すぐにしっかりと水滴を拭き取ってください。水滴が残ったまま保管・充電すると、故障の原因となります。
- ・長期間使用しなかった場合、再使用前には、正常に作動するか点検をしてください。事故・故障のおそれがあります。
- ・購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してから使用してください。
- ・初めて使用するときや長時間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してからご使用ください。
- ・ACアダプターは付属のものをご使用ください。

お肌へのプレテスト

初めてご使用になる際は、必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

⚠ 注意

- 肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止してください。
- お肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。お肌に合わないときは使用を中止してください。
- 使用時には身体から金属類（時計・ネックレス・指輪・イヤリング）を外してください。事故・けがの原因となります。
- 推奨環境温度は10℃～40℃です。

1

腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどで拭き取る




2

電極ヘッドの中央に付属の化粧品（パール1粒程度）をのせ、電源をオンにして約3分間動かしながら使用する（P.13）

必ずレベル1でテストを行ってください。

持ちかたとお肌へのあてかた

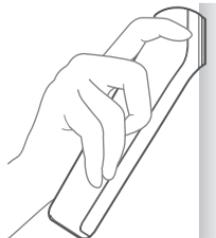

3

お肌に残った化粧品をなじませ、異常がないことを確認する

24時間以内にお肌に赤みやほてりを感じなければ、本製品をご使用ください。

図のように本体を持ち、電極ヘッド全体をお肌にあててゆっくり動かしてください。

・必ず電極ヘッド全体をお肌にあて、動かしながら使用してください。

使いかた

基本的な使いかた


ご注意

顔に使用するときには、必ずメイクを落として使用してください。
メイクの上から使用すると、ファンデーションによりお肌が黒く汚れることがあります。

1

電源をオンにする

電源ボタンを長押しすると電源ボタン(⏻)、
レベルボタン、レベルランプ、電極ヘッドが点灯し、
RF、EMS、赤色LEDが出力されます。

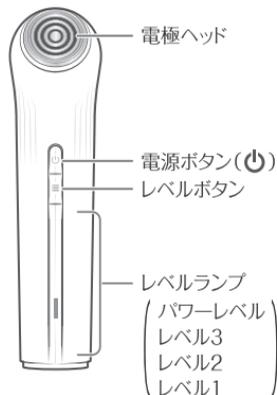

2

レベルを選ぶ

レベルボタンを押すたびにレベルが切り換わります。(レベル1→レベル2→レベル3→パワーレベル→レベル1→レベル2…)
レベルランプの点灯でレベルの確認ができます。



EMSのオン/オフ切り換え

レベルボタンを長押しするとEMSのオン/オフを切り換えられます。(レベルボタン点灯:EMSオン、消灯:EMSオフ)
※パワーレベルの際は、EMSのオフはできません。

ご注意

初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。

3

付属の化粧品を電極ヘッド中央にのせ、電極ヘッドをお肌にあてて動かす

8つの部位に分けて行います(P.13~14)。

1つの部位につき化粧品をパール1粒程度のせてください。



ご注意

- ・付属の化粧品を手で塗布しないでください。本体の汚れや落下の原因になります。
 - ・電極とお肌の間に、常に化粧品・水などがあるようにし、途中で補充してください。
 - 化粧品・水などが少ないと、刺激の伝達が悪くなったり、肌トラブルの原因となります。
 - ・使用中にすべりが悪いと感じたら、付属の化粧品をつけ足してください。
 - ・電極ヘッド全体がお肌に触れるように使用してください。
 - ・必ずお肌の上を動かしながら使用してください。
 - ・熱く感じる場合は少し速めに動かすか、レベルを下げてください。
 - ・機器のお肌に触れる部分は、毎回お手入れし、常に清潔な状態で使用してください。
- 肌トラブルの原因となります。

4

終わったら、お肌を整える

ケアが終わったら、お肌に残った化粧品をなじませ、日頃お使いの基礎化粧品でお肌を整えてください。

ご注意

使用後は毎回、「使い終わったら」を参照して、製品に付着した皮脂汚れや化粧品などを取り除いてください。
故障や、肌トラブルの原因となります。

動かしかたは、「動かしかた」(P.13~P.14)をご参照ください。

- ・肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げたり、部位をずらして使用してください。または水・ローション・ジェルなどでお肌を湿らせてから使用してください。
- そのまま使用すると、お肌を痛める原因となります。
- ・のどぼとけ、眼球、上まぶた、下まぶた・目尻(目もとのケア以外)。
- ・電源をオンにした状態で、電極ヘッドに化粧品を塗布したまま放置しないでください。

使用できない部位



レベル1～3の動かしかた

下図の通り、①～④の順に矢印の方向へ動かしてください。下記と同様に右半顔もケアしてください。

① 目もとのケア



付属の化粧品をのせる

↓
小鼻から目頭に流す
ように動かし目じりへ



② フェイスラインのケア



付属の化粧品をのせる

↓
フェイスラインを引き上げる
ように動かし首すじへ
3回繰り返す

③ ほうれい線のケア



付属の化粧品をのせる

↓
順に矢印方向に沿って流すように
各3回繰り返す

④ 額のケア



付属の化粧品をのせる

↓
眉間からこめかみに
向かってジグザグに
3回繰り返す

左半顔 約3分*

右半顔 約3分*

※お肌にあてタッチセンサーが起動している間の時間です。お肌から離している間は出力されません。

- 本体を動かすスピードの目安：1秒間に4cm
- 使用時間の目安：1回約6分（顔全体）
- 目もとのケアの後、ブザーが「ピー」と鳴り出力が一時停止しますが、ブザーが鳴り終わったら次のケアを始めてください。
- 約3分経過するとブザーが「ピー」と鳴り出力が一時停止しますので、目安にしてください。再開するには電源ボタン(⏻)を押してください。
- 途中で停止するときは、電源ボタン(⏻)を1秒以上押して電源をオフにしてください。

パワーレベルの動かし方

下図の通り、①～④のケアを繰り返し動かしてください。それぞれのアルファベットをスタート位置として順に矢印の方向へ動かしてください。下記と同様に右半顔もケアしてください。 ※パワーレベルはケア部位ごとに出力が異なります。

① 目もとのケア



付属の化粧品をのせる

- ④ 小鼻から目頭に引き上げるように動かし目じりへすべらせる
- ③ 目じりからこめかみに流す
- ② 眉間で5回円を描く
- ① こめかみまで流して引き上げる
- スタンバイ機能発動時
- レベルランプ
- 約70秒後 →

② フェイスラインのケア



付属の化粧品をのせる

- ④ 円を描きながら引き上げるように動かす
- ③ フェイスラインに沿って引き上げるように動かす
- ② 首に沿って下に流す
- スタンバイ機能発動時
- 約60秒後 →

③ ほうれい線のケア



付属の化粧品をのせる

- ④ ①→②→③の順に円を描きながら口もとから引き上げ頬骨に沿って流す
- ③ ①→②→③の順に円を描きながら引き上げよう流す
- ② ①→②の順に円を描きながら引き上げるように動かす
- ① ①のところで都度円を5回描いてください
- スタンバイ機能発動時
- 約110秒後 →


④ 額のケア



付属の化粧品をのせる

- ④ 眉上から生え際に向かって円を描きながら動かす
- スタンバイ機能発動時
- 約60秒後 →

全顔終了時はすべてOFFになります。

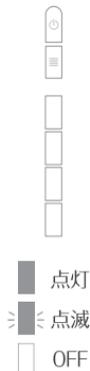

左半顔 約5分*

右半顔 約5分*

※お肌にあてタッチセンサーが起動している間の時間です。お肌から離れている間は出力されません。

- 本体を動かすスピードの目安：1秒間に4cm
- 使用時間の目安：1回約10分（顔全体）
- 一定時間（約5分）経過するとスタンバイ機能が発動し一時停止しますので、再開するには電源ボタン(⏻)を押してください。
- 途中で停止するときは、電源ボタン(⏻)を1秒以上押し続けて電源をオフにしてください。

使い終わったら

お手入れのしかた


機器のお肌に触れる部分は、毎回お手入れし、常に清潔な状態で使用してください。
肌トラブルの原因となります。

- 1 お手入れの際は、必ず電源をオフにし、本体からACアダプターを抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。

- 2 固く絞った柔らかい布等で汚れを拭き取る
・汚れ等が落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いてください。
・ヘッド電極の間に残った化粧品は、綿棒やコットンを使用して取り除いてください。

⚠ 警告 ● 水洗いはしない。

本製品は防水製品ではありません。故障の原因となります。

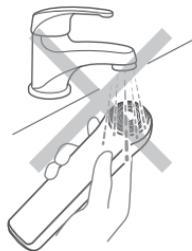

- 化粧品が付着した状態で放置しないでください。
- 本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かないでください。
本体の表面に損傷を与える原因となります。

ご注意



保管のしかた

- お子様の手の届かない場所、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体とコンセントからACアダプターを抜いて保管してください。
- 高温多湿の場所(火のそばや炎天下、浴室など)に放置しないでください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった場合、再使用する前には、正常に作動するか点検をしてください。
事故・故障のおそれがあります。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.17)を参照して、症状についてご確認ください。
それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.21)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

お知らせ

故障かな?と思ったら 本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を依頼する前に以下をご確認ください。

こんな症状	考えられる原因と処置方法
電源が入らない	電源ボタン(⏻)を約1秒長押ししてください。
	電池残量がありません。充電してください(P.9)。
電源が切れる	スタンバイ状態/オートオフになっています(P.8)。 電源ボタン(⏻)を押して、スタートさせてください(スタンバイ機能) スタンバイ機能のまま5分が経過すると、自動で電源が切れます(オートオフ)。 低温環境下に長時間置かれると、電源が切れることがあります。推奨環境温度10℃~40℃にしばらく置いていただいた後、充電状態もご確認の上、再度電源ボタン(⏻)を約1秒長押ししてください。
充電しても数分しか使えない	ケア時間が約6分または約10分で自動的に電源がオフになります。
	電池残量が少なくなっています。充電してください(P.9)。
	電池の寿命です。販売店またはヤーマンコールセンター(P.21)にご連絡ください。
	低温環境の中、電源すぐ切れる可能性があります。充電しながらご使用ください。
充電が開始されない	付属のACアダプターを本体に差し込んでください(P.9)。ゆるんでいないか確認してください。
	付属のACアダプターをコンセントに差し込んでください(P.9)。
ラジオ波(RF)が熱い	同じ部位に長い時間あてています。必ず動かしながらかけてください。
	少し速く動かしてください。
	レベルを下げてください。初めて使うときは必ずレベル1で使用してください。

こんな症状	考えられる原因と処置方法
ラジオ波(RF)の熱さを感じない	お肌が乾燥しています。付属の化粧品を塗って、お肌を湿らせてください。
	レベルを上げてください。
	開始からレベル1~3のときは半顔ケア終了後、パワーレベルのときは各ケア終了後一定時間経過すると、RFやEMS機能を一時停止します(タイマー・スタンバイ機能)。電源ボタン(🔌)を押すと再開します。
	充電残量が不足するとRFも弱くなる場合があります。充電してください。(P.9)
ビリビリする・痛い	レベルを下げてください。初めて使うときは必ずレベル1で使用してください。
	ヘッド全体がお肌にあたるように使用してください。
EMSが弱い・感じない	レベルを上げてください。
	お肌が乾燥しています。付属の化粧品を塗って、お肌を湿らせてください。
	筋肉のつきかたによって感じにくい場所があります。
	EMS出力がオフになっています。レベルボタンを長押ししてください(P.11)。(パワーレベルの場合、EMSはずっとオンになっています。)
	レベル1~3のときは半顔ケア終了後3分、パワーレベルのときは各ケア終了後一定時間経過すると、RFやEMS機能を一時停止します(タイマー・スタンバイ機能)。電源ボタン(🔌)を押すと再開します。
電源ボタンの色が赤(橙)になる	充電残量を表示しています(P.8)。
レベルが1から始まらない	パーソナル記憶機能です(P.8)。
LEDの光りが弱い	タッチセンサーを搭載しているため、肌に触れていない、または保湿が十分にされていないとLEDが弱くなります。

よくあるご質問

- Q 使用頻度、使用時間の目安はありますか？
- A 週に5日、1日1回(6分 or パワーレベル10分間)を目安にご使用ください。
※お肌の状態を見ながらご使用ください。
※お肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。お肌に合わないときは使用を中止してください。
- Q 連続で使用することはできますか？
- A 本製品は1日1回(6分 or パワーレベル10分間)のご使用をおすすめしています。
- Q 化粧品は1回どれくらい使用すればよいですか？
- A 付属の化粧品は顔全体でパール粒8粒程度使用してください。
水溶性の化粧品でしたら、お手持ちの化粧品のご使用も可能です。
その場合も、この量を参考にご使用ください。ゲル状の化粧品がおすすめです。
化粧品が少ないと感じたら付け足してください。
- Q お風呂場で使用できますか？
- A 本製品は防水製品ではありません。お風呂場では使用しないでください。
- Q 使用後にお肌がほてります
- A ラジオ波(RF)の温めによるものです。
- Q 電極ヘッドが温まりません
- A ラジオ波(RF)は電極ヘッドを温めるのではなく、電気のお肌を温めるものです。
- Q レベルを上げると何が変わりますか？
- A レベルを上げると、強く、早く温まります。また、EMSを強く感じます。
※初めて使用する場合や、使い方に慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。
- Q 水洗いしてもよいですか？
- A 本製品は防水製品ではありません。水洗いはしないでください。故障の原因となります。
-

製品仕様

定 格 電 源	DC9V 3.0A
消 費 電 力	約21W
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約3時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
動 作 時 間	約30分(満充電の状態から) ※使用環境やレベルによって、動作時間は前後します。
外 形 寸 法	約W47×D47×H181(mm)
製 品 質 量	約180g
材 質	本体:ABS樹脂、ポリカーボネート 電極ヘッド:PET樹脂/ステンレス
製 造 国	日本
付 属 品	ACアダプター1個 化粧品1個 取扱説明書(保証書付)
推 奨 環 境 温 度	10~40℃

アフターサービス

おすすめ化粧品について

●製品詳細・お買い求めはヤーマンコールセンター(下記)にお問い合わせください。

※予告なく販売を終了する場合があります。

日本国内からのお問い合わせ先

本製品の保証・修理など、ご不明な点に関しては、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

携帯電話

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

 **0120-776-282** (通話料無料)

 **0570-550-637** (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みっております。お急ぎでない場合、火~金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっております。

日本国外からのお問合せ先

販売店またはヤーマングローバルサイト(<https://www.ya-man.com/en/>)までお問い合わせください。

充電電池について

- 充電電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.21)にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。



廃棄充電電池の取出方法


この製品に使用しておりますリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

- 電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
- 電池を取る前には必ず電源をオフにし、充電アダプターを抜いてください。
- 電池を取り出す際はドライバーを使用し、お怪我が無いように十分に注意しながら取り出してください。
- 電池を取り出す際は固いもの等で電池を傷つけないようにご注意ください。※発熱、発火の原因となります。
- 外した電池は自治体の分別ルール(廃棄やリサイクル方法)にしたがって、処理をお願い致します。


操作STEP 下図1~4を参照し、電池を取り出してください。

- 1 マイナスドライバーなどの先端が細いものを使って、外カバーを剥がし取ります。


※強粘着テープで接着されています

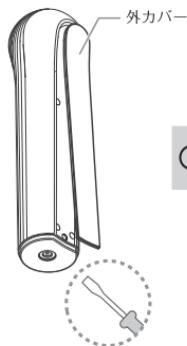

- 2 下ケースの4ヶ所のネジを外し、上ケースと下ケースに分け、ケーブルとコネクタを外します。

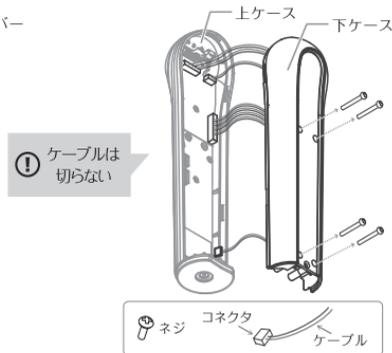


- 3 下ケースの3ヶ所のネジを外し、電池ケースを取り出します。

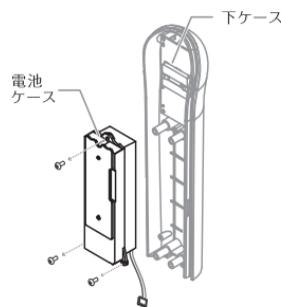

- 4 プラスチック正規のような薄いもので、電池ケースから電池を取り外します。

※強粘着テープで接着されています

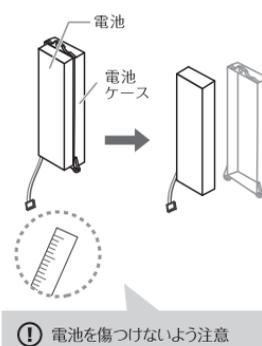

この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
お客様ご自身で分解した場合、故障の原因となりますのでご注意ください。

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただいております。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.21)にご相談ください。
- 弊社製品保証約款に照らしお客様の言動がカスタマーハラスメント行為に該当すると判断した場合は、保証対応をお断り、または中止させていただく場合がございます。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
 3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
 4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
 5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
(イ) お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
(ロ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
(ハ) 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
① 使用上の誤り ② お買い上げ後の輸送、転倒・落下 ③ 弊社以外の第三者による修理・改造 ④ 高温・多湿等の温度・湿度の使用環境 ⑤ 接続する他の機器の異常 ⑥ (家庭用製品の業務用使用等) 想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用 ⑦ (説明書等で指定がある場合) 指定方法以外での給電 ⑧ 非純正部品の使用 ⑨ 車両・船舶への搭載 ⑩ 海外でのご使用
- (ニ) 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
(ホ) 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
(ヘ) 改造・分解の形跡がある場合
(ト) 説明書、注意書等で弊社から案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法(レンタル行為を含みます)でご使用された場合
(チ) 保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
(リ) 弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品(オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合
(ル) 製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
(ス) その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でないと弊社が判断した場合
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※ その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

No. _____

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	YJFS16PN
形名	Bloom 6 (ブルーム シックス)		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体のみ	お買い上げ日から 1年間	
※販売者名	店名・住所・電話		
	ご購入日の明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

固定電話など

☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話

☎ 0570-550-637 (通話料有料)

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※上記期間は目安となりますため、箇所により生産完了から3年以内でも部品在庫が無くなる場合がございます。

※製造・販売から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。その他の

修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」

(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および

「ヤーマン製品保証約款」

(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)

をご確認ください。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ

(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。



www.ya-man.com