

No. \_\_\_\_\_

# 保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	YJHEO
形名	ヴェーダニードルスパ デュアル		
無料修理保証	対象部分：本体のみ	期間	ご購入日から1年間
※販売者名	店名・住所・電話		
	ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。  
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※製造・販売から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせて頂く場合がございます。  
その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ  
「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)  
および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

・個人情報の取扱いについて  
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ  
(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的  
お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。  
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。  
これらの規則は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話

0570-550-637 (通話料有料)



www.ya-man.com

# YAMAN


TOKYO JAPAN

保管用  
保証書付

## 取扱説明書

家庭用美容器

ヴェーダニードルスパ デュアル  
YJHEO

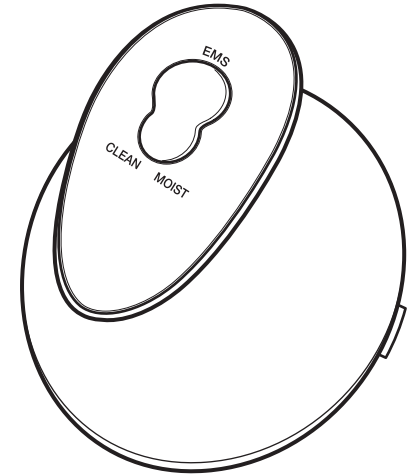

### もくじ

- 安全上のご注意 ..... 1
- 海外でのご使用について ..... 7
- 各部のなまえ ..... 8
- ご使用前に ..... 12
- 使いかた ..... 18
- 使い終わったら ..... 26
- こんなときには ..... 29
- アフターサービス ..... 33
- 製品仕様 ..... 33
- 保証について ..... 34
- 保証書 ..... 35

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

## 安全上のご注意

安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

### ●注意区分について



#### 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



#### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



#### 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害\*の発生が想定される内容です。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

### ●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



## 危険



禁止

次に該当する人は使用しない。

医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。

- ◆医用電気機器を使用している人
  - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器
  - ・人工心肺など生命維持用医用電気機器
  - ・心電計などの装着型医用電気機器



## 警告

安全上のご注意

### ●次のような人は使用しない。

- ・心臓疾患、障害及びその疑いのある人
- ・幼児や自分で意思表示できない人・温度や刺激の感覚が自覚できない人・自己免疫疾患のある人・妊娠初期から出産直後までの人

### ●次の人はご使用前に医師にご相談ください。

- ・急性疾患の人・感染症疾患の人・悪性腫瘍のある人
- ・有熱性疾患の人・高血圧の人や血液疾患のある人・発熱している人
- ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人
- ・神経障害のある人・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
- ・通院して薬を服用中の人・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人



禁止

### ●次のような場合や部位には使用しない。

- ・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合・酒気帯びの場合
- ・口内や陰部、粘膜など・眼球・まぶた(眼窩)・のど
- ・膨らんだホクロ・ウイルス性のイボ・骨折をしている部位
- ・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶたなどのある部位
- ※施術後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談の上問題なければご使用いただけます。  
(施術例：ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)
- ・外科手術(形成・整形・美容)などで体内に金属を埋め込んだ部位



使用者の制限

子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監視下で使用する。事故・けがの原因となります。



使用者の制限

製品を子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。また、子供に遊ばせない。事故・けがの原因となります。



禁止

皮膚が薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。



禁止

通電したまま放置しない。火災・事故の原因となります。



禁止

使用前にアタッチメントの割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。けが・肌トラブルの原因となります。



禁止

動作中にアタッチメントの間に指を入れない。アタッチメントに指を挟み込み、けがの原因となります。



## 警告



禁止

オーバーケアをしない。  
使用時間や使用頻度は、  
取扱説明書の指示を守る。  
身体に危害を与えるおそれ  
があります。



用途以外  
禁止

取扱説明書に記載されている  
用途・部位以外には使用しない。  
けが・故障の原因となります。



無理な扱い  
禁止

充電台や充電ケーブルを破  
損、加工、束ねるなど無理に  
力を加えない。また、重いも  
のをのせたり、挟み込んだり  
しない。  
火災・感電の原因となります。



浴室充電  
禁止

浴室内での充電は絶対に  
しない。  
感電・ショート・発火の原因  
となります。



傷んだ  
コードプラグ  
使用禁止

充電台や充電ケーブルが  
傷んだり、差し込みがゆる  
いときは使用しない。  
感電・ショート・発火の原因  
となります。  
修理はお買い上げの販売  
店窓口にご相談ください。



分解禁止

分解や修理・改造はしない。  
火災・感電・けがの原因と  
なります。  
修理はお買い上げの販売  
店窓口にご相談ください。



必ず守る

使用中に痛みを感じたり、気  
分が悪くなったり、頭皮やお肌  
に異常があらわれたら、ただ  
ちに使用を中止する。  
万一、頭皮やお肌に異常が  
あらわれた場合は、ただち  
に使用を中止し、医師にご  
相談ください。



タコ足配線  
禁止

本製品には必ず専用の充電  
台を使用する。また、ACア  
ダプターを使用する場合は、  
壁のコンセントに直接差し  
込み、タコ足配線にしない。  
感電・ショート・発火の原因  
となります。



必ず守る

お肌、頭皮に異常が生じて  
いないかよく注意して使用  
する。お肌、頭皮に合わな  
いときは使用を中止する。  
肌トラブルの原因となり  
ます。



必ず守る

使用しないとき・お手入れ  
するときは必ず電源をオフ  
にする。  
感電・ショート・発火の原因  
となります。



必ず守る

機器を落としたり破損した  
りした場合は、直ちに電源  
をオフにしてプラグを抜き、  
必ず修理・点検を依頼する。  
火災・感電のおそれがあり  
ます。

## 警告



プラグを抜く

万一、異常が発生したら、  
本体の電源をオフにする。  
また、充電をしているときは  
ACアダプターや充電ケー  
ブルをすぐに抜く。

けむり・異音・においがする  
など、異常状態のまま使用  
しないでください。



プラグを抜く

地震や雷を感じたら電源を  
オフにし、ACアダプターや  
充電ケーブルをすぐに抜く。  
火災・感電のおそれがあり  
ます。



発火注意

火中投入・加熱・高温・高圧で  
の充電・使用・保管をしない。  
本製品は充電式電池を内蔵  
しています。発熱・発火・破裂  
の原因となります。



必ず守る

必ずDC5Vで充電する  
こと。ACアダプターは、根元  
まで確実に差し込む。海外  
での使用の際は必ずブラ  
グ形状の電圧を確認のう  
え使用する。



プラグを抜く

使用后及び機器のお手入  
れをするときは、必ず電源  
をオフにし、充電しながら  
行わない。  
火災・事故のおそれがあり  
ます。



プラグを抜く

充電ケーブルを抜くとき  
は、必ず先端を持って引き  
抜く。また、濡れた手で抜き  
差しはしない。  
感電・ショート・発火の原因  
となります。

## ⚠ 注意



禁止

次に該当する人は使用しない。

髪の毛がからみつき、髪を傷める原因となります。

- ・ 植毛をされている。
- ・ 部分かつら(テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど)を装着中の人。



禁止

次の項目は行わない。

事故・トラブルの原因となります。

- ・ アタッチメントを強く押しつけたり、早く動かしたりしない。
- ・ 過度に1か所に集中して使用しない。
- ・ 髪の毛がからみついたときは、本体を停止させてから、からんだ髪の毛を外す。



禁止

次のような場所で機器を使用・保管・充電しない。

- ・ 浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近く(浴室や浴槽での使用は可)
  - ・ ほごりの多い場所・直射日光の当たる場所や屋外
  - ・ 傾斜、振動、衝撃のある場所
  - ・ 強い電波や磁気の発生する場所
  - ・ 引火性のも(アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど)の近く
  - ・ 油煙、湯気の当たる場所
  - ・ 発熱器具(ストーブ等)の近くなど高温になる場所
  - ・ 温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)
- 火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。



禁止

電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。他の電気製品(電気毛布・敷布・こたつ等)との同時使用はしない。

誤作動による事故のおそれがあります。



禁止

強く押しあてず、1か所に集中して使用しない。

必要以上に強く押し付けたり1か所に集中して使用するとお肌を傷める原因となります。



禁止

LEDランプの光を直接のぞき込まない。

目を傷める原因となります。



禁止

水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。また、温泉や入浴剤入りのお湯、サウナで使用しない。

本体の故障の原因となります。

## ⚠ 注意



禁止

ドライヤーと一緒に使用したり、ドライヤーで本体を乾燥させない。

本体の変型・故障の原因となります。



必ず守る

歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、レベルを下げ、使用部位を調整する。

EMSによりほお・あごに刺激を強く感じたりすることがあります。強い違和感を覚える場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

同一部位に5分以上の使用は避ける。

再度同一部位に使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。過度な使用はお肌を傷める可能性があります。あくまでも目安ですので、お肌の状態をみながらご使用ください。



必ず守る

お肌、頭皮に痛みを伴う刺激を感じた場合は、使用を中止する。EMS使用時はアタッチメントとお肌との間に水などを補充する。

そのまま使用すると、お肌、頭皮を傷める原因となります。



必ず守る

使用後は必ず本体の水分を拭き取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。

本体が濡れたまま放置すると、充電端子が腐食する原因となります。



必ず守る

使用するときには、必ずアタッチメントを取り付けた状態で使用する。

髪の毛がからみつき、髪を傷める原因となります。



必ず守る

充電が終わったときはACアダプターをコンセントから抜く。

火災・事故の原因となります。



必ず守る

使用時には身体からアクセサリや金属類(時計・ネックレス・指輪・イヤリング)を外す。

アクセサリ類を巻き込む原因となります。



必ず守る

衣類の上から使用しない。

衣類の汚れや損傷の原因となります。衣類の上からの使用を避け、お肌へ直接ご使用ください。

## 海外でのご使用について

### 警告



必ず守る

必ずDC5Vで充電すること。(無料修理は日本国内のみ)  
火災・感電・故障の原因となります。



発火注意

必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。  
発熱・発火・故障の原因となります。

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

英語・中国語でも安全上の注意を確認することができます。

You can also check safety precautions in English from the QR code.

您可以扫二维码了解更多“安全注意”信息。

English



<https://www.ya-man.co.jp/support/caution/en/>


中文




<https://www.ya-man.co.jp/support/caution/cn/>

TO ACCESS SCAN WITH YOUR CAMERA PHONE

## 各部のなまえ

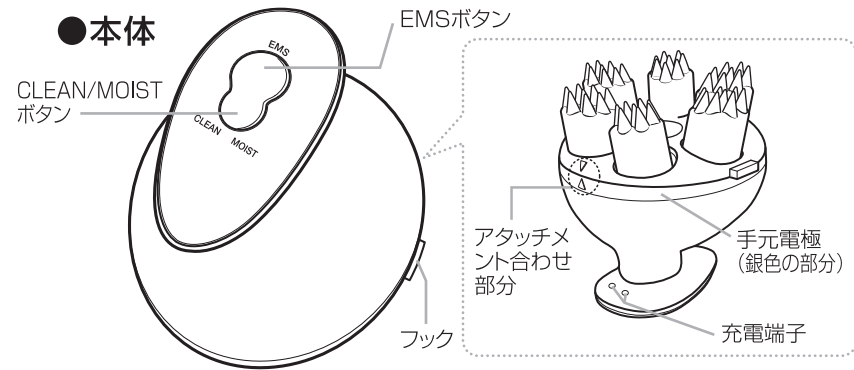

アタッチメントを外したところ

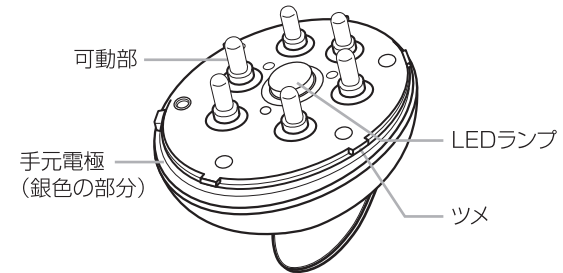

各部のなまえ

### ●付属品



・ニードルアタッチメント  
(先端部は導電シリコンゴム電極)

頭皮専用です。


※お買い上げ時は、本体にセットされています。

・もみ出しアタッチメント  
(先端部は導電シリコンゴム電極)

頭皮・顔・首・肩・身体に使用できます。

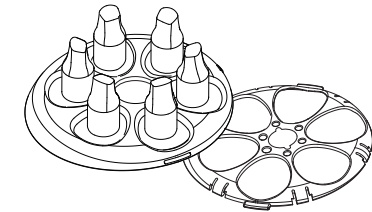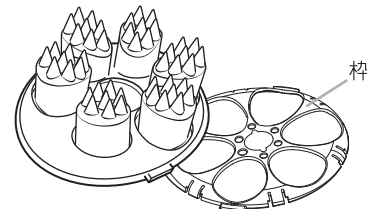

アタッチメントの枠は着脱可能です。枠の取り付けかたについては、「アタッチメントのゴム部分と枠が外れてしまった場合」(P.15)を参照してください。

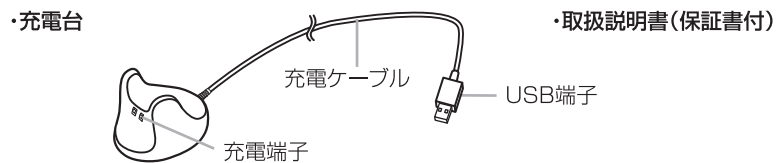

※ACアダプターは付属しません。  
 ※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

## はたらき

### ●安全機能

アタッチメントを強く押しつけたり、髪の毛がからみつくなど一定の負荷がかかると、安全機能が働き、動作が一瞬停止します。  
 連続して数回強く押しつけると表示ランプが点滅し、電源がオフになることがあります。安全機能が働かない程度の強さであってください。  
 電源が切れた場合は、再度電源をオンにしてからモードを選択してください。

### ●防水機能

本体は防水仕様(IPX7)になっています。シャワーや浴槽の中でも使用することができます。充電台は防水ではありません。

### ●EMS

電氣的に筋肉を刺激します。

### ●オートオフ機能

動作開始から約5分経過すると、自動的に電源がオフになります。

### ●イオン導入

イオンの力で化粧水をよりお肌に浸透<sup>\*1</sup>させることができます。※1 角質層まで

### ●イオン導出

洗髪では落としきれない頭皮の汚れを、イオンの力で吸着することができます。



警告

●浴室での充電は絶対にしない。  
 感電・ショート・発火の原因となります。




注意

●水やお風呂の中に浸水させたま放置しない。  
 本体が故障する原因となります。

## ●モードとランプ表示

### ●ボタン操作/ランプ表示

EMSボタンもしくはCLEAN/MOISTボタンを長押し(約3秒)すると電源がオンになり(EMSレベル1、CLEANモード)、EMSレベル表示ランプが1つとCLEAN表示ランプが点灯します。電源がオンの状態でEMSボタンを短推しするたびに、EMSのレベルが切り替わります。

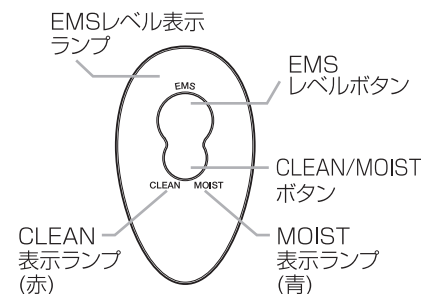

☀️=点滅 ●=点灯 ○=消灯

	ランプ表示	説明
レベル1	●○○	初めて使用する時や、使いかたに慣れるまでは、レベル1を使用してください。
レベル2	●●○	体感に合わせてレベルを調整してください。
レベル3	●●●	
EMS停止	☀️☀️☀️	EMSの出力が停止します。
停止	○○○	EMSボタンを約3秒長押しで動作が停止します。

### ●CLEAN/MOISTボタン操作/ランプ表示

CLEAN/MOISTボタンもしくはEMSボタンを長押し(約3秒)すると電源がオン(EMSレベル1、CLEANモード)になり、EMSレベル表示ランプが1つとCLEAN表示ランプが赤色点灯します。電源がオンの状態でCLEAN/MOISTボタンを短押しすると、CLEANモードとMOISTモードが切り替わります。MOISTモードではMOIST表示ランプが青色点灯します。

●=点灯 ○=消灯

	ランプ表示	説明
CLEANモード	●○ (赤)	洗うだけでは落としきれない汚れを、イオンの力で吸着します。
MOISTモード	○● (青)	お肌へ美容成分を浸透 <sup>*1</sup> をサポートします。
停止	○○	CLEAN/MOISTボタンを約3秒長押しで動作が停止します。

※1 角質層まで

## 用途別モードの選びかた

※お好みに応じて各モードを組み合わせてパターンを選択してください。  
 ※各部位の使用モードは必ず守ってください。

	用途	部位
CLEAN	水など頭皮をぬらした状態、または入浴中にシャンプーで髪全体を泡立てた状態でご使用ください。	頭皮
MOIST	頭皮に使用する場合、育毛剤、ヘアローション(オイルタイプ以外)等と併用してご使用ください。 お顔に使用する場合、お風呂上がりのスキンケア時に化粧水・美容液等と併用してご使用ください。	頭皮 顔 首 身体

## ご使用の前に

### 充電のしかた

初めて使用するときや充電残量が減ったときは充電をしてください。

- ・購入後初めて充電を行うときは、完全に充電が完了するまで使用しないでください。
- ・初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。


### ●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約4時間	約40分


※充電環境 室温約25℃において  
 ※満充電直後からの動作時間です。  
 ※電池の残量や充電環境によって、  
 充電時間や動作時間は前後します。

- 1 充電台をACアダプター(市販品)と接続し、ACアダプターをコンセントに差し込む。
- 2 本体を充電台の充電端子が触れるように図のように充電台に置く。

#### ●家庭用コンセントを使用する場合

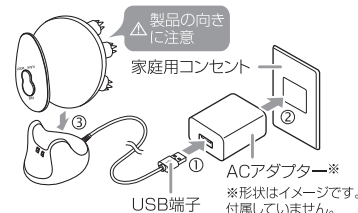


#### ●パソコンを使用する場合

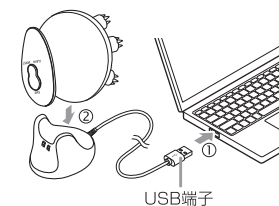

- ・本体と充電端子の水滴をしっかり拭き取ってください。
- ・充電端子に水滴が残ったまま充電すると、製品の故障につながる恐れがあります。
- ・充電中は充電残量に応じて、EMSレベル表示ランプが点灯、点滅します。
- ・充電が完了すると、EMSレベル表示ランプがすべて点灯します。
- ・電池の残量や充電環境によって、充電時間は前後します。

EMSレベル表示ランプが点灯しない場合は正しく充電できていません。斜めにならないよう、真っ直ぐに置いてください。

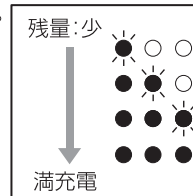

☼=点滅 ●=点灯 ○=消灯

### 3 充電完了後、ACアダプター(市販品)をコンセントから抜き、本体を充電台から外す。




#### 警告

- 本製品には必ず専用の充電台を使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 充電端子に水が付着していないことを確認してから充電する。感電・ショート・発火・故障の原因となります。


## アタッチメントの取り付けかた・取り外しかた

### ●取り付けかた

1 本体とアタッチメント合わせ部分の△マーク(P.8)を合わせ、アタッチメント裏面の穴と可動部の位置を合わせる。

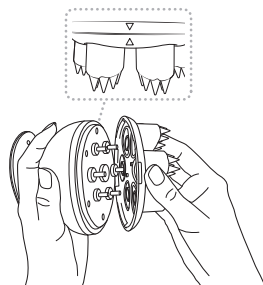

2 1か所ずつアタッチメントの裏面の穴に可動部を差し込んでいく。

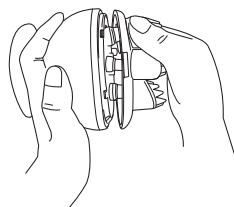

3 すべての可動部を差し込んだら「カチッ」と音がするまでアタッチメントを押し込む。


- ・6か所のツメにしっかりとめ込んでください。
- ・電源をオンにし、可動部の動きに合わせてアタッチメントを本体に沿わせるようにすると取り付けやすくなります。

※取り付けの際は指を巻き込まないように十分に注意してください。




### ●取り外しかた

1 アタッチメントのフックに指をかけ、持ち上げるようにして土台となっている枠(プラスチック部)ごと外す。

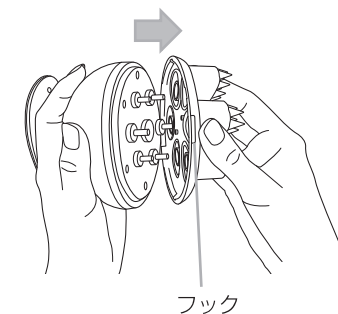


フック

アタッチメントはゴム部分と透明な枠が重なっています。両方を合わせて本体から取り外してください。

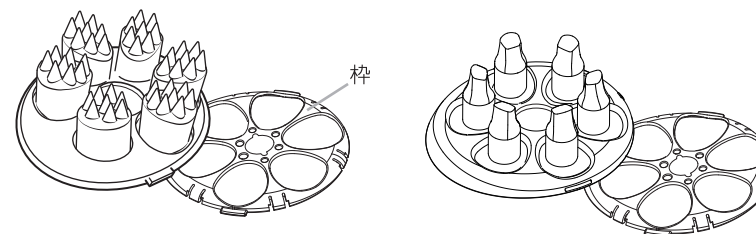


※アタッチメントのゴム部分のみを取り外さないようご注意ください。枠も取り外さないとアタッチメントの交換ができません。

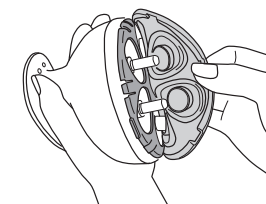


## ●アタッチメントのゴム部分と枠が外れてしまった場合

枠が見当たらない場合は、本体に装着されていないかご確認ください。


※アタッチメントのゴム部分は柔らかい素材です。強く引っ張ると破れることがありますので、破れないよう注意してお取り扱いください。

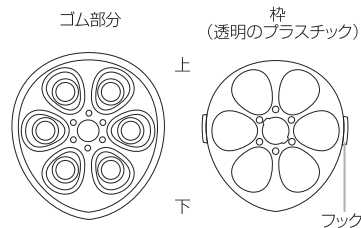


①ゴム部分の裏側に枠をのせ、ゴム部分の中央の突起と左右にあるフックの位置を合わせて下図のように枠の穴から突起を押し出します。

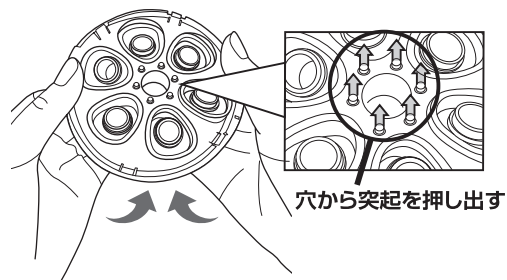


ゴム部分の裏側中央の突起を  
枠中央の穴に押し込んでください。

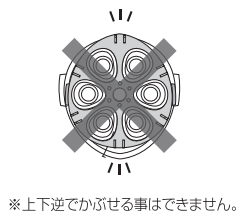

②ゴム部分の外周のふちの部分の枠をかぶせていきます。

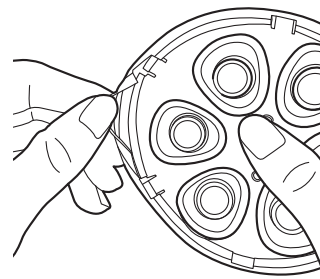


ゴム部分のふちを枠に巻き  
付けるように取り付ける。

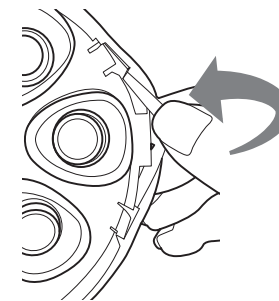


枠の左右のフックに  
引っかける。

③本体とアタッチメント合わせ部分の△マークを合わせ、1か所ずつアタッチメント裏面の穴に可動部を差し込みます。すべての可動部を差し込んだら本体と密着させるように、「カチッ」と音がするまでアタッチメントを押し込みます。

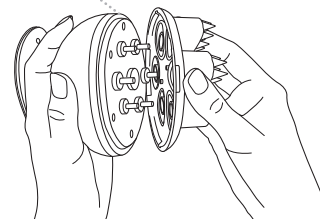

合わせる

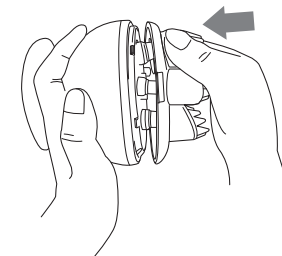

1か所ずつ差し込む

## お肌へのプレテスト

本製品を初めてご使用になる際は、肌トラブル防止のため必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

### 1 お肌を清潔な状態にする。

腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどで拭き取ります。

### 2 腕の内側を水で濡らし、EMSはレベル1に設定して約1分間動かしながら使用する。

・プレテストをした部分はこすらないでください。

### 3 24時間以内にお肌に異常（赤みやほてりなど）がないことを確認してから使用する。



注意

- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
- お肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。お肌に合わないときはご使用をおやめください。

ご使用の前に

## 使いかた



警告

- 頭皮やお肌に傷、皮膚炎等の異常のある人は使用しない。事故、お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。
- 使用中に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、頭皮やお肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。万一、頭皮やお肌に異常があらわれた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。



注意

- 使用するときは、必ずアタッチメントを取り付けた状態で使用する。
- お顔に使用するときには、必ずもみ出しアタッチメントを取り付けEMSはレベル1から使用し、体感に合わせてEMSレベルを調整しながら使用する。
- 次に該当する人は使用しない。
  - 髪の手がからみつき、髪を傷める原因となります。
    - ・植毛をされている人
    - ・部分かつら(テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど)を装着中の人
- 次の項目は行わない。
  - 事故やトラブルの原因となります。
    - ・アタッチメントを強く押しつけたり、早く動かしたりしない。
    - ・過度に1か所に集中して使用しない。
    - ・髪の手がからみついたときは、本体を停止させてから、からんだ髪の毛を外す。
- 使用時間を守って使用する。1部位1回約5分、1日合計20分を目安に使用する。
  - 過度の使用はお肌や頭皮を傷める原因となります。
- シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず水洗いする。本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。
- 入浴剤入りのお湯や温泉では使用しない。
  - におい・変色・故障の原因となります。
- 軽くあて、絶対に強く押しあてない。
  - 痛みや異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。
- 顔に使用するときには、必ずメイクを落として使用する。
  - メイクの上から使用すると、ファンデーションによりお肌が黒く汚れることがあります。

使いかた

## 使用時間の目安

- 1部位1回約5分、1日合計20分を目安に使用してください。
  - お顔に使用するときには、お顔全体で約5分、頭皮に使用するときには、頭皮全体で約5分を目安に使用してください。
  - 過度の使用はお肌や頭皮を傷める原因となります。

## 頭皮の皮脂洗浄ケア

### 1 シャンプーで髪全体を泡立てる。

- ほかの頭皮ブラシとの併用はオーバーケアの原因となりますのでおやめください。



### 2 図のように本体を持つ。


- 落とさないようにしっかりと持ってください。
- 手元電極に手が触れるように持ってください。



### 3 ボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにし、CLEANモードを選択する。

初めて使用する場合は、EMSモードはレベル1から体感に合わせて調整しながら使用してください。

- ボタンを押すたびにモードが切り替わります。(P. 10のモードとランプ表示参照)
- アタッチメント全体が頭皮にあたるように、垂直に軽く押しあててください。

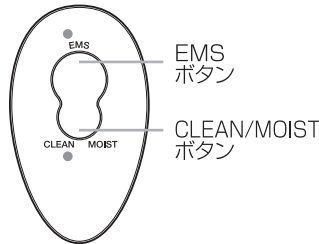

アタッチメント全体が頭皮にあたっている



アタッチメントの一部が頭皮から浮いている


### 4 前頭部と側頭部をケアする。

- 生え際に約5秒間軽くあてる。
  - 生え際から頭頂部へ約5秒間かけてゆっくりすべらせる。
  - ①、②を2回くり返す。
- アタッチメントを強く押しつけると安全機能が働いて電源が切れることがあります。安全機能が働かない程度の強さであってください。




### 5 後頭部をケアする。

- 生え際に約5秒間軽くあてる。
- 生え際から頭頂部へ向かって約5秒間かけてゆっくりすべらせる。

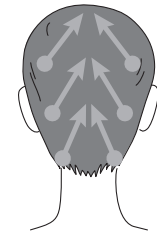


### 6 頭頂部と後頭部をケアする。

- 頭頂部(右図④)に約20秒間軽くあてる。  
右図のように頭頂部からえりあしに向かって約5秒ずつ押しあてて移動する。

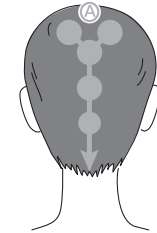

### 7 ケアが終わったら、ボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。

- 表示ランプが消灯し、電源がオフになります。
- ボタンを長押ししなくても、動作開始から約5分経過すると、自動的に電源がオフになります。

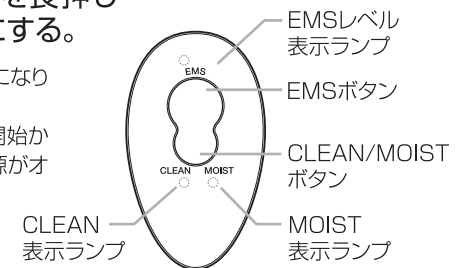

### 8 シャンプーを洗い流し、通常のお手入れをする。

- シャンプーを洗い流した後は、通常のお手入れをしてください。(コンディショナー・トリートメント・ヘアパックなど)



注意

- シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず水洗いしてください。本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。

## もみ出しケア

必ずもみ出しアタッチメントを取り付け、EMSはレベル1から体感に合わせて調整しながら使用する。

お肌を濡らした状態での使用をおすすめします。  
入浴中や化粧水、ジェルなどでお肌を湿らせてご使用することをおすすめします。  
メイクを落としてからご使用ください。

使いかた

### 1 図のように本体を持つ。

- ・落とさないようにしっかりと持ってください。
- ・手元電極に手が触れるように持ってください。

もみ出しアタッチメント



### 2 ボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにし、MOISTモードを選択し、EMSはレベル1から体感に合わせて調整しながら使用する。

- ・お肌にアタッチメント全体を、垂直に軽くあててください。
- ・強く押しあてないでください。



アタッチメント全体がお肌に垂直にあたっている



アタッチメントの一部がお肌から浮いている



注意

- 顔に使用するときには、必ずメイクを落として使用してください。ファンデーションによりお肌が黒く汚れることがあります。
- 衣類の上から使用しないでください。衣類が汚れたり損傷する原因となります。
- お肌、頭皮に痛みを伴う刺激を感じた場合は、使用を中止してください。
- EMS使用時はアタッチメントとお肌の間に水分を追加してください。

### 3 お顔をケアする。

あごからこめかみにむけて、フェイスラインに沿ってゆっくりすべらせる。各10回くり返す。

- ・アタッチメントを強く押しつけると安全機能が働いて電源がオフになることがあります。お肌に軽くあててください。

- ※目もとと頬骨の上を避けてすべらせてください。
- ※アタッチメントを強く押しつけるとお肌を挟んで強い痛みを感じる場合があります。その場合は軽く押しあてて「気持ちいい」と感じる強さでご使用ください。
- ※洗顔を完了後は、必ず水で十分に洗い流してからご使用ください。



目もと、頬骨の上には使用しない

使いかた

### 4 首と肩まわりをケアする。


- ① 耳の後ろから鎖骨に向かって約5秒ずつ押しあてて移動させる。
  - ② 鎖骨の下側を肩へ向かって約5秒ずつ押しあてて移動させる。
  - ③ ①と②を3回くり返す。
- ※ のどぼとけや鎖骨にあてないようにすべらせてください。
- ④ 首の後ろ側と肩まわりを右図のように押しあてて移動させる。



使用できない部位

### 5 ケアが終わったら、ボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。

- ・表示ランプが消灯し、電源がオフになります。
- ・ボタンを長押ししなくても、動作開始から約5分経過すると、自動的に電源がオフになります。

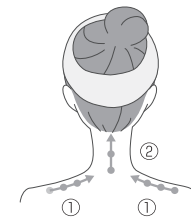

● 押しあてる  
➡ 矢印の方向へすべらせる



注意

- 首すじに使用する場合は強く押し当てないように注意してください。途中で気分が悪くなった際は直ちに使用を中止してください。また、EMSの刺激が強く感じられる場合がありますのでご注意ください。



注意

- お顔に使用する際は、必ずもみ出しアタッチメントを取り付けEMSはレベル1から体感に合わせて調整しながら使用する。

## 頭皮のもみ上げケア

使いかた

### 頭皮用トリートメント剤などを一緒に使うとき

育毛剤などの頭皮用トリートメント剤をご使用になる場合は、頭皮へ頭皮用トリートメント剤を塗布して通常の使いかたをした後、本製品を使用してください。

※頭皮用トリートメント剤を使用した後は、本製品を必ず水で十分に洗い流してください。

### 1 頭皮用トリートメント剤をつける。



### 2 図のように本体を持つ。

- ・落とさないようにしっかりと持ってください。
- ・手元電極に手が触れるように持ってください。



### 3 ボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにし、MOISTモードを選択し、EMSはレベル1から体感に合わせて調整しながら使用する。

- ・ ボタンを押すたびに、モードが切り替わります。(P.10のモードとランプ表示参照)
- ・ 初めて使用する場合は、EMSはレベル1から体感に合わせて調整しながら使用してください。
- ・ アタッチメント全体が頭皮にあたるように、垂直に軽く押しあててください。



ブラシ全体が頭皮に垂直にあたっている



ブラシの一部が頭皮から浮いている

### 4 側頭部をケアする。


- ① 生え際に約5秒間軽くあてる。
  - ② 生え際から頭頂部へゆっくりすべらせる(約5秒)。
  - ③ ①、②を2回くり返す。
- ・ アタッチメントを強く押しつけると安全機能が働いて電源がオフになることがあります。安全機能が働かない程度の強さであってください。



- 押しあてる
- ➔ 矢印の方向へすべらせる

### 5 後頭部をケアする。


- ① 生え際に約5秒間軽くあてる。
- ② 中央に約5秒間軽くあてる。
- ③ 頭頂部に約5秒間軽くあてる。
- ④ 左右の位置を変えて①～③を2回くり返し、後頭部全体をケアする。

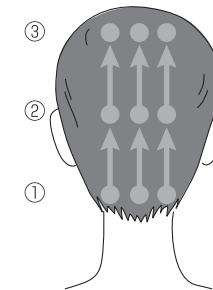

使いかた

## 6 頭頂部をケアする。

- ① 生え際に約5秒間軽くあてる。
- ② 頭頂部に約5秒間軽くあてる。
- ③ 左右の位置を変えて①～②を2回くり返し、頭頂部全体をケアする。

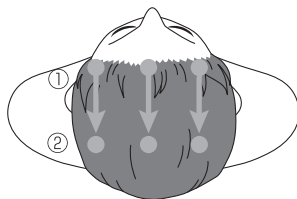

- 押しあてる
- ➔ 矢印の方向へすべらせる

## 7 ケアが終わったら、ボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。

- ・ 表示ランプが消灯し、電源がオフになります。
- ・ ボタンを長押ししなくても、動作開始から約5分経過すると、自動的に電源がオフになります。



**注意**

- シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず水洗いする。本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。

## 使い終わったら

### お手入れのしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。



**警告**

使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにする。  
感電・ショート・発火の原因となります。

### 1 電源がオフになっていることを確認する。

### 2 本体についている髪の毛や汚れを洗い流す。

- ・ アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。




### 3 本体からアタッチメントを取り外す。


- ・ アタッチメントの取り外しかたについては、「取り外しかた」(P.14)を参照してください。

### 4 アタッチメントのゴム部分を枠から取り外す。

- ※ アタッチメントのゴム部分は柔らかい素材です。強く引っ張ると破れることがありますので、破れないよう注意してお取り扱いください。

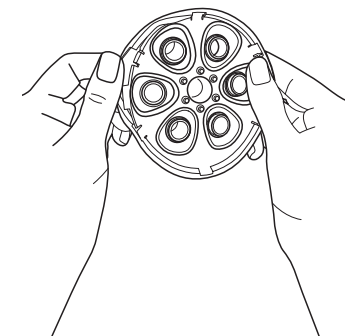

- 5 うすめた中性洗剤でアタッチメントのゴム部分と枠についている汚れを落とした後、水で洗い流す。

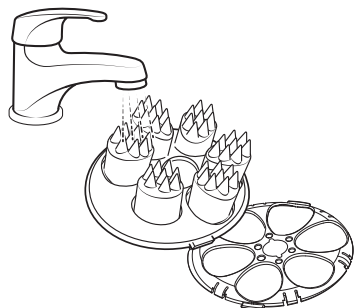


- 6 タオルなどの乾いた布で、本体・アタッチメントのゴム部分・枠の水分を拭き取り、風通しの良い場所で乾燥させる。

- ・特に充電端子や可動部表面には水分が残らないように、綿棒などで拭き取ってください。
- ・湿ったままの状態では放置しないでください。
- ・故障・においの原因となることがあります。

- 7 アタッチメントに枠を取り付ける。

- ・枠が見当たらない場合は、本体に装着されていないかご確認ください。
  - ・枠の取り付けかたについては、「アタッチメントのゴム部分と枠が外れてしまった場合」(P.15)を参照ください。
- ※アタッチメントのゴム部分は柔らかい素材です。強く引っ張ると破れることがありますので、破れないよう注意してお取り扱いください。

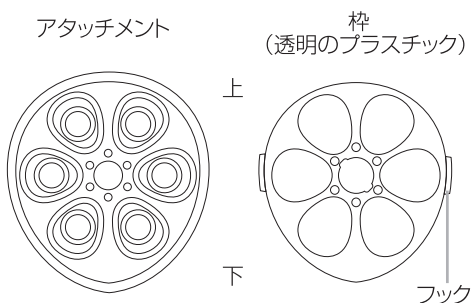

## 注意

- 水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。  
本体が故障する原因となります。
- シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず水洗いする。  
本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。
- 使用後は水気をよく切り、本体に水が付着したまま放置しない。  
故障の原因となります。
- 使用後は必ず本体の水分を拭き取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。  
本体が濡れたままの状態では放置すると、充電端子、可動部が腐食する原因となります。
- 機器のお肌に触れる部分は、毎回お手入れし、常に清潔な状態で使用する。  
肌トラブルの原因となります。

## 保管のしかた

- 使用後は、必ず水分を拭き取り、十分に乾燥させてから保管してください。本体に水分がついた状態で放置すると、充電端子や可動部の表面、本体内部が腐食する原因となります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプター(市販品)をコンセントから抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

## 保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.29~P.30)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.33)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はヤーマンコールセンター(P.33)までご相談ください。

# こんなときには

## 困ったときは

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状	考えられる原因	処置方法
電源が入らない	EMSボタンまたはCLEAN/MOISTボタンを押していない	いずれかのボタンを <b>長押し(約3秒)</b> して電源をオンにしてください
	充電がされていない	壁面コンセントで充電してください(P.12)
充電しても数分しか使えない	充電電池の残量不足	充電してください(P.12)
	充電電池の寿命	販売店またはヤーマンコールセンター(P.33)にご連絡ください ※故障の原因となるためお客様では交換できません
充電が開始されない	ACアダプターがコンセントに差し込まれていない	ACアダプターをコンセントに差し込んでください(P.12)
	充電台のUSB端子がACアダプターに差し込まれていない	充電台のUSB端子をACアダプターに差し込んでください
	充電台に本体がしっかりセットされていない	充電端子の水滴、汚れを拭き取り、本体と充電台の充電端子が触れるように置いてください
	ACアダプターの出力が正しくない	定格電源DC5V/1.0AのACアダプターを使用してください

こんなときは

## 困ったときは

こんな症状	考えられる原因	処置方法
途中で停止する	充電電池の残量不足	充電してください(P.12)
	オートオフ機能が働いた	動作を開始してから約5分経過すると自動的に停止します(P.9)
EMSが弱い(感じない)	安全機能が働いた	アタッチメントを強く押しつけたり髪の毛がからみつくなど一定の負荷がかかると安全機能が働きます
	レベルが低い	EMSのレベルを上げてください
EMSが強い(痛い)	シリコン電極がお肌にあたっていない	アタッチメント全体がお肌にあたるようにしてください
	お肌が乾燥している	水や化粧水、ゲルなどを塗って、お肌を湿らせてください
EMSが強い(痛い)	レベルが高い	EMSのレベルを下げてください
	お肌が乾燥している	水や化粧水、ゲルなどを塗って、お肌を湿らせてください

こんなときは

## よくあるご質問

Q	A
どれくらいの頻度で使用すれば良いですか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●1部位1回約5分、1日合計20分を目安にご使用ください。お顔に使用するとき、<b>顔全体で約5分</b>、頭皮に使用するとき、<b>頭皮全体で約5分</b>を目安にご使用ください。過度の使用はお肌や頭皮を傷める原因となります。</li> <li>●お肌や頭皮に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。</li> <li>●再度同一部位に使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。</li> </ul>
乾いた髪に使用してもかまいませんか？	頭皮のケアとして、乾いた髪に使用することもできます。EMSやCLEAN、MOISTモードの効果を得るためには頭皮に水分がある状態でご使用ください。
頭皮以外にも使えますか？	顔、首、肩、二の腕、お腹、脚に使用できます。お顔に使用ときは、必ずもみ出しアタッチメントを取り付けEMSモードはレベル1から体感に合わせて調整しながらご使用ください。首に使用する場合は強く押し当てないように注意し、気分が悪くなった際は直ちに使用を中止してください。
アタッチメントがうまく取り付けられないのですが	<ul style="list-style-type: none"> <li>●アタッチメント(ゴム部分)に、土台のプラスチック(枠)がついているかどうか、ご確認ください。</li> <li>●プラスチック(枠)からアタッチメント(ゴム部分)が外れてしまっている場合は、土台のプラスチック(枠)にアタッチメント(ゴム部分)をかぶせ、本体に取り付けてください(「アタッチメントのゴム部分と枠が外れてしまった場合」(P.15)参照)。</li> <li>●それでもアタッチメントを取り付けにくい場合は、電源をオンにし、可動部の動きに合わせてアタッチメントを本体に沿わせるようにすると取り付けやすくなります(P.13参照)。</li> </ul> <p>※取り付けの際は指を巻き込まないように十分に注意してください。</p>
お風呂で使用後、本体を振ると水の入った音がします	異常ではありません。本体・アタッチメントの水分をよく拭き取り風通しの良い場所で乾燥させてください(「お手入れのしかた」(P.26)参照)。

## よくあるご質問

Q	A
お風呂で使用中に水泡が出てきます	異常ではありません。
使用する際は水以外は使用できませんか？	頭皮にはシャンプーやトリートメント、ヘアローション(オイルタイプ以外)など、顔、身体には化粧水やゲルなどもご使用いただけます。オイル、スクラブなど刺激の強いものは使用しないでください。肌トラブルや本製品が故障の原因となります。
部位によって同じEMSのレベルでも刺激の感じ方が違うことがありますか？	EMSは筋肉を刺激する機能のため、部位によっては刺激を感じにくい場合があります。
アタッチメントを拭いたら黒く汚れたのですが	アタッチメントを強くこすると色が移ることがあります。誤ったご使用方法でケアしますと色移りする可能性がございますので、必ず取扱説明書に従ってご使用ください。
身体へ使用することはできますか？	はい。この製品は身体へ使用することができます。ただし、妊娠初期から出産直後の方は身体へのご使用をお控えください。また、ご使用の際は服の上からご使用されないようご注意ください。

# アフターサービス

## 充電機について

- 充電機は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電機交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(下記)にご相談ください。

## 廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。



## お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

### ヤーマンコールセンター

固定電話など  
☎0120-776-282(通話料無料)  
携帯電話  
☎0570-550-637(通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。  
※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっております。

## ●製品仕様

定 格	DC5V 1.0A
消費電力	約3W(充電時)
外形寸法	本体:約W97xD106×H105(mm)(アタッチメント除く) コードの長さ:約1.1m
製品質量	本体:約285g(アタッチメント除く)
材 質	本体:ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリアセタール、 アタッチメント:シリコン、ポリカーボネート 充電台:ABS樹脂
製 造 国	中国
セ ッ ト 内 容	本体…………… 1台 充電台…………… 1台 ニードルアタッチメント… 1個 取扱説明書(保証書付) もみ出しアタッチメント… 1個

## ●保証について

- ・通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- ・保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.33)にご相談ください。
- ・弊社製品保証約款に照らしお客様の言動がカスタマーハラスメント行為に該当すると判断した場合は、保証対応をお断り、または中止させていただきます。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご購入品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
  - (イ) お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
  - (ロ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
  - (リ) 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
    - ①使用上の誤り ②お買い上げ後の輸送、転倒・落下 ③弊社以外の第三者による修理・改造 ④高温・多湿等の温度・湿度の使用環境 ⑤接続する他の機器の異常 ⑥(家庭用製品の業務用使用等)想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用⑦(説明書等で指定がある場合)指定方法以外での給電 ⑧非純正部品の使用 ⑨車両・船舶への搭載 ⑩海外でのご使用
- (ニ) 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
  - (ホ) 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
  - (ヘ) 改造・分解の形跡がある場合
  - (ト) 説明書、注意書等で弊社からの案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法(レンタル行為を含みます)でのご使用が確認された場合
  - (チ) 保証書又は明細書のご提示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
  - (リ) 弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品(オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合
  - (ヌ) 製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
  - (ル) その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でない弊社が判断した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ye-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ye-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。