



取扱説明書

ウェアラブル美顔器
デザインリフト モア
YJMD1

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に「安全上のご注意」(P.3~11) を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

使いかたの流れ

1


洗顔後、
お肌を整えて
ストレッチ
フィットシート
を顔に貼る

透明な保護シート
(長方形)から
ストレッチフィットシート
を取り外し、
各部位に貼り付けて
ください。

2

電源を
オンにする

電源オン/アップ
ボタンを1秒以上
押してください。

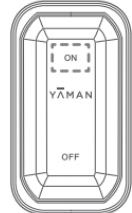

3


コントローラー
をセットする

電源オン/アップ
ボタンを上にして
コントローラーを
装着してください。

4

EMSレベルを
選ぶ

電源オン/アップ
ボタンを短押しで
レベルが上がり、
電源オフ/ダウン
ボタンを短押しで
レベルが下がります。

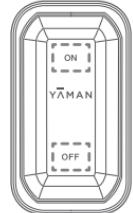

5

終了する

約10分後に、
自動で電源が
オフになります。

もくじ

使用前

準備

使う

お手入れ

お知らせ

安全上のご注意	p 3	お知らせ	p 21
各部のなまえとはたらき	p 12	●故障かな?と思ったら	p 21
お使いになる前に	p 13	●よくあるご質問	p 24
使いかた	p 15	●製品仕様	p 27
使い終わったら	p 19	アフターサービス	p 28

■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について



危険
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容です。

図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

⚠ 危険 (ご使用、保管に関して)

- 次に該当する人は使用しない。
医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。
- ◆医用電気機器を使用している人
・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心肺など生命維持用医用電気機器 ・心電計などの
装着型医用電気機器



禁 止

⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 次のような人は使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
・心臓疾患、障害及びその疑いのある人 ・幼児や自分で意思表示できない人 ・温度や刺激の感覚が自覚できない人
・自己免疫疾患のある人

次の人をご使用前に医師にご相談ください。

- ・急性疾患の人 ・感染症疾患の人 ・悪性腫瘍のある人 ・有熱性疾患の人 ・高血圧の人や血液疾患のある人
- ・発熱している人 ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人 ・神経障害のある人
- ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人 ・通院して薬を服用中の人
- ・アレルギー体质、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人

- 次のような場合や部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- ・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合 ・酒気帯びの場合 ・頭部 ・口内や陰部、粘膜など ・眼球 ・まぶた(眼窩)
・のど ・膨らんだホクロ ・ウイルス性のイボ ・骨折している部位
- ・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位

※施術後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。

(施術例:ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)

- ・外科手術(形成、整形、美容)等で体内に金属を埋め込んだ部位

- 業務用等、過剰な連続使用をしない。

- コントローラーを水中に入れない。
けが・故障の原因となります。



禁 止

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。また、子供に遊ばせない。
- 子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。自分で意思表示ができない人に使わせない。子供は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。
事故・けがの原因となります。



使用者の
制限

- 不安定な場所に置かない。本体を落としたり、ぶつけたりしない。重いものを置かない。
けが・故障の原因となります。



落下・
衝撃禁止

- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
けが・故障の原因となります。



用途以外
禁止

- 異臭・異常発熱したときは使用しない。
そのまま使用すると破損や発火の原因となります。



異臭・
異常発熱時
使用禁止

- 分解や修理・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



分解禁止

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- 顔以外には使用しない。
- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。
他の電気製品（電気毛布・敷布・こたつ等）との同時使用はしない。
誤動作による事故のおそれがあります。
- 他の電気製品（美容機器等）と併用しない。
肌トラブル・誤動作の原因となります。
- 使用前に本体の割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は、使用しない。
お肌の傷などのトラブルや、症状悪化の原因となります。
- コントローラー取り付け部に、金属の板などを近づけないでください。
部品が外れ、機能が損なわれるおそれがあります。



禁止

- 次のような場所で機器を使用・保管・充電しない。
 - ・浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近く
 - ・ほこりの多い場所
 - ・直射日光の当たる場所や屋外
 - ・傾斜、振動、衝撃のある場所
 - ・強い電波や磁気の発生する場所
 - ・引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近く
 - ・油煙、湯気の当たる場所
 - ・発熱器具（ストーブ等）の近くなど高温になる場所
 - ・温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具のそば）
- 火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。



禁止

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- オーバーケアをしない。

使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。

身体に危害を与えるおそれがあります。

- 車両運転中に使用しない。

事故やけがの原因となります。



禁止

- 以下の項目は必ず守る。

・設定時間以上の使用は避ける

・ピーリングケアとの併用は控える

事故・けが・本体が故障する原因となります。

- 下記の使用限度を守って使用する。

1回10分間の使用で週2～3回、1日1回程度を目安にご使用ください。（1日最大2回まで）

連続で使用する場合は、5時間以上間隔をあけてください。



必ず守る

- 同一部位に連続で使用する場合は、5時間以上間隔をあける。

上記はあくまでも目安です。お肌の状態を見ながらご使用ください。連続使用は、けが・発熱などの原因となります。

- お肌がピリピリした痛みを感じた場合は、EMSレベル（強さ）を下げる。

そのまま使用すると、お肌を傷める原因となります。

- お肌とストレッチフィットシートの間に化粧水などで十分に水分があるようにする。

水分が少ないとEMSの伝達が悪くなり、効果の低下や肌トラブルの原因となります。



必ず守る

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- 使用環境温度を守る。

使用できる環境温度は10～35℃です。使用する場所の室温を確認してください。場所を変えた直後は、室温に対応しないことがあります。故障・破損の原因となります。

- 使用中、コンタクトレンズの擦れを感じたら使用を中止するか、コンタクトレンズを外して使用する。

- 歯の治療中の人は（インプラント・矯正・銀歯等）、歯に詰め物がある人は、レベルを調節して使用する。

EMSの刺激により歯に違和感を覚えることがあります。



必ず守る

- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。

使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。

お肌に合わないときはご使用をおやめください。

翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずEMSレベル（強さ）をレベル1にしてから使用する。

事故・けがの原因となります。必ずお肌の様子を見ながらご使用ください。



必ず守る

⚠ 警告 (電源に関して)

- 充電用USBケーブルを破損・加工する、束ねるなど無理に力を加えない。
また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。
火災・感電の原因となります。



- 充電用USBケーブルを引っ張ってコントローラーを移動したり、持ち上げたりしない。
感電・ショート・発火・断線の原因となります。



- 充電用USBケーブルが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



- 充電用USBケーブルを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。



- 使用しないとき、お手入れするときは必ず電源をオフにする。使用しないときは、コントローラーとコンセントからACアダプター（市販品）と充電用USBケーブルを抜く。また、濡れた手で抜き差しはしない。
- 充電用USBケーブルを抜くときは、必ず先端のプラグを持って引き抜く（金属部に触れないようにする）。また、濡れた手で抜き差しはしない。



⚠ 警告 (電源に関して)

- 火中投入・加熱・高温・高圧での充電・
使用・保管をしない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。
発熱・発火・破裂の原因となります。



- ACアダプター(市販品)および充電用
USBケーブルは根元まで確実に差し込む。海外での使用の際は、必ずプラグ形
状・電圧を確認のうえ使用する。

火災・感電・故障の原因となります。

- 万一、異常が発生したら、電源をすぐに切る。

動作不良・発煙・異音・異臭がするなど、
異常状態のまま使用しないでください。

- 専用の充電用USBケーブル以外は使用し
ない。

感電、ショート、発火の原因となります。



- コンセントや配線器具の定格容量を超えて
配線(タコ足配線)しない。
感電・ショート・発火・故障の原因と
なります。

- 充電端子に化粧品や水滴が付着してい
ないことを確認してから充電する。

感電・ショート・発火・故障の原因と
なります。

※付属の充電用USBケーブルは充電専用
です。



必ず守る

⚠ 警告（海外でのご使用について）

- 必ず直流5VのUSB電源で使用する。

（保証は国内のみ）

火災・感電の原因となります。



必ず守る

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。

必ずご確認のうえご使用ください。

- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。

発熱・発火・故障の原因となります。



発火注意

英語・中国語でも安全上の注意を確認することができます。

You can also check safety precautions in English from the QR code below.

您可以扫二维码了解更多“安全注意”信息。

English



[https://www.ya-man.co.jp/
support/caution/en/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/en/)

中文



[https://www.ya-man.co.jp/
support/caution/cn/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/cn/)


TO ACCESS SCAN WITH
YOUR CAMERA PHONE

■ 各部のなまえとはたらき


本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

■ 本体(コントローラー) 左右1個セット

●正面

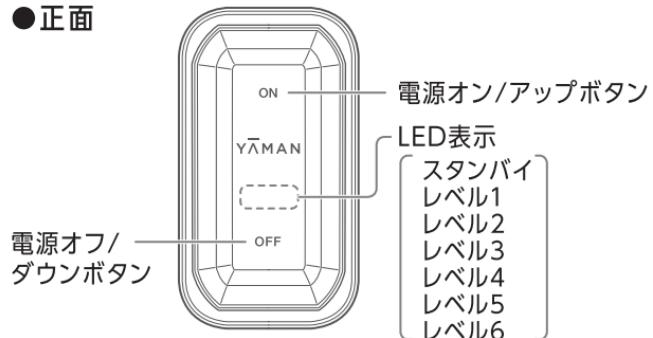

●背面

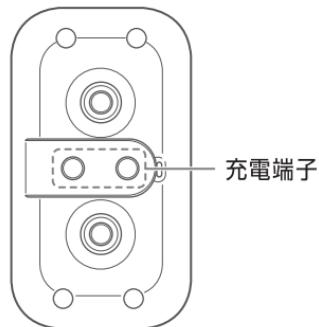

■ 付属品

- 充電用USBケーブル(マグネット式) ※本製品以外では使用しないでください。
- 取扱説明書(保証書付)

■ はたらき

オートオフ機能

電源をオンにしてから約10分が経過すると、自動で電源がオフになります。

防水機能


本製品はIPX5 (JIS 防水保護等級) の防水仕様です。

※完全防水仕様ではありません。水中にしづめたり、流水を3分以上あて続けないでください。

※充電用USBケーブルは防水ではありません。

■ お使いになる前に

充電する

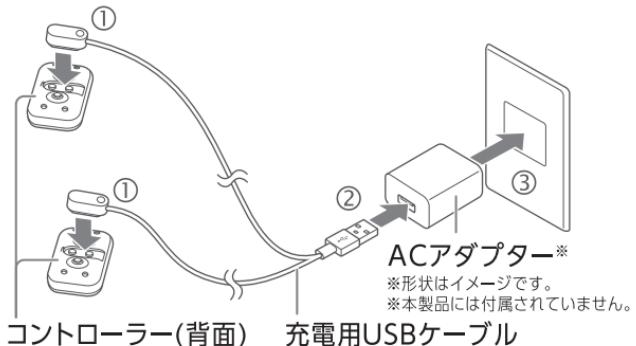

- 連続して充電端子への着脱を繰り返すと一時的に充電が停止することがあります。その際は充電ケーブルをはずし、再度ゆっくりと接続してください。
※充電開始時はランプ点滅まで1秒以上時間がかかる場合があります。
- ACアダプターは市販のものをご使用ください。




充電中	残量:少 ↓ 満充電		
充電完了時	白ランプがすべて点灯後、消灯。 充電用USBケーブルを外してください。		
充電時間	約2時間 (室温約25°C)		
動作時間	約5時間		

※ 電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。

- 購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してからご使用ください。
- 初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。
その場合は、再度充電してからご使用ください。

注意

- コントローラーと充電端子に水滴や汚れなどがついている場合は、
しっかり拭き取ってください。 水滴や汚れなどが残ったまま充電す
ると、故障の原因となります。

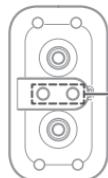

充電端子

ご使用前の注意:本製品を初めてご使用になる際は、肌トラブル防止のため必ずお肌との相性をプレテストをしてください。レベル1でご使用いただき、お肌に異常(赤みやほてり)を感じなければ、本製品をご使用いただけます。お肌に異常が見られたら直ちにご使用を中止してください。

■ 使いかた

準備

1 お肌を整え、髪が長い場合はまとめる



メイクを落として洗顔したあと、お手持ちのスキンケア化粧品でお肌を整えてください。

- メイクの上から使用するとお肌が黒くなる場合があります。
またストレッチフィットシートが密着しにくくなります。
- 美容オイルなど、油分を含むタイプの化粧品は使用しないでください。製品が故障したり、肌トラブルの原因となります。

※油成分を含む化粧品は、シートの粘着力を低下させます。
※油成分を含んでいる化粧品の場合、シートの粘着面がツルツルと
きます。


2 ストレッチフィットシートを顔に貼り付ける

※各部位への貼り付け方は、別途シートの説明書を
ご確認ください。

- ストレッチフィットシートは3回程度使用可能です。
使用後は専用の透明な保護シート（長方形）に貼り
付けて保管してください。
- ストレッチフィットシートを顔に貼り付ける前にコン
トローラーを取り付けないでください。
- スキンケア化粧品がストレッチフィットシートのコント
ローラー取り付け部にあるマグネット部につかないよ
うに注意してください。

ケアする

1 電源をオンにする

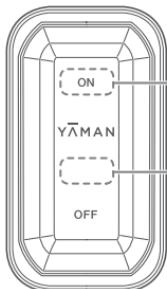

電源オン/アップボタン

LED表示

左右のコントローラーの電源オン/アップボタンを1秒以上押して電源を入れます。

スタンバイ表示になっていることを確認してください。

- スタンバイ表示のときは、3つのLED表示が点滅しています。
- スタンバイ時はEMSレベル（強さ）は「レベル0（出力なし）」に設定されています。
- 電源オン時に中央のLEDが点滅した場合、充電残量が少なくなっています。

	LED表示	対処法
中央のLED表示が2回点滅	○ ○ ○	充電残量が少なくなっています。 次回使用前に充電してください。
中央のLED表示が5回点滅	○ ○ ○	充電残量がかなり少なくなっています。 充電してください。

2 スタンバイ状態のままストレッチフィットシートにコントローラー（2個）を取り付ける


※各部位への貼り付け方は、別途シートの説明書をご確認ください。

電源オン/アップボタンを上にしてコントローラーを取り付けます。

- 取り付け時にコントローラーのボタンを押さないでください。（コントローラーに左右はありません。）

使
う

3 お好みのレベル（強さ）を選ぶ

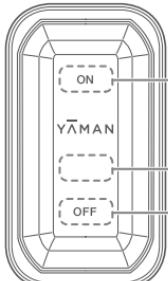

電源オン/アップボタン
LED表示
電源オフ/ダウンボタン

左右のコントローラーの電源オン/アップボタンまたは電源オフ/ダウンボタンを短押ししてレベルを設定します。

左右のコントローラーは、同時に操作してください。

初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ず「レベル1」に設定してご使用ください。お肌に異常を感じたらすぐに中止してください。

- 電源オン/アップボタンを短押しするとレベルが上がります。レベルを下げるには電源オフ/ダウンボタンを短押ししてください。
- レベル（強さ）は6段階で調節できます。
- 動作中に電子音が聞こえることがあります、異常ではありません。

注意

- 初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ず「レベル1」に設定してご使用ください。
- 取り付け時に過度な力を加えないでください。コントローラーの破損の原因となります。
- ピリピリとした痛みを感じるほど、EMSレベル（強さ）を上げないでください。



LED表示	
スタンバイ	点滅
レベル1	点滅
レベル2	点灯
レベル3	点滅
レベル4	点灯
レベル5	点滅
レベル6	点灯

点滅
点灯
消灯

※下記レベルでの使用を推奨しています。

- レベル1~3：目もと推奨
- レベル4~6：口もと推奨（初めて使用する際はレベル1から使用してください）

ポイント

- EMSを感じない、EMSの体感に左右差がある場合は「故障かな？と思ったら」(P.21) を参照してください。

4

終了する

電源をオンにしてから約10分後に、自動で電源がオフになります。

ストレッチフィットシートを手で押さえながら本体を外します。

顔の皮膚を引っ張らないようにストレッチフィットシートをゆっくりと外してください。

- 途中で使用を中止したいときは、左右のコントローラーの電源オフ/ダウンボタンを1秒以上押して電源をオフしてください。
- 使用後は透明な保護シート（長方形）に貼り付けて保管してください。
- ストレッチフィットシートは3回程度使用可能です。それ以上は粘着力の低下やストレッチフィットシートが破けてしまう可能性がありますので、新しいものをお使いください。

■ 使い終わったら

お手入れのしかた(コントローラー)

使用後はコントローラーを清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。

1 弱めの流水で洗い流す（特に裏側の充電端子部分）

※完全防水仕様ではありません。水中にしづめたり、流水を3分以上あて続けないでください。



2 乾いた柔らかい布等で水分を拭き取る

- ・お手入れ後は風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- ・化粧品などが付着した状態で放置しないでください。

お手入れのしかた(ストレッチフィットシート)


お手入れの仕方は、別途シートの説明書もご確認ください。

1 ウェットティッシュでトントンと軽くたたくように拭き取る

※ウェットティッシュはノンアルコールのものをご使用ください。

※こするように拭き取ると粘着が弱くなる可能性があります。

※粘着面の汚れをとることで、粘着力が回復します。

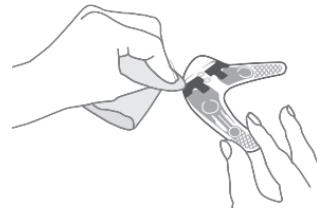

※ストレッチフィットシート(目もと)
の場合のイメージ

2 透明な保護シート(長方形)に貼り付ける

※口もと用のストレッチフィットシート裏面には、保護フィルムが貼られています。初回のみ

このフィルムをはがし、ご使用ください。その後は、保護シート(長方形)に貼り付けて保管してください。

注意

- ・お手入れの際は、必ず電源をオフにしてください。
感電・ショート・発火の原因となります。
- ・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。



保管のしかた

- ストレッチフィットシートは、透明な保護シート（長方形）に貼り付けて保管してください。
- お子様の手の届かない場所、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、コントローラーとコンセントからACアダプター（市販品）と充電用USBケーブルを抜いて保管してください。
- 高温多湿の場所（火のそばや炎天下、浴室など）に放置しないでください。
- 粘着力が弱い場合は、冷蔵庫で冷やしてください。（目安：5時間以上）
※透明な保護シート（長方形）に貼り付けて冷蔵庫で保管してください。
※野菜室や冷凍室では、保管しないでください。性能が低下するおそれがあります。
※ストレッチフィットシートを冷やしてもEMSの体感や安全性に影響はございません。

保守・点検について

- 長期間使用していなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してからご使用ください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな？と思ったら」（P.21）を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター（P.29）までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

■ お知らせ

故障かな?と思ったら 本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状

考えられる原因と対処法

EMSが弱い (感じない)	●電源オン/アップボタンでレベルを上げてください (P.17)。
	●ストレッчフィットシートが正しくお肌にあたっていません。正しく貼り付けてください (P.15)。
	●電池残量が少なくなっています。充電してください (P.13-14)。
	●お肌が乾燥しています。手持ちの化粧水やゲルなどを塗って、お肌を湿らせてください。
EMSが強い (ピリピリする・痛い)	●電源オフ/ダウンボタンでレベルを下げてください (P.17)。
	●お肌が乾燥しています。手持ちの化粧水やゲルなどを塗って、お肌を湿らせてください。
左右のEMSに 差を感じる	●ストレッчフィットシートのコントローラー取り付け位置の汚れをふき取ってください (P.19)。
	●ストレッчフィットシートが正しくお肌にあたっていません。正しく貼り付けてください (P.15)。
	●化粧品の量が足りていません。一度ストレッчフィットシートをはがし、お肌に化粧品を足してください。
	●左右それぞれのレベルを調整してください。
	●左右の開始タイミングがずれると刺激の強弱に時間差が生じます。
	●電池残量が少なくなっています。充電してください (P.13-14)。
	●お肌の状態や筋肉の付き方は左右で異なるため、同じ体感が得られるとは限りません。 ストレッчフィットシートの装着位置を調整して筋肉に刺激のある位置を確認してください。

こんな症状	考えられる原因と対処法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源オン/アップボタンを1秒以上押してください（P.16）。 ●電池残量がありません。充電してください（P.13-14）。
充電しても 数分しか使えない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源をオンにしてから約10分後に、自動で電源がオフになります。 ●電池残量が少なくなっています。充電してください（P.13-14）。 ●電池の寿命です。販売店またはヤーマンコールセンター（P.29）にご連絡ください。 ●正しく充電できていません。LED表示が白点滅して充電を開始しているか確認してください。
充電が開始されない	<ul style="list-style-type: none"> ●ACアダプター（市販品）をコンセントに差し込んでください（P.13）。 ●充電用USBケーブルを本体に取り付けてください（P.13-14）。 ●コントローラーの充電端子とUSBケーブルの充電端子が汚れている可能性があります。汚れを拭き取ってください。 ●マグネット式充電端子は正しい向きで取り付けてください。逆向きに取り付けると充電が開始されません。 ●リセットしてください。コントローラーの「オン」と「オフ」を同時に押すことで、リセット機能が働きます。 ●連続して充電端子への着脱を繰り返すと一時的に充電が停止することがあります。その際は充電ケーブルを外し、再度ゆっくりと接続してください。 ※充電開始時はランプ点滅まで1秒以上時間がかかる場合があります。
動作中に電子音が 聞こえる	<ul style="list-style-type: none"> ●正常な動作音です。故障ではありません。

こんな症状

考えられる原因と対処法

ストレッチフィットシートが顔に密着しない

- ストレッチフィットシートが汚れています。お手入れしてからご使用ください。（P.19）
お手入れしても粘着力が弱い場合は新しいストレッチフィットシート（別売）に交換してください（P.29）。
- 油分を含むタイプの化粧品を使用した場合は洗顔をし、顔の皮脂を洗い流してください。

ストレッチフィットシートが途中ではがれてしまう

- ストレッチフィットシートを過度に引っ張っている可能性があります。伸ばし過ぎないでください。
- ストレッチフィットシートを繰り返し使用すると粘着力が弱まります。3回程度ご使用されたら新しいストレッチフィットシートをご使用ください。
- ストレッチフィットシートが汚れている可能性があります。お手入れしてください。（P.19）
- 油分を含むタイプの化粧品を使用した場合は洗顔をし、顔の皮脂を洗い流してください。
- 冷蔵庫で冷やして保管してください（目安時間：5時間以上）。冷蔵庫保管でも粘着力が戻らなかった場合は、新しいストレッチフィットシートにお取替えください。

| よくあるご質問

Q 使用時間、使用頻度の目安はありますか？

A 1回10分程度週に2~3回を目安にご使用ください。

※電源をオンにしてから約10分後に、自動で電源がオフになります。

※上記はあくまでも目安です。お肌の状態をみながらご使用ください。

※お肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。

お肌に合わないときはご使用をおやめください。

Q 連続で使用することはできますか？

A 本製品は週2~3回、1日1回を目安に、10分間の使用をおすすめします（1日最大2回まで）。同一部位に連続で使用する場合は、5時間以上間隔をあけてください。

Q お風呂場で使用できますか？

A お手入れのために防水機能を有していますが、ストレッチフィットシートやコントローラーの取り付け部のマグネットへ、水、シャンプーや入浴剤が付着した状態で使用すると、故障および体感不良に繋がる可能性があるため浴室や浴槽での使用はできません。

Q 睡眠中に使用できますか？

A 睡眠中は使用しないでください。

Q 顔の左右で刺激が異なります

A お肌の状態や筋肉の付き方は左右で異なるため、同じ体感が得られるとは限りません。

ストレッチフィットシートの装着位置を調整して筋肉に刺激のある位置を確認してください。

Q お肌に発疹、炎症、かゆみが出たのですが

A EMSの刺激またはストレッチフィットシートの粘着によるもの可能性があります。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

Q 違和感や疲労感があるのですが

A EMSの刺激によるものです。顔に違和感が無くなるまでしばらく使用を控えてください。

Q 歯が痛くなるのですが

A 歯の治療中や銀歯がある場合は歯が痛くなる場合があります。

- 慣れるまでは少し歯に響く体感がある場合があります。その場合はレベル1でご使用ください。
- レベル1で使用しても、我慢できない痛み等が発生する場合は、使用の中止や、医師にご相談ください。

Q 日焼け直後、剃毛した直後に使用できますか？

A 炎症の原因になる場合があります。お肌にトラブルが起こった場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

Q お肌に赤みが出たのですが

A ストレッチフィットシートの粘着により一時的に赤みが出ることがあります。翌日まで続く場合は医師にご相談ください。

Q お顔にストレッチフィットシートの跡が残るのですが

A お肌の状態によっては取り付け位置付近に跡が残ることがあります、時間が経つと消えますのでご安心ください。

Q ストレッチフィットシートは繰り返し使えますか？

A 3回程度使用可能です。使用後は透明な保護シート（長方形）に貼り付けて保管してください。それ以上は粘着力の低下やストレッチフィットシートが破けてしまう可能性がありますので、新しいものをお使いください。

Q 乾いたお肌の上から使用できますか？

A 乾いたお肌の上からもご使用可能ですが、スキンケア化粧品でお肌を整えた後にご使用を推奨します。

Q 目もとシートと口もとシートは同時に使用できますか？

A 同時使用は可能です。
但し、お肌の状態によって刺激の感じ方も変わりますので、目もと（レベル1～3推奨）、口もと（レベル4～6推奨）から、都度ご自身で体感にあわせてお好みのレベルにてご使用ください。

※同一部位で連続使用する場合は、5時間以上間隔をあけてください。
上記はあくまでも目安です。お肌の状態を見ながらご使用ください。

製品仕様

定 格 電 源	DC5V 0.5A
消 費 電 力	最大約1W(充電時)
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約2時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
動 作 時 間	約5時間(満充電の状態から) ※使用環境やEMSレベルによって、動作時間は前後します。
防 水 機 能	JIS保護等級 IPX5
外 形 尺 法	約W23xH41xD13 (mm)
製 品 質 量	約11g (1個分)
材 質	PC・PET樹脂
製 造 国	中国製
付 属 品	充電用USBケーブル(マグネット式) 1本 取扱説明書(保証書付)
推奨環境温度	10°C~35°C

■ アフターサービス

充電池について

- 充電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.29)にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

内蔵電池の取出方法

この製品に使用しておりますリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。



- 電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
- 電池を取る前には必ず電源をオフにし、充電用USBケーブルを外してください。
- 電池を取り出す際はドライバーを使用し、お怪我が無いように十分に注意しながら取り出してください。
- 電池を取り出す際は固いもの等で電池を傷つけないようにご注意ください。※発熱、発火の原因となります。
- 取り外した電池は自治体の分別ルール(廃棄やリサイクル方法)に従って処理してください。

操作 STEP

下図①～④を参考し、電池を取り出してください。


※コントローラーは2台とも同じ要領で取り出してください。




この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。

お客様ご自身で分解・修理した場合、故障の原因となりますのでご注意ください。


- ① 本体裏のネジ4カ所のゴム栓とネジを外し、本体のフタを取り外す。

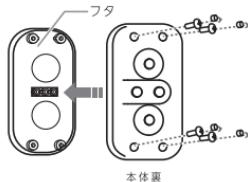


- ② 基板を留めているネジを2カ所外す。

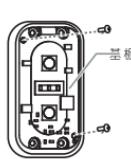

- ③ 基板を裏返し、赤黒2本のケーブルを1本ずつ切断して、電池を取り外す。

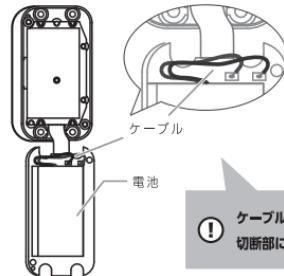

- ④ 切断したケーブル同士が接触しないよう、セロテープなどで挟んで固定する。

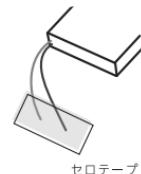

日本国内からのお問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

 **0120-776-282** (通話料無料)

受付 9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっています。

携帯電話

 **0570-550-637** (通話料有料)

日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。

別売品

ストレッチフィットシート（目もと）

品番：左右1セット：YJMZ0M2
左右3セット：YJMZ0M1

ストレッチフィットシート（口もと）

品番：左右1セット：YJMZ1M2
左右3セット：YJMZ1M1

ヤーマンコールセンター（上記）にお問い合わせ、または
ヤーマンオンラインストア（www.ya-man.com）にて
ご購入ください。

※予告なく販売を終了する場合があります。

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.29）にご相談ください。
- 弊社製品保証約款に照らしお客様の言動がカスタマーハラスメント行為に該当すると判断した場合は、保証対応をお断り、または中止させていただくことがあります。

無料修理規定

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
 - 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
 - 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
 - 使用上の誤り
 - お買い上げ後の輸送、転倒、落下
 - 弊社以外の第三者による修理・改造
 - 高温・多湿等の温度・湿度の使用環境
 - 接続する他の機器の異常
 - (家庭用製品の業務用使用等)想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用
 - (説明書等で指定がある場合)指定方法以外での給電
 - 非純正部品の使用
 - 車両・船舶への搭載
 - 海外でのご使用

- 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
- 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
- 改造・分解の形跡がある場合
- 説明書、注意書等で弊社から案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法(レンタル行為を含みます)でご使用された場合
- 保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
- 弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品(オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合
- 製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
- その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でないと弊社が判断した場合

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)

および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

No. _____

保証書

持込修理

品名	ウェアラブル美顔器	型番	YJMD1
形名	デザインリフト モア		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体(コントローラー)のみ	お買い上げ日から 1年間	
店名・住所・電話			
※販売者名	<p>ご購入日の ご購入時の明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管して下さい。</p> <p style="text-align: center;">見本</p>		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など(通話料無料)

0120-776-282

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

携帯電話(通話料有料)

0570-550-637



www.ya-man.com