

YAMAN

TOKYO JAPAN

取扱説明書

ウェアラブル美顔器
フィンガーリフタッチ
YJMD2

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


- ご使用前に「安全上のご注意」(P.3～11)を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みにになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

使いかたの流れ

1

コントローラー をセットする

電源オン/アップ
ボタンを上にして
コントローラーを
フィンガーグローブに
はめ込んでください。

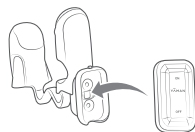

2

装着する


フィンガーグローブを
指に装着して
ください。



3

電源を オンにする


電源オン/アップ
ボタンを1秒以上
押してください。

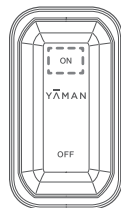

4

EMSレベルを 選ぶ

電源オン/アップ
ボタンを短押しで
レベルが上がり、
電源オフ/ダウン
ボタンを短押しで
レベル下がります。

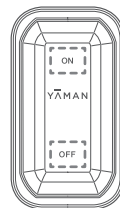

5

終了する

約10分後に、
自動で電源が
オフになります。

もくじ

安全上のご注意 ————— p 3

各部のなまえとはたらき ——— p 12

お使いになる前に ————— p 14

使いかた ————— p 17

使い終わったら ————— p 22

お知らせ ————— p 24

●故障かな?と思ったら ——— p 24

●よくあるご質問 ————— p 26

●製品仕様 ————— p 28

アフターサービス ————— p 29

動画で確認する

- 使いかたを動画で確認することもできます。下記のQRコードを読み込んでください。



■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

⚠ 危険 (ご使用、保管に関して)

- 次に該当する人は使用しない。
医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。
- ◆ 医用電気機器を使用している人
 - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心肺など生命維持用医用電気機器 ・心電計などの装着型医用電気機器



⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 次のような人は使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
 - ・心臓疾患、障害及びその疑いのある人 ・幼児や自分で意思表示できない人 ・温度や刺激の感覚が自覚できない人 ・自己免疫疾患のある人
 次の人はご使用前に医師にご相談ください。
 - ・急性疾患の人 ・感染症疾患の人 ・悪性腫瘍のある人 ・有熱性疾患の人 ・高血圧の人や血液疾患のある人
 - ・発熱している人 ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人 ・神経障害のある人
 - ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人 ・通院して薬を服用中の人
 - ・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人
- 次のような場合や部位には使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
 - ・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合 ・酒気帯びの場合 ・頭部 ・口内や陰部、粘膜など ・眼球 ・まぶた(眼窩)
 - ・のど ・膨らんだホクロ ・ウイルス性のイボ ・骨折をしている部位
 - ・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位
 ※施術後2週間のご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。
(施術例: ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)
 - ・外科手術(形成、整形、美容)等で体内に金属を埋め込んだ部位
- 業務用等、過剰な連続使用をしない。
- コントローラーを水の中に入れない。
けが・故障の原因となります。



警告（ご使用、保管に関して）

- 子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。また、子供に遊ばせない。事故・けがの原因となります。

- 子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。自分で意思表示ができない人に使わせない。子供は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。事故・けがの原因となります。



- 不安定な場所に置かない。本体を落としたり、ぶつけたりしない。重いものを置かない。けが・故障の原因となります。



- 皮膚が薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。



- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。けが・故障の原因となります。



- 異臭・異常発熱したときは使用しない。そのまま使用すると破損や発火の原因となります。



- 分解や修理・改造はしない。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



⚠ 注意 (ご使用、保管に関して)

- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。
他の電気製品(電気毛布・敷布・こたつ等)との同時使用はしない。

誤動作による事故のおそれがあります。

- 他の電気製品(美容機器等)と併用しない。
肌トラブル・誤動作の原因となります。

- 使用前に本体の割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は、使用しない。

お肌の傷などのトラブルや、症状悪化の原因となります。

- コントローラー、フィンガーグローブの接続端子部に、金属の板などを近づけないでください。

部品が外れ、機能が損なわれるおそれがあります。



禁止

- 次のような場所で機器を使用・保管・充電しない。

- ・ 浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近く
(浴室や浴槽での使用は可。)

※浴室や浴槽で使用するときは必ず

水滴ガードをコントローラーに装着してください。

※使用するときは、水中にしずめたり、流水を3分以上あて続けしないでください。

- ・ ほこりの多い場所
- ・ 直射日光の当たる場所や屋外
- ・ 傾斜、振動、衝撃のある場所
- ・ 強い電波や磁気が発生する場所
- ・ 引火性のもの(アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど)の近く
- ・ 油煙、湯気の当たる場所
- ・ 発熱器具(ストーブ等)の近くなど高温になる場所
- ・ 温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)

火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。



禁止

注意（ご使用、保管に関して）

- オーバーケアをしない。
使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。
身体に危害を与えるおそれがあります。
- 強く押しあてず、一箇所に集中して使用しない。
必要以上に強く押し付けたり一箇所に集中して使用するとお肌を傷める原因となります。
- 車両運転中に使用しない。
事故やけがの原因となります。



禁止

- お肌がピリピリした痛みを感じた場合は、EMSレベル（強さ）を下げる。
そのまま使用すると、お肌を傷める原因となります。
- お肌と電極の間に化粧水などで十分に水分があるようにする。
水分が少ないとEMSの伝達が悪くなり、効果の低下や肌トラブルの原因となります。



必ず守る

- 以下の項目は必ず守る。
 - ・設定時間以上の使用は避ける
 - ・ピーリングケアとの併用は控える事故・けが・本体が故障する原因となります。
- 同一部位には推奨時間以上の使用は避ける。
再度同一部位に使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。過度なご使用はお肌を傷める可能性があります。あくまで目安ですので、お肌の状態をみながらご使用ください。
- 下記の使用限度を守って使用する。
1回全顔 10分間の使用で週2～3回、1日1回程度を目安にご使用ください。
同一箇所へ2分以上連続で押しあてないでください。
また、首への使用時は10秒以上連続で押しあてないでください。過度な使用は、お肌を傷める原因となります。



必ず守る

⚠ 注意 (ご使用、保管に関して)

- 目の周りへの使用時、コンタクトレンズの擦れを感じたら使用を中止するか、コンタクトレンズを外して使用する。

- 使用環境温度を守る。

使用できる環境温度は10～35℃です。使用する場所の室温を確認してください。場所を変えた直後は、室温に対応しないことがあります。故障・破損の原因となります。

- 歯の治療中の人(インプラント・矯正・銀歯等)、歯に詰め物がある人は、レベルを調節して使用する。EMSの刺激により歯に違和感を覚えることがあります。

- 充電が終わったときは充電用USBケーブルを抜く。火災・事故のおそれがあります。

- 使用後は必ず本体、フィンガーグローブの水分をふき取る。
また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。
本体がぬれたままの状態で放置すると、故障の原因となります。



必ず守る

- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。

使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。

お肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずEMSレベル(強さ)をレベル1にしてから使用する。事故・けがの原因となります。必ずお肌の様子を見ながらご使用ください。



必ず守る

- シャワーや蛇口から出る強い水圧を当てたり、水中に沈めたりしない。
本体は防滴仕様です。(IPX5)、シャワーや水道の蛇口から出る強い水圧や水中には対応していませんので、故意に水をかけないでください。故障の原因となります。

※浴室や浴槽で使用するときは必ず水滴ガードをコントローラーに装着してください。

警告（電源に関して）

- 充電用USBケーブルを破損・加工する、束ねるなど無理に力を加えない。また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。

火災・感電の原因となります。



- 充電用USBケーブルを引っ張ってコントローラーを移動したり、持ち上げたりしない。

感電・ショート・発火・断線の原因となります。



- 充電用USBケーブルが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



- 充電用USBケーブルを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



- 使用しないとき、お手入れするときは必ず電源をオフにする。使用しないときは、コントローラーとコンセントからACアダプター（市販品）と充電用USBケーブルを抜く。また、濡れた手で抜き差しはしない。



- 充電用USBケーブルを抜くときは、必ず先端のプラグを持って引き抜く（金属部に触れないようにする）。また、濡れた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火の原因となります。

⚠ 警告 (電源に関して)

- 火中投入・加熱・高温・高圧での充電・使用・保管をしない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。
発熱・発火・破裂の原因となります。



発火注意

- ACアダプター(市販品)および充電用USBケーブルは根元まで確実に差し込む。海外での使用の際は、必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用する。

火災・感電・故障の原因となります。

- 万一、異常が発生したら、電源をすぐに切る。

動作不良・発煙・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。

- 専用の充電用USBケーブル以外は使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。



必ず守る

- コンセントや配線器具の定格容量を超えて配線(タコ足配線)しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- 充電端子に化粧品や水滴が付着していないことを確認してから充電する。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

※付属の充電用USBケーブルは充電専用です。



必ず守る

警告（海外でのご使用について）

- 必ず直流5VのUSB電源で使用する。
（保証は国内のみ）

火災・感電の原因となります。



必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用
すること。

発熱・発火・故障の原因となります。



発火注意

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。
必ずご確認のうえご使用ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

英語・中国語でも安全上の注意を確認することができます。

You can also check safety precautions in English from the QR code below.

您可以扫二维码了解更多“安全注意”信息。

English



[https://www.ya-man.co.jp/
support/caution/en/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/en/)

中文



[https://www.ya-man.co.jp/
support/caution/cn/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/cn/)


TO ACCESS SCAN WITH
YOUR CAMERA PHONE

■ 各部のなまえとはたらき


本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

本体(コントローラー)

● 正面

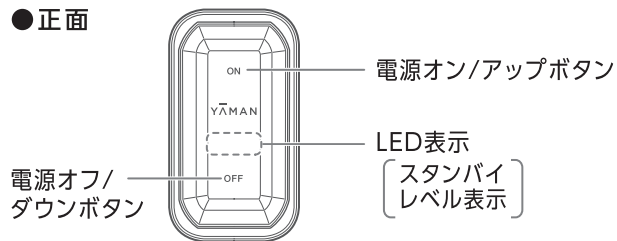


● 背面

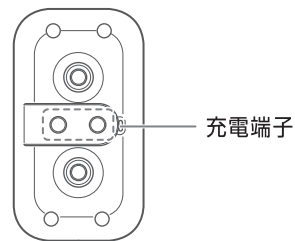


本体(フィンガーグローブ)

※2つの電極面をつないでいる箇所は、強く引っ張ったり、無理に伸ばしたりしないでください。

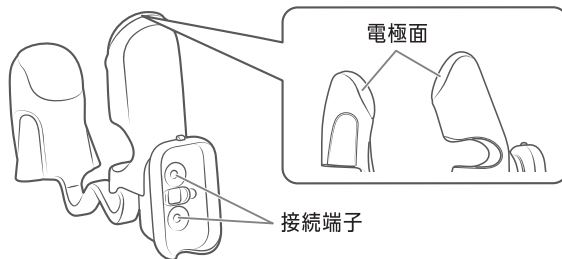

付属品

- 充電用USBケーブル（マグネット式）
※本製品以外では使用しないでください。
- 水滴ガード

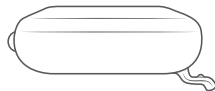

はたらき

オートオフ機能

電源をオンにしてから約10分が経過すると、自動で電源がオフになります。

防水機能



本製品はIPX5（JIS 防水保護等級）の防滴仕様です。

※完全防水仕様ではありません。水中にせずめたり、流水を3分以上あて続けしないでください。


※充電用USBケーブルは防水ではありません。

■ お使いになる前に

充電する

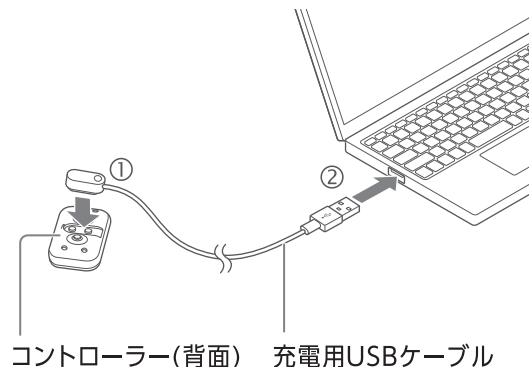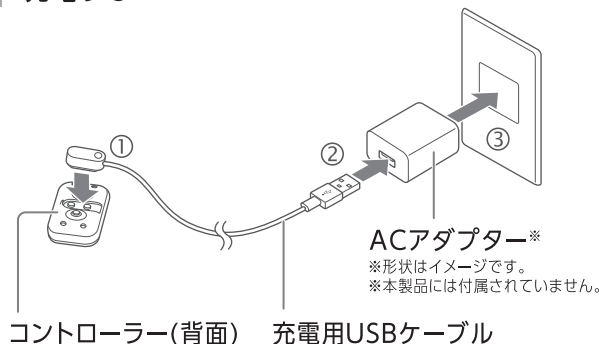

- 連続して充電端子への着脱を繰り返すと一時的に充電が停止することがあります。その際は充電ケーブルをはずし、再度ゆっくりと接続してください。
※充電開始時はランプ点滅まで1秒以上時間がかかる場合があります。
- ACアダプターは市販のものをご使用ください。

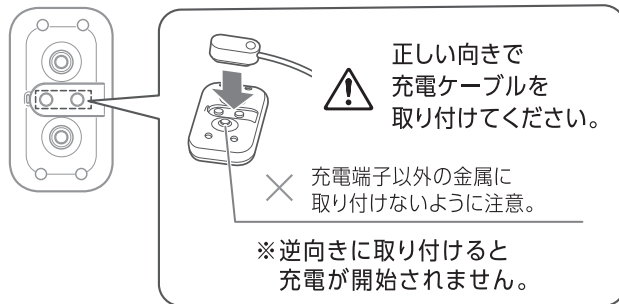


充電中	コントローラーのLED表示が下記のように点灯、点滅します。 残量:少 満充電
充電完了時	白ランプがすべて点灯後、消灯。 充電用USBケーブルを外してください。
充電時間	約2時間（室温約25℃）
動作時間	約5時間

※ 電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。

- 購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してからご使用ください。
- 初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してからご使用ください。

注意

- コントローラーと充電端子に水滴や汚れなどがついている場合は、しっかり拭き取ってください。水滴や汚れなどが残ったまま充電すると、故障の原因となります。

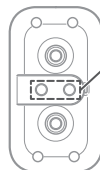

充電端子



水滴や汚れの付着 注意!
必ず充電端子の水気を拭き取る

お肌へのプレテスト

※初めてご使用になるときは、必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

1 腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどで拭き取る

2 洗ったところに化粧品を塗り、電源をオンにして電極面をあて、約2分間使用する (P.17)

必ず、レベル1でテストを行ってください。

3 お肌に異常がないことを確認する

24時間後にお肌に赤みやほてりを感じなければ、本製品をご使用ください。



■ 使いかた

準備

メイクを落とし、化粧品で十分に保湿してからご使用ください。

お手持ちの化粧品を使用する場合は、とろみのある化粧水や美容液をご使用ください。


オイルやスクラブなど刺激の強い化粧品や温感効果のある化粧品、脂肪燃焼成分を含む化粧品は使用しないでください。

製品が故障したり、肌トラブルの原因となります。

※お肌が乾いた状態では使用しないでください。

※お肌に異常がある場合には使用しないでください。

1 コントローラーをフィンガーグローブにはめ込み、図のように指に装着する

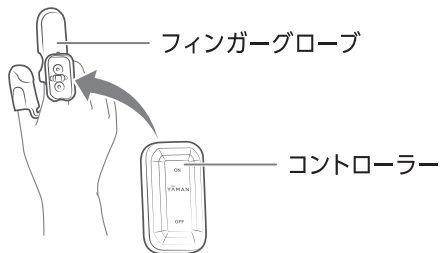

コントローラーの電源オン/アップボタンを上にして
フィンガーグローブにはめ込んでください。

その後、親指+人差し指または中指のどちらか使いやすい方に
フィンガーグローブを装着してください。

※コントローラーを上下反対にはめ込むと、磁石が反発してしっかり
装着することができません。無理にはめ込まないようにしてください。


※浴室や浴槽で使用するときは必ず**水滴ガード**を装着し、水中にしずめたり、
流水を3分以上あて続けしないでください。

- 浴室や浴槽で使用するときは下記の図の様に必ず水滴ガードを装着してください。

水滴ガード




つまみが手元側に来る
向きで正しく装着して
ください

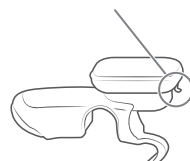

※浴室や浴槽で使用するときは、水中にしずめたり、
流水を3分以上あて続けしないでください。

2 電源をオンにする

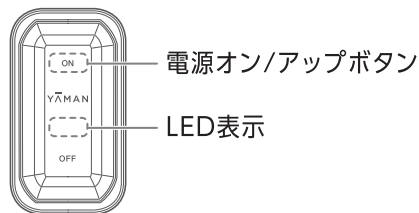


コントローラーの電源オン/アップボタンを1秒以上押して電源を入れます。
スタンバイ表示になっていることを確認してください。

- スタンバイ表示のときは、3つのLED表示が点滅しています。
- スタンバイ時はEMSレベル（強さ）は「レベル0（出力なし）」に設定されています（P.19）。
- 電源オン時に中央のLEDが点滅した場合、充電残量が少なくなっています。

	LED表示	対処法
中央のLED表示が2回点滅	○ ☀ ○	充電残量が少なくなっています。次回使用前に充電してください。
中央のLED表示が5回点滅	○ ☀ ○	充電残量がかなり少なくなっています。充電してください。

3 お好みのレベル（強さ）を選ぶ

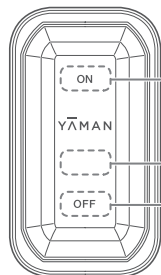

電源オン/アップボタン

LED表示

電源オフ/ダウンボタン

コントローラーの電源オン/アップボタンまたは電源オフ/ダウンボタンを短押ししてレベルを設定します。

初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ず「レベル1」に設定してご使用ください。お肌に異常を感じたらすぐに中止してください。

- 電源オン/アップボタンを短押しするとレベルが上がります。レベルを下げるには電源オフ/ダウンボタンを短押ししてください。
- レベル（強さ）は6段階で調節できます。
- 動作中に電子音が聞こえることがありますが、異常ではありません。



	LED表示
スタンバイ	☀ ☀ ☀
レベル 1	☀ ○ ○
レベル 2	● ○ ○
レベル 3	● ☀ ○
レベル 4	● ● ○
レベル 5	● ● ☀
レベル 6	● ● ●

☀ 点滅
● 点灯
○ 消灯

ポイント

- EMSを感じない、EMSの体感に左右差がある場合は「故障かな?と思ったら」(P.24)を参照してください。

注意

- 初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ず「レベル1」に設定してご使用ください。
- 取り付け時に過度な力を加えないでください。コントローラーの破損の原因となります。
- ビリビリとした痛みを感じるほど、EMSレベル（強さ）を上げないでください。

4 お肌にあてる

フィンガーグローブの電極面をお肌に軽くあてます。
各部位へのあてかたは、「各部位へのおすすめのあてかた」
(P.21) をご参照ください。

- ・1回全顔10分間の使用で週2～3回、1日1回程度を目安にご使用ください。

同一箇所へ2分以上連続で押しあてないでください。

また、首への使用時は10秒以上連続で押しあてないでください。

※上記はあくまでも目安です。お肌の状態をみながらご使用ください。

※お肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。

お肌に合わないときはご使用をおやめください。

※お肌に強く押しあてないでください。



使用できない部位

5 終了する

電源をオンにしてから約10分後に、自動で電源が
オフになります。

各部位へのおすすめのあてかた


以下のように電極をあてると効果的です。

同一箇所へ2分以上連続で押しあてないでください。


●ほほ




●目の周り

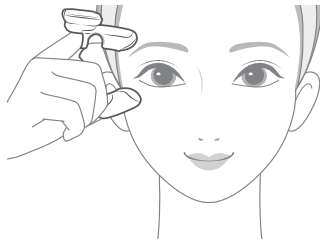

●鼻筋

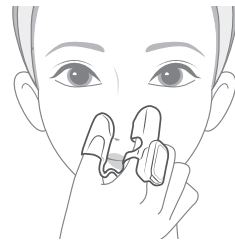


●首・肩

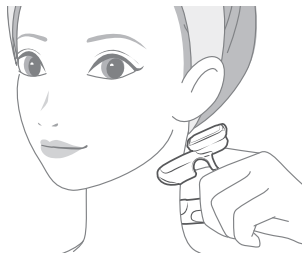

⚠ 首すじや皮膚が薄い部位への使用にご注意ください。

首すじや皮膚が薄い部位を強く圧迫したり、刺激が強すぎると、疲労や気分に影響が出る場合があります。以下を注意し、体調をみながら無理なくご使用ください。

- ・強く押しあてず、一箇所に集中して使用しない。
- ・首すじや皮膚の薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。
- ・途中で気分が悪くなったり、お肌に異常があらわれた場合は、直ちに使用を中止する。

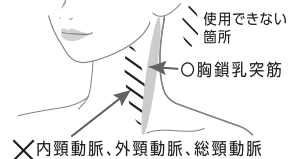

※首の後ろ・うなじ・肩にもご使用いただけます。

※のどを挟んでの使用はしないでください。

※首への使用時は10秒以上連続で押しあてないでください。

※片側で1日最大2分までとしてください。

■ 使い終わったら


■ お手入れのしかた（コントローラー、フィンガーグローブ、水滴ガード）

使用後は清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。

1 弱めの流水で洗い流す（特にコントローラー裏側の充電端子部分）

水滴ガードは本体から外した状態で水洗いする。


※コントローラー、フィンガーグローブは完全防水仕様ではありません。水中にしずめたり、流水を3分以上あて続けしないでください。

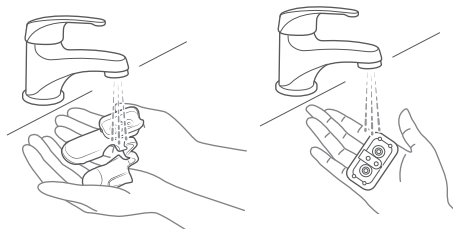

2 乾いた柔らかい布等で水分を拭き取る

※コントローラーの充電/接続端子部、フィンガーグローブの接続端子部や電極面に、水滴や汚れなどがついている場合は、しっかりと拭き取ってください。故障の原因となります。

- お手入れ後は風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 化粧品などが付着した状態で放置しないでください。

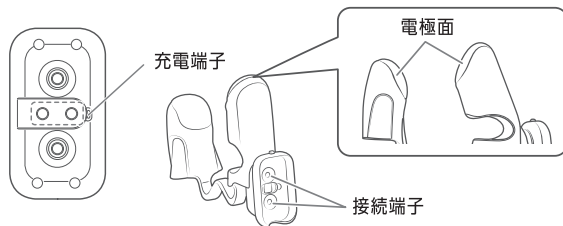

注意

- お手入れの際は、必ず電源をオフにしてください。感電・ショート・発火の原因となります。
- アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。



保管のしかた

- お子様の手の届かない場所、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、コントローラーとコンセントからACアダプター(市販品)と充電用USBケーブルを抜いて保管してください。
- 高温多湿の場所(火のそばや炎天下、浴室など)に放置しないでください。

保守・点検について

- 長期間使用していなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してからご使用ください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.24)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.31)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

■ お知らせ

故障かな？と思ったら 本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状

考えられる原因と対処法

EMSが弱い (感じない)

- 電源オン/アップボタンでレベルを上げてください (P.19)。
- 2つの電極面が正しくお肌にあたっていません。2つの電極面がお肌に触れているかご確認ください(P.21)。
- 電池残量が少なくなっています。充電してください (P.14-15)。
- お肌が乾燥しています。手持ちの化粧水やゲルなどを塗って、お肌を湿らせてください。
- フィンガーグローブの接続端子の汚れをふき取ってください (P.12)。
- 化粧品の量が足りていません。お肌に化粧品を足してください。
- お肌の状態や筋肉の付き方は左右で異なるため、同じ体感が得られるとは限りません。筋肉に刺激のある位置を確認してください。

EMSが強い (ピリピリする・痛い)

- 電源オフ/ダウンボタンでレベルを下げてください (P.19)。
- お肌が乾燥しています。手持ちの化粧水やゲルなどを塗って、お肌を湿らせてください。

電源が入らない

- 電源オン/アップボタンを1秒以上押してください (P.18)。
- 電池残量がありません。充電してください (P.14-15)。

こんな症状

考えられる原因と対処法

充電しても 数分しか使えない

- 電源をオンにしてから約10分後に、自動で電源がオフになります。
- 電池残量が少なくなっています。充電してください（P.14-15）。
- 電池の寿命です。販売店またはヤーマンコールセンター（P.31）にご連絡ください。
- 正しく充電できていません。LED表示が白点滅して充電を開始しているか確認してください（P.15）。

充電が開始されない

- ACアダプター（市販品）をコンセントに差し込んでください（P.14）。
- 充電用USBケーブルをコントローラーに取り付けてください（P.14-15）。
- コントローラーの充電端子とUSBケーブルの充電端子が汚れている可能性があります。汚れを拭き取ってください（P.15）。
- マグネット式充電端子は正しい向きで取り付けてください。逆向きに取り付けると充電が開始されません（P.14）。
- リセットしてください。コントローラーの「オン」と「オフ」を同時に押すことで、リセット機能が働きます。
- 連続して充電端子への着脱を繰り返すと一時的に充電が停止することがあります。その際は充電ケーブルを外し、再度ゆっくりと接続してください（P.14）。
※充電開始時はランプ点滅まで1秒以上時間がかかる場合があります。

動作中に電子音が 聞こえる

- 正常な動作音です。故障ではありません。

よくあるご質問

Q 使用時間、使用頻度の目安はありますか？

A 1回全額10分間の使用で週2～3回、1日1回程度を目安にご使用ください。
同一箇所へ2分以上連続で押しあてないでください。
また、首への使用時は10秒以上連続で押しあてないでください。
※電源をオンにしてから約10分後に、自動で電源がオフになります。
※上記はあくまでも目安です。お肌の状態をみながらご使用ください。
※お肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。
お肌に合わないときはご使用をおやめください。

Q お風呂場で使用できますか？

A 浴室や浴槽で使用いただけますが、水中にしずめたり、流水を3分以上あて続けしないでください。**浴室や浴槽で使用するときは必ず水滴ガードをコントロールに装着してください(P.17)**。また、浴室で充電はしないでください。

Q 違和感や疲労感があるのですが

A EMSの刺激によるものです。顔に違和感が無くなるまでしばらく使用を控えてください。

Q 歯が痛くなるのですが

A 歯の治療中や銀歯がある場合は歯が痛くなる場合があります。
●慣れるまでは少し歯に響く体感があります。その場合はレベル1でご使用ください。
●レベル1で使用しても、我慢できない痛み等が発生する場合は、使用の中止や、医師にご相談ください。

Q 日焼け直後、剃毛した直後に使用できますか？

A 炎症の原因になる場合があります。お肌にトラブルが起こった場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

Q 乾いたお肌に使用できますか？

A お肌が乾いた状態では、EMSの刺激を感じにくくなる場合があります。EMSが弱いと感じる場合は、お肌を化粧水、ローション、ゲル、水などで湿らせてご使用ください。

Q メイクの上から使用できますか？

A ファンデーションによりお肌が黒く汚れるおそれがあるため、メイクを落としてからご使用ください。

Q 部位によって同じEMSのレベルでも刺激の感じ方が違うことがありますか？

A EMSは筋肉を刺激する機能のため、部位によっては刺激を感じにくい場合があります。

Q フィンガーグローブは力を入れて当てたほうがよいですか？

A 力を入れすぎるとお肌を傷める原因となります。特に顔へのご使用は力を入れずに優しくあててください。ご自身が心地よく感じる強さで動かしてください。

Q 身体にも使用できますか？

A 本製品は顔、首、肩への使用を想定しております。それ以外の部位へのご使用はお控えください。

製品仕様

定 格 電 源	DC5V 0.5A
消 費 電 力	最大約0.5W(充電時)
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約2時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
動 作 時 間	約5時間(満充電の状態から) ※使用環境やEMSレベルによって、動作時間は前後します。
防 水 機 能	JIS保護等級 IPX5
外 形 寸 法	フィンガーグローブ:約W92×H103×D38(mm) コントローラー:約W23×H41×D13(mm) 水滴ガード:約W31×H55×D22(mm)
製 品 質 量	フィンガーグローブ:約75 g コントローラー:約11 g 水滴ガード:約3 g
材 質	フィンガーグローブ:シリコーンゴム、ステンレス、PC樹脂 コントローラー:PC、PET樹脂 水滴ガード:シリコーンゴム
製 造 国	中国製
付 属 品	水滴ガード…………… 1個 充電用USBケーブル(マグネット式)…… 1本 取扱説明書(保証書付)
推奨環境温度	10℃～35℃

■ アフターサービス

| おすすめ化粧品について

- 製品詳細・お買い求めはヤーマンコールセンター（P.31）にお問い合わせください。
※予告なく販売を終了する場合があります。

フローレスセラム ハイドレイティング



内容量：80g
品 番：CS21004
価 格：¥3,300（税込）

充電電池について

- 充電電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.31)にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

内蔵電池の取出方法

この製品に使用しておりますリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

- 電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
- 電池を取る前には必ず電源をオフにし、充電用USBケーブルを外してください。
- 電池を取り出す際はドライバーを使用し、お怪我がないように十分に注意しながら取り出してください。
- 電池を取り出す際は固いもの等で電池を傷つけないようにご注意ください。※発熱、発火の原因となります。
- 取り外した電池は自治体の分別ルール(廃棄やリサイクル方法)に従って処理してください。




操作STEP 下図①～④を参照し、電池を取り出してください。



この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
お客様ご自身で分解・修理した場合、故障の原因となりますのでご注意ください。


- ① コントローラー裏のネジ4カ所のゴム栓とネジを外し、コントローラーのフタを取り外す。

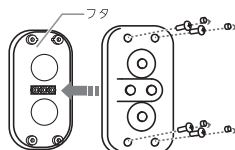


コントローラー裏




- ② 基板を留めているネジを2カ所外す。

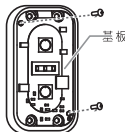

- ③ 基板を裏返し、赤黒2本のケーブルを1本ずつ切断して、電池を取り外す。

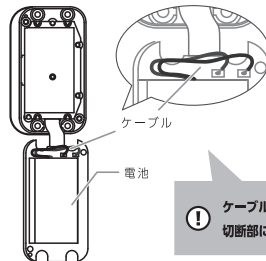

- ④ 切断したケーブル同士が接触しないよう、セロテープなどで挟んで固定する。

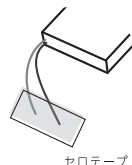

ケーブルは必ず1本ずつ切断し、
切断部に触れないようにしてください。

日本国内からのお問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

 **0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話

 **0570-550-637** (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっております。

日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。

GLOBAL AFTER SERVICE



[https://www.ya-man.co.jp/en/
support/repair/](https://www.ya-man.co.jp/en/support/repair/)

Memo

Memo

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.31）にご相談ください。
- 弊社製品保証約款に照らしお客様の言動がカスタマーハラスメント行為に該当すると判断した場合は、保証対応をお断り、または中止させていただくことがございます。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
 - (ロ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
 - (ハ) 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
 - ① 使用上の誤り
 - ② お買い上げ後の輸送・転倒・落下
 - ③ 弊社以外の第三者による修理・改造
 - ④ 高温・多湿等の温度・湿度の使用環境
 - ⑤ 接続する他の機器の異常
 - ⑥ (家庭用製品の業務用使用等) 想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用
 - ⑦ (説明書等で指定がある場合) 指定方法以外での給電
 - ⑧ 非純正部品の使用
 - ⑨ 車両・船舶への搭載
 - ⑩ 海外での使用
 - (ニ) 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
 - (ホ) 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
 - (ヘ) 改造・分解の形跡がある場合
 - (ト) 説明書、注意書等で弊社から案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法(レンタル行為を含みます)でご使用された場合
 - (チ) 保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
 - (リ) 弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品(オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合
 - (ヌ) 製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
 - (ル) その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でないと弊社が判断した場合
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

No. _____

保証書

持込修理

品名	ウェアラブル美顔器		型番	YJMD2
形名	フィンガーリフタッチ			
無料修理保証	対象部分		期間	
	本体(コントローラー・フィンガーグローブ)のみ		お買い上げ日から 1 年間	
※販売者名	店名・住所・電話			

ご購入のわかる明細書は
または本保証書とあわせて
お送りいたします。

見本

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など(通話料無料)

0120-776-282

携帯電話(通話料有料)

0570-550-637



www.ya-man.com

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※上記期間は目安となりますため、箇所により生産完了から3年以内でも部品在庫が無くなる可能性がございます。

※製造・販売から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様の買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」

(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)

および「ヤーマン製品保証約款」

(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ

(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。