



取扱説明書

家庭用美容器
ブルーグリーンマスク リフト プロ
YJMF4LCP1

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に「安全上のご注意」(P.5～11)を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

使いかたの流れ

1


髪が顔に
かからないよう
にしてから
肌を整える




2

マスクを
装着する

顔にマスクを
装着してください。

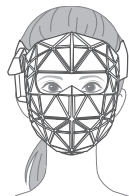

※装着NG例

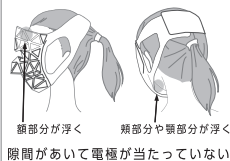

1 マスクを正しく装着するために

① 化粧品の塗布

- 顔全体のメイクを落とし、洗顔後に、顔全体へ化粧品を均一に塗布してください。
- 使用部位（電極が当たる部分）には、目尻のしわやほうれい線などの気になる箇所を中心に、2～3層に重ねて塗布してください。
- または、電極の上に直接塗布することも可能です。

② マスクの装着方法



- あご下から○部分に引き上げるように装着してください。
- マスクと顔に大きな隙間が無いように装着してください。
頬部分や顎部分（●部分）が浮くと咬筋付近の電極が当たりません。



- お顔が小さい方はヘアバンドをしていただくか、髪の結び目で調整してください。



- 口に密着していても問題はありません。


使いかたの流れ

3

電源を オンにする

電源/LEDモードボタンを
約2秒長押ししてください。


電源/LEDモードボタン

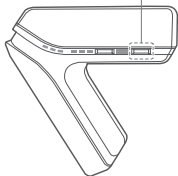

4

LEDモードと EMSレベルを 選ぶ

電源/LEDモードボタン
EMSレベルボタン

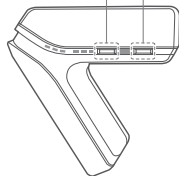

5


終了する

約10分後に、
自動で電源がオフになります。

注意事項


- ご使用後の取り扱いにご注意ください。

ご使用終了後は電極に付いたゲルを拭き取り乾燥させてください。
目に見えない場所に放置しないでください。見えない場所に放置されると
マスクに気が付かず踏みつけてしまい、故障の原因となります。

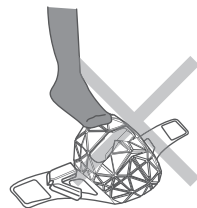


- マスクに過度な力を加えないでください。

踏みつける。
叩きつける。
無理に折り曲げる。
などマスクに過度な外力を加えないでください。
故障の原因となります。

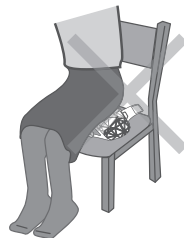

- マスクに負担がかかる置き方をしないでください。

コントローラーが上にくるように、折り曲げた状態で
置いていただくと製品を長くご使用いただけます。

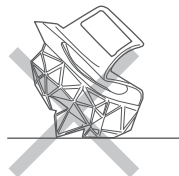

もくじ

安全上のご注意	p5
各部のなまえとはたらき	p12
お使いになる前に	p14
使いかた	p16
使い終わったら	p20

お知らせ	p21
●故障かな?と思ったら	p21
●よくあるご質問	p23
●製品仕様	p25
アフターサービス	p26

■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害^{*}の発生が想定される内容です。

^{*}物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

⚠ 危険 (ご使用に関して)

- 次に該当する人は使用しない。
医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。
- ◆ 医用電気機器を使用している人
 - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心肺など生命維持用医用電気機器 ・心電計などの装着型医用電気機器



禁止

⚠ 警告 (ご使用に関して)

- 次のような人は使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
 - ・心臓疾患、障害及びその疑いのある人 ・幼児や自分で意思表示できない人 ・温度や刺激の感覚が自覚できない人
 - ・自己免疫疾患のある人

次の人はご使用前に医師にご相談ください。

- ・急性疾患の人 ・感染症疾患の人 ・悪性腫瘍のある人 ・有熱性疾患の人 ・高血圧の人や血液疾患のある人
- ・発熱している人 ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人 ・神経障害のある人
- ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人 ・通院して薬を服用中の人
- ・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人

- 次のような場合や部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- ・肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合 ・酒気帯びの場合 ・頭部 ・口内や陰部、粘膜など ・眼球 ・まぶた(眼窩)
- ・膨らんだホクロ ・ウイルス性のイボ ・骨折をしている部位
- ・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位

※施術後2週間のご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。

(施術例: ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)

- ・外科手術(形成、整形、美容)等で体内に金属を埋め込んだ部位

- 業務用等、過剰な連続使用をしない。

- 本体を水の中に入れない。

けが・故障の原因となります。



禁止

警告 (ご使用、保管に関して)

- 取扱説明書に記載されている用途・部位以外には使用しない。
けが・故障の原因となります。



- オーバーケアをしない。
使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。
身体に危害を与えるおそれがあります。
- 使用前に本体の割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は、使用しない。
けが・肌トラブルの原因となります。



- 本体・充電用USBケーブルは子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。また、子供に遊ばせない。
- 子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。
事故・けがの原因となります。



- 次のような場所で機器を使用・保管・充電しない。

- ・浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の
入った他の容器の近く
- ・ほこりの多い場所
- ・直射日光の当たる場所や屋外
- ・傾斜、振動、衝撃のある場所
- ・強い電波や磁気の発生する場所
- ・引火性のもの(アルコール、シンナー、
ベンジン、除光液、スプレーなど)の近く
- ・油煙、湯気の当たる場所
- ・発熱器具(ストーブ等)の近くなど高温に
なる場所
- ・温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器
具のそば)

火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因
となります。

- 通電したまま放置しない。

火災・事故の原因となります。



⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 充電用USBケーブルが破損したら使用しない。
ヤーマンコールセンター(P.26)にお問
い合わせの上、専用電源コードをお使い
ください。

- 暗い部屋で使用しない。また、照射部を
のぞき込んだり直視したりしない。
目を傷める原因となります。

- 強く締めすぎない。
圧迫感や、疲労感、痛みを生じることが
あります。

- 本製品を装着したまま睡眠しない。
けが・肌トラブルの原因となります。



禁止

- 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相
談ください。



分解禁止

- 火中投入・加熱・高温・高圧での充電・
使用・保管をしない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。
発熱・発火・破裂の原因となります。



発火注意

- 使用しないとき・お手入れするときは必ず
電源をオフにし、プラグを抜く。

充電が終わったときは本体(コントロー
ラー部分)から充電用USBケーブルを抜
いてください。

- 充電用USBケーブルを抜くときは、必ず先
端を持って引き抜く(金属部に触れないよ
うにする)。また、濡れた手で抜き差しはし
ない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

充電用USB
ケーブルを抜く

- 使用後および機器のお手入れをするとき
は、必ず電源をオフにし、充電用USBケー
ブルを抜く。
火災・事故のおそれがあります。

警告 (ご使用、保管に関して)

- 地震や雷を感じたら電源をオフにし、充電用USBケーブルを抜く。
火災・感電の原因となります。



充電用USB
ケーブルを抜く

- 機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにして充電用USBケーブルを抜き、必ず修理・点検を依頼する。
- 他の電気製品（美容機器等）と併用しない。
肌トラブル・誤作動の原因となります。
- 使用時には身体から金属類（ネックレス）を外す。
肌トラブルの原因となります。
- 使用環境温度を守る。



必ず守る

使用環境温度は10～40℃です。使用する場所の室温を確認してください。
故障・破損の原因となります。
場所を変えた直後は、室温に対応しないことがあります。

- マスクに過度な力を加えない。

マスクを折り曲げる・強く引っ張る・踏みつける・たたく等過度な力を加えると故障・破損の原因となります。



必ず守る

注意 (ご使用、保管に関して)

- 強く押しあてず、連続して使用しない。
必要以上に強く押し付けたり連続して使用
- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。
他の電気製品（電気毛布・敷布・こたつ等）との同時使用はしない。
誤動作による事故のおそれがあります。
- 車両運転中に使用しない。
事故やけがの原因となります。



禁止

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。自身にあったレベルで使用する。

レベルは少しずつ調節してください。

事故・けがの原因となります。

- 肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。

使用中に痛みや疲労を感じたときや、肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。

肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

- 歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、レベルを下げ、使用部位を調整する。

EMSによりほお・あごに刺激を強く感じたり不快に感じたりすることがあります。強い違和感を覚えた場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

- 同一部位に10分以上の使用は避ける。

再度同一部位に使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。過度なご使用は肌を傷める可能性があります。あくまでも目安ですので、肌の状態を確認しながらご使用ください。



必ず守る

⚠ 警告（電源に関して）

- 必ず直流5VのUSB電源で使用する。コンセントは根元まで確実に差し込む。火災・感電・故障の原因となります。
- 万一、異常が発生したら電源をすぐ切る。
- 専用の充電用USBケーブル以外は使用しない。感電・ショート・発火の原因となります。



必ず守る

警告（電源に関して）

- 充電用USBケーブルが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



傷んだ充電用
USBケーブル
使用禁止

- コンセントや配線器具の定格容量を超えて配線（タコ足配線）しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



タコ足配線
の禁止

- 充電用USBケーブルを破損、加工しない。束ねたりねじったりなど無理に力を加えない。

ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。収納時にはコードのねじれを直してください。



無理な扱い
禁止

警告（海外でのご使用について）

- 必ず直流5VのUSB電源で充電する。
（保証は国内のみ）
火災・感電の原因となります。



必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。

発熱・発火・故障の原因となります。



発火注意

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。
必ずご確認ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

英語でも安全上の注意を確認することができます。

You can also check safety precautions in English from the QR code.

TO ACCESS SCAN
WITH YOUR CAMERA PHONE





[https://www.ya-manu.co.jp/
support/caution/en/](https://www.ya-manu.co.jp/support/caution/en/)


■ 各部のなまえとはたらき

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

本体(マスク部分)

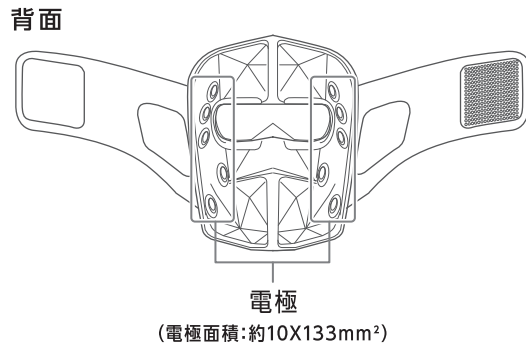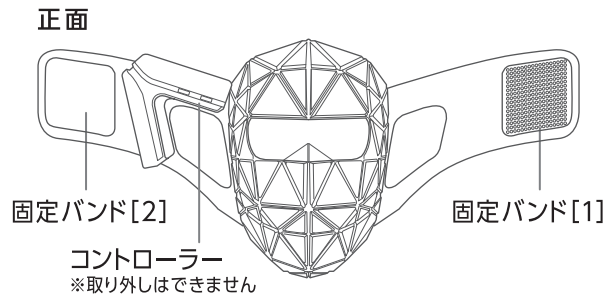


LEDの範囲

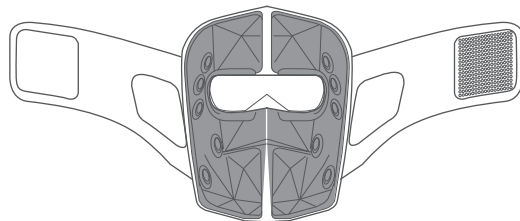

準備

本体（コントローラー部分） ※取り外しはできません

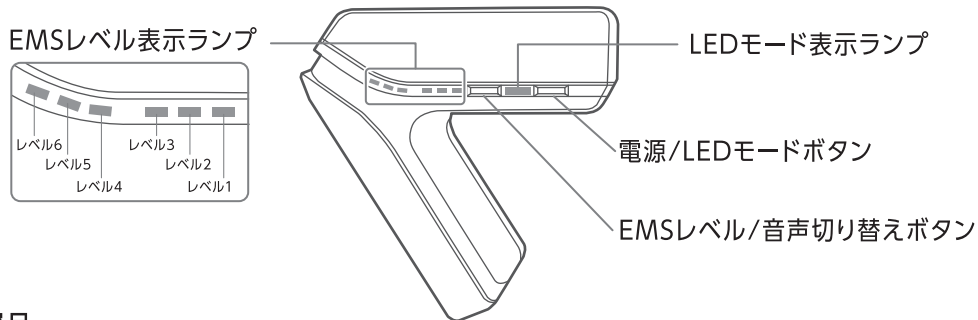

付属品

- 充電用USBケーブル（Type-C）
- 取扱説明書（保証書付）
- 収納巾着

はたらき

オートオフ機能

電源をオンにしてから約10分が経過すると、自動で電源がオフになります。

モード/レベル記憶機能

LEDのモードとEMSのレベルの設定が記憶され、次回電源オン時に同じ設定となります。

音声の切り替え機能


音声の切り替えボタンを5秒間長押しすると音声案内の言語が切り替わります。音声言語は英語／中国語の2種で初期設定は英語となっています。

※音声切り替わる際にはEMSレベルも一度リセットされます。

■ お使いになる前に

充電する

家庭用コンセントを使用する

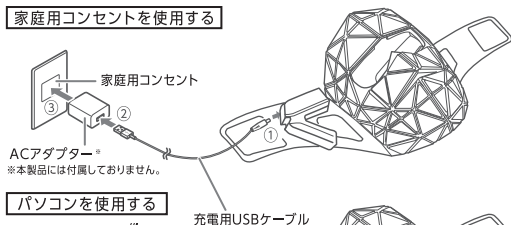

- 購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してからご使用ください。
- 初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。
その場合は、再度充電してからご使用ください。
- 充電用USBケーブルは付属のものをご使用ください。
- ACアダプター（市販品）は記載されている電流値をご確認ください。2Aより低いものでは充電できない可能性があります。

充電中	レベル1～3のEMSレベル表示ランプが順に点灯します。
充電完了時	レベル1～3のEMSレベル表示ランプが5秒間点灯した後に消灯します。
充電時間	約3時間
動作時間	約50分

※ 電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。

● 電池残量の見かた

電源をオンにしてLEDモード表示ランプ→EMSレベル表示ランプのレベル1～6が順に点灯した後のEMSレベル表示ランプのレベル1～3のランプの点滅で電池残量を確認することができます。

電池残量	EMSレベル表示ランプ		
	レベル3	レベル2	レベル1
多 ↑ ↓ 少	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	□	■ ■ ■	■ ■ ■
なし※	□	□	■ ■ ■
	□	□	□

■ = 点滅 □ = 消灯

※ 充電が無くなると『ピッピッピ』とエラー音が鳴ります。LEDモード表示ランプが赤色に3回点滅して電源がオフになります。

注意 ● 長期間使用しなかった場合、再使用する前には、正常に作動するか点検をしてください。事故・故障のおそれがあります。

肌へのプレテスト

本製品や使用する化粧品を初めてご使用になる際は、肌トラブル防止のため必ず肌との相性をプレテストしましょう。


1 ニの腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどで拭き取る

2 洗ったところにお手持ちのジェル（油分を含まないタイプ）を塗り、左右どちらかの下側3か所の電極がニの腕に触れるようにもう片方の手で押さえ、EMSをレベル1に設定して約3分間使用する。

- 使いかたについては、「ケアする」(P.18)を参照してください。

3 ゲルを拭き取り、肌に異常がないことを確認する

- 24時間以内に肌に異常（赤みやほてり）を感じなければ、本製品をご使用ください。

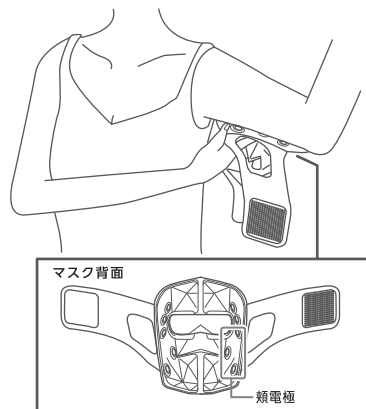

注意

- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
- 肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。肌に合わないときはご使用をおやめください。

■ 使いかた

準備



洗顔と化粧品の塗布

※ 肌が乾いた状態だとEMSを感じにくくなります。

洗顔後、とろみのある濃厚タイプのスキンケア化粧品(美容液・ジェルなど)を適量取り、顔全体に均一に塗布してください。

肌が軽くなる状態になるよう、しっかりなじませてください。

※目尻のしわ、ほうれい線、頬などの部位(電極が当たる部分)には、重ねて

2〜3回塗布するか、電極部分に直接塗布してください。

※肌が乾燥している状態では、EMSの刺激を感じにくくなります。

・お手持ちの化粧品を使用する場合は、とろみのある濃厚タイプ(美容液・ジェルなど)の使用を推奨します。

・使用前に髪をしっかりまとめてください。

・本製品は防水仕様ではありません。

シートマスクとの併用はお控えください。


化粧品と併用する際の注意

注意

- 美容オイルなど油分を多く含む化粧品は使用しないでください。故障や動作不良の原因となる場合があります。
- ファンデーションなどのメイクをしたまま使用しないでください。肌トラブルの原因となるおそれがあります。

装着する

1 マスクを顔に合わせる

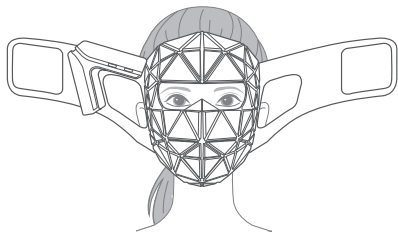

- マスクの顎のラインを先に合わせて、その後目元の位置を合わせるように装着する。
- 髪の毛の挟み込みがないことをご確認ください。

2 マスクがしっかりと固定されていることを、鏡などで確認する



- 固定バンド[1]の上に固定バンド[2]を重ね、マスクが密着するように調整しながら固定してください。
- 固定バンドを強く固定しすぎないようにご注意ください。
- マスクが口に密着していても問題ありません。

ポイント


- マスクが大きい場合は、後頭部で髪を結ぶと、フェイスマスクがより固定しやすくなります。マスクが小さい場合は、バンドを固定しなくても問題ございませんので、手で押さえてご使用ください。

〈EMSオンで使用する場合〉
マスクがフィットせず、浮きがみられる場合もありますが、すべての電極が肌にしっかりと触れていればケア可能です。

〈EMSオフで使用する場合〉
マスクがフィットせず、浮きがみられる場合もありますが、LED面が肌に触れていればケア可能です。

ケアする

1 電源をオンにする

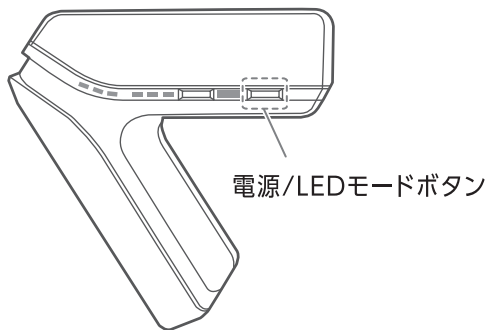

- 電源/LEDモードボタンを長押しすると電源がオンになります。LEDモード表示ランプ⇒EMSレベル表示ランプのレベル1～6が順に点灯した後、EMSレベル表示ランプの1～3が電池残量に応じて3回点滅します (P.14)。

2 LEDのモード(色)を選ぶ




- 電源/モードボタンを短押しすると、LEDケアモードの切り替えが可能です(全4モード)。
- モード構成:ブライティングモード(緑LED)/エイジングケアモード(赤LED)/スムーズモード(黄LED)/オールインワンモード(緑+赤+黄LED)
- モードを切り替えるたびに、音声ガイダンスで現在のモードをお知らせします。

注意

- コントローラーの操作は鏡を見ながら行ってください。
- 10分以上連続しての使用は控えてください。肌トラブルの原因となります。
- ケア中にまぶしいと感じたときは、マスク装着位置やバンドの留め方で調整するか、目を閉じてケアをしてください。目や肌を傷める原因となります。

3 EMSのレベルを選ぶ

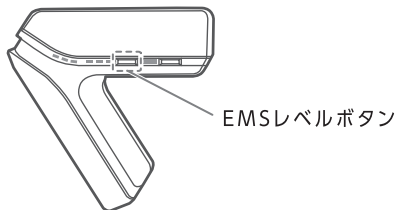


- 電源／レベルボタンを短押しして、お好みのレベルを選択してください（全6レベル）。（レベル0は、EMSが出力されません。）
- 初めて使用する際は、電源／モードボタンを長押しして電源を入ると、起動音が鳴り、EMSはレベル0で開始されます。
- レベルを切り替えるたびに音声ガイダンスが流れ、現在のレベルをお知らせします。（例：レベル3の場合「レベル3」と音声案内）

4 終了する

- 電源をオンにしてから約10分後に、自動で電源がオフになります。
- 途中で終了したいときは、コントローラーの電源／LEDモードボタンを長押ししてください。

※使用後は毎回、「使い終わったら」(P.20)を参照して、製品に付着した皮脂汚れや化粧品などを取り除いてください。そのまま放置した場合、製品の故障や、肌トラブルの原因となります。

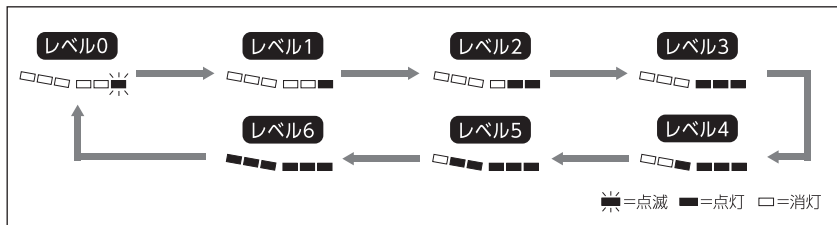

※ボタンを押すごとにレベルが切り替わり、音声でお知らせします。

■ 使い終わったら

| お手入れのしかた

使用後はマスクを清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。


1 水で湿らせて固くしぼった柔らかい布等で汚れを拭き取る

- 汚れ等が落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いてください。
- 皮脂汚れや化粧品などが付着した状態で放置しないでください。

2 風通しの良い場所で乾燥させる

注意

- お手入れの際は、必ず電源をオフにしてください。
感電・ショート・発火の原因となります。
- 水洗いはしないでください。
本製品は防水製品ではありません。
故障の原因となります。
- 拭き取り時にアルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

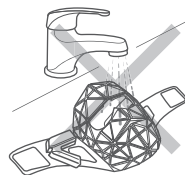

保管のしかた

- お子様の手の届かない場所、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、コントローラーから充電用USBケーブルを抜いて保管してください。
- 高温多湿の場所(火のそばや炎天下、浴室など)に放置しないでください。

保守・点検について

- 長期間使用していなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してからご使用ください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.21～P.22)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.26)までご相談ください。本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

■ お知らせ

故障かな?と思ったら 本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状	考えられる原因と対処法
電源が入らない	● 電源/LEDモードボタンを長押し(約2秒)してください(P.18)。 ● 電池残量がありません。充電してください(P.14)。
充電しても 数分しか使えない	● 電源をオンにしてから約10分後に、自動で電源がオフになります。 ● 電池残量が少なくなっています。充電してください(P.14)。 ● 電池の寿命です。販売店またはヤーマンコールセンター(P.26)にご連絡ください。 ● 正しく充電できていません。充電を開始しているかはEMSレベル表示ランプが点灯・点滅しているかを確認してください。

■ お知らせ

故障かな?と思ったら

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状

考えられる原因と対処法

動作中にLEDモード表示ランプが点滅する	●電池残量が少なくなっています。充電してください(P.14)。
充電が開始されない	●ACアダプター(市販品)や充電用USBケーブルを正しく接続してください(P.14)。
	●ACアダプター(市販品)は記載されている電流値をご確認ください。 2Aより低いものでは充電できない可能性があります。
EMSが強い (ピリピリする・痛い)	●EMSのレベルが高いので、レベルを下げてください。 初めて使うときは必ずレベル1で使用してください。
EMSが弱い (感じない)	●EMSのレベルが低いので、レベルを上げてください。
レベルを変えてもEMS体感が変わらない・ピリピリする・痛い	●肌が乾燥しています。 化粧水またはローション、ジェル、水などを塗って肌を湿らせてください。
部位によってEMSの体感が異なる	●電極の汚れをふき取ってください。
	●電極が正しく肌に当たっていません。マスクを正しく装着してください。
	●電池残量が少なくなっています。充電してください(P.14)。
	●筋肉のつきかたによって感じにくい場所があります。
動作中に電子音が聞こえる	●正常な動作音です。故障ではありません。

よくあるご質問

Q 使用時間、使用頻度の目安はありますか？

A 毎日ご使用いただけます。
ただし、1日1回10分程度を目安にご使用ください。
※電源をオンしてから約10分後に、自動で電源がオフになります。
※上記はあくまでも目安です。肌の状態をみながらご使用ください。
※肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。
肌に合わないときはご使用をおやめください。

Q お風呂場で使用できますか？

A 使用しないでください。本製品は防水製品ではありません。

Q 睡眠中に使用できますか？

A 睡眠中は使用しないでください。

Q 乾いた肌に使用できますか？

A EMSがレベル0の場合は使用できます。
EMSをご使用する場合、肌が乾いた状態ではEMSの刺激を感じにくくなる場合があります。EMSが弱いと感じる場合は、付属の化粧品などで湿らせてご使用ください。

Q シートマスクの上から使用可能ですか？

A 使用しないでください。LEDの効果やEMSの効果を十分に発揮できません。また、マスク内に水分が入りやすく、製品の故障の原因となる可能性があります。

Q 肌に発疹、炎症、かゆみが出たのですが

A 熱、光、EMSの刺激によるものです。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

Q マスクの匂いが気になります

A シリコーンゴム特有の匂いがすることがありますが、異常ではありません。

Q 違和感や疲労感があるのですが

A 熱、光、EMSの刺激によるものです。
顔に違和感がなくなるまでしばらく使用を控えてください。

Q 歯が痛くなるのですが

A マスクの圧迫やEMSにより歯が痛くなる場合があります。
違和感がある場合は、医師にご相談ください。

Q 日焼け直後に
使用できますか？

A 炎症の原因になる場合があります。肌にトラブルが起こった場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

Q 肌に赤みが出たのですが

A マスクの圧迫により一時的に赤みが出ることがあります。
翌日まで続く場合は医師にご相談ください。

Q 顔にマスクの跡が
残るのですが

A マスクは伸縮性のシリコーンでできております。肌の状態によっては跡が残ることがありますが、時間が経つと消えますのでご安心ください。

Q マスクにメイクの色が移る
可能性はありますか？

A 色移りする可能性があります。メイクは落とした状態で使用してください。

製品仕様

定 格 電 源	DC5V 2A
消 費 電 力	最大約8.0W(充電時)
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約3時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
動 作 時 間	約50分(満充電の状態から) ※使用環境によって、動作時間は前後します。
外 形 寸 法	マスクを広げた状態 : W635×D112×H210(mm) マスクを折りたたんだ状態 : W348×D 60×H245(mm)
製 品 質 量	約520g
材 質	マスク部:シリコン、ステンレス コントローラー部:ABS
製 造 国	中国製
付 属 品	充電用USBケーブル(Type-C) .. 1個 収納巾着…1個 取扱説明書(保証書付き)
推 奨 環 境 温 度	10℃～40℃

■ アフターサービス

日本国内からのお問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

 **0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話

 **0570-550-637** (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっております。

日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。

充電池について

- 充電池は消耗品です(保証対象外)。
充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。(充電回数は300回が目安です)。
充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンターにご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

内蔵電池の取出方法


この製品に使用しておりますリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

- 電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
- 電池を取る前には必ず電源をオフにし、充電用USBケーブルを外してください。
- 電池を取り出す際はドライバーを使用し、けががないように十分に注意しながら取り出してください。
- 電池を取り出す際は固いもの等で電池を傷つけないようにご注意ください。※発熱、発火の原因となります。
- 取り外した電池は自治体の分別ルール（廃棄やリサイクル方法）に従って処理してください。




操作STEP 下図①～⑤を参照し、電池を取り出してください。

- ①コントローラカバーのネジを4か所外す。
※外しにくい場合は、固定バンドをめくるようにしてネジ部分を露出してください。

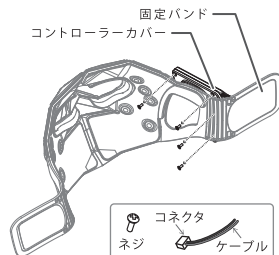

- ②コントローラカバーのツメを4か所外し、カバーを開ける。

<正面>

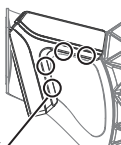


<側面>




ツメが外れない場合、
カバー側面にヘラなどを
差し込みながら、カバーを
上下に開いて外します。

- ③ケーブルのコネクタを3か所取り外す。

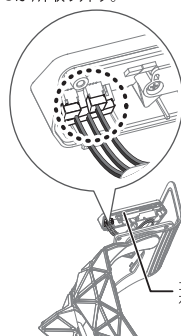

- ④電池に付いているケーブルのコネクタを外し、プラスチック定規のような薄いものを電池の下に差し込み、電池を取り外す。
※強粘着テープで接着されています。

① ケーブルは切らないこと

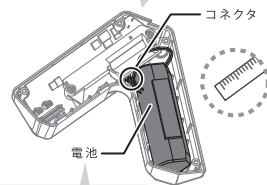

② 電池を傷つけないよう注意



この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
お客様ご自身で分解・修理した場合、故障の原因となりますのでご注意ください。

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.26)にご相談ください。
- 弊社製品保証約款に照らしお客様の言動がカスタマーハラスメント行為に該当すると判断した場合は、保証対応をお断り、または中止させていただくことがございます。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
 - (ロ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
 - (ハ) 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
 - ① 使用上の誤り
 - ② お買い上げ後の輸送、転倒・落下
 - ③ 弊社以外の第三者による修理・改造
 - ④ 高温・多湿等の温度・湿度の使用環境
 - ⑤ 接続する他の機器の異常
 - ⑥ (家庭用製品の業務用使用等) 想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用
 - ⑦ (説明書等で指定がある場合) 指定方法以外での給電
 - ⑧ 非純正部品の使用
 - ⑨ 車両・船舶への搭載
 - ⑩ 海外でのご使用
 - (ニ) 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
 - (ホ) 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
 - (ヘ) 改造・分解の形跡がある場合
 - (ト) 説明書、注意書等で弊社から案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法(レンタル行為を含みます)でご使用された場合
 - (チ) 保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
 - (リ) 弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品(オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合
 - (ヌ) 製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
 - (ル) その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でない弊社が判断した場合

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

Memo

Memo

No.

保証書

持込修理

品 名	家庭用美容器	型 番	YJMF4LCP1
形 名	ブルーグリーンマスク リフト プロ		
無料修理保証	対 象 部 分	期 間	
	本体	お買い上げ日から 1 年 間	
※販売者名	店名・住所・電話  ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。
左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- ・補修用性能部品の保有期間
当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。
※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。
※上記期間は目安となりますため、箇所により生産完了から3年以内でも部品在庫が無くなる可能性があります。
※製造・販売から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」
(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)
および「ヤーマン製品保証約款」
(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)
をご確認ください。
- ・個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ
(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy>)
- ・利用目的
お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

0120-776-282

携帯電話

0570-550-637



www.ya-man.com