


使い方


■ 準備

- 1 フェイスラインリフトアップバンドのあご用穴を上にし、広げて置く

※リフトアップバンドに裏表はありません。

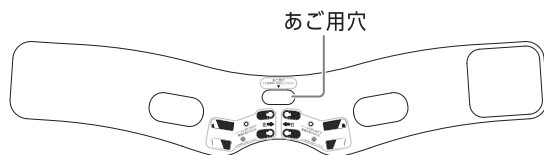


- 2 電極シートのL (左)、R (右)を確認する

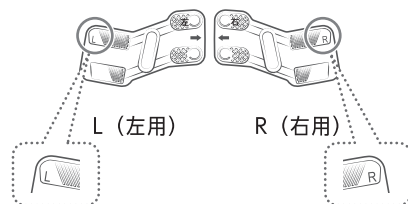

- 3 リフトアップバンドのシールを取り、左側の電極装着部 (2つの穴) にL (左) 用、右側の電極装着部にR (右) 用の電極シートの突起をはめこむ

- 電極シートの矢印が向い合せ(⇄⇄)になっていることを確認する

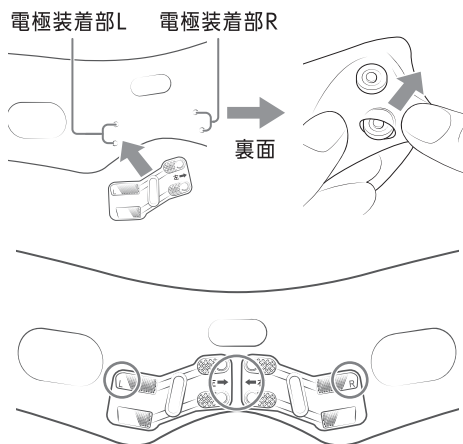


■ ケア

- 4 洗顔後、あご下にお手持ちのスキンケア化粧品 (水溶性) を塗布する


※化粧品の量が少ないと体感が弱くなる場合があります。

- リフトアップバンドのあご用穴をあごにあわせて、両端を真上に引き上げ頭頂部で固定する

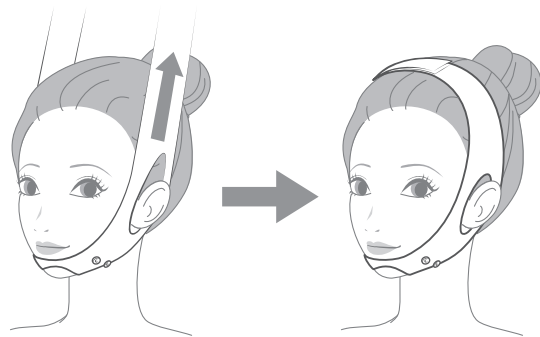

- 5 手元でデザインリフト モア本体の電源を入れ、スタンバイ表示になっていることを確認する (取説P16 参照)

- 右の図を参考に、本体のONの方を前 (あご先側) にして本体を取り付ける
※電極シートに本体がしっかり取り付けられていないと体感がえられない場合があります。
- 鏡を見ながら好みのレベル (強さ) を選択する (取説P17 参照)

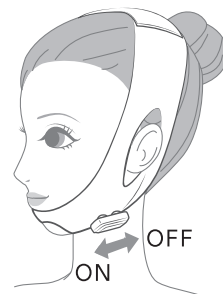

※万一、お肌にかゆみ・かぶれ・しめつけや擦れによる異常が現れた場合は、直ちにご使用を止め医師にご相談ください。


※就寝時のご使用は絶対しないでください。

※子供や身体の不自由な人だけの使用は 避けてください。自分で意思表示ができない人の使用は避けてください。

取扱説明書


フェイスラインリフトアップバンド/電極シート（フェイスライン） YJMZ2M1/YJMZ3M1

■ 商品仕様

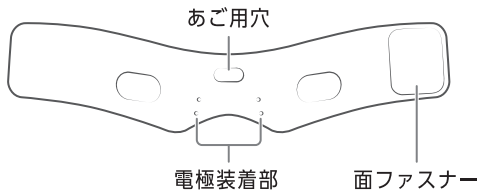

名 称	フェイスラインリフトアップバンド
外 形 寸 法	約 W590×H126×D2 (mm)
製 品 質 量	約15 g
材 質	ナイロン70%、ポリウレタン30%
製 造 国	日本製

● 生産過程におきまして、多少のほつれが生じることがありますが品質上問題はありません。

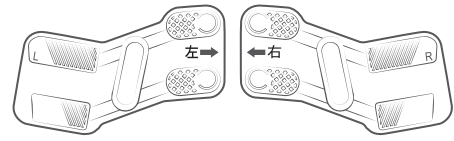

名 称	電極シート（フェイスライン）
外 形 寸 法	約 W77×H47×D8 (mm)
製 品 質 量	約6 g
材 質	ステンレス、PP、PET、Ag印刷
製 造 国	中国製

■ お手入れのしかた

使用後は清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。

【フェイスラインリフトアップバンド】

※取り替え目安：約4ヶ月

- 使用後電極シートを外し、手洗いまたは洗濯機で洗濯する。
- 手洗いの場合は、軽くもみ洗いし十分にすすぎ、両手で包み込むように絞ってください。
- 洗濯機をご使用の場合はネットをご利用ください。
- 洗剤は衣類用の中性洗剤を推奨しております。漂白剤、アルコールなどは使用しないでください。
- 30℃以下のお水でお手入れしてください。乾燥機、アイロンなどは使用しないでください。
- 室内で陰干ししてください。洗濯後面ファスナー部が反ってしまう場合がありますが使用には問題はありません。気になる場合は、手で反りを戻していただくことで緩和できます。
- 着用上及び洗濯により若干伸び縮みすることがあります。

【電極シート（フェイスライン）】

※取り替え目安：12回程度

- 使用後マスクから外しウェットティッシュで軽くふき取る。
- ウェットティッシュはノンアルコールのものをご使用ください。
- 汚れが気になる場合はハンドソープや薄めた中性洗剤を使用し弱めの水流で洗い流してください。水中に沈めないでください。
- 水洗い後は直射日光を避け風通しの良い場所で良く乾かしてからご使用ください。
- シート面を折り曲げないでください。

■ お届け時のリフトアップバンドの状態（実寸大）

シールは一度はがすと貼り直しはできないため、2回目以降はこちらの図を参考にしてください。

