



取扱説明書

家庭用美容器

フォトケア プラス

YJSB1BGR

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に「安全上のご注意」(P.3~12) を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

使いかたの流れ

1

給水する

給水タンク、ミスト
タンクに給水して、
本体に取り付けて
ください。



2

LEDパネルを
取り付ける


コネクタに合わせて
LEDパネルを
取り付けてください。



3

電源を
オンにする

ON/OFFボタンを
押してください。

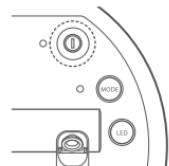

4

モードを選ぶ

MODEボタンを
押してください。



5

スチーム/
ミスト/LED
を浴びる



もくじ

使用前

準備

使う

お手入れ

お知らせ

安全上のご注意 ————— p3
各部のなまえとはたらき ————— p13
お使いになる前に ————— p18
使いかた ————— p24
使い終わったら ————— p31

お知らせ ————— p40
●製品仕様 ————— p40
●故障かな?と思ったら ————— p41
アフターサービス ————— p45

■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について



危険
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容です。

図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

⚠ 警告（電源に関して）

- 電源コードが傷んでいる、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

- 電源コードが破損したら使用しない。

お買い上げの販売店窓口にて修理・点検を依頼してください。

危険ですのでご自身でコード交換をしないでください。

- 電源コードを破損、加工しない。束ねたりねじったりなど無理に力を加えない。

ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

収納時にはコードのねじれを直してください。

- 使用中に、プラグをコンセントから抜いたり、本体側からプラグを抜かない。

感電・ショートによる発火・火災の原因となります。

必ず電源をオフにしてからプラグを抜いてください。



禁止



タコ足配線
禁止

- 電源コードは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。

感電・ショート・発火の原因となります。

- コンセントや配線器具の定格容量を超えて配線（タコ足配線）しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



必ず守る

- 万一、異常が発生したら、電源をすぐに切り、電源コードをコンセントから抜く。

動作不良・発煙・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。

- 必ず交流100Vで使用する（無料修理は国内のみ）。

火災・感電・故障の原因となります。



禁止



プラグを
抜く

- 使用後やお手入れするときは必ず電源をオフにし、電源コードをコンセントから抜く。

感電・ショート・発火の原因となります。

⚠ 注意（電源に関して）

- 電源コードを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く（金属部に触れないようする）。
また、ぬれた手で抜き差しはしない。
感電・ショート・発火の原因となります。



プラグを
抜く

⚠ 危険 (ご使用、保管に関して)

- 次に該当する人は使用しない。

医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆医用電気機器を使用している人

・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心肺など生命維持用医用電気機器 ・心電計などの装着型医用電気機器



禁 止

⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・心臓疾患、障害及びその疑いのある人 ・幼児や自分で意思表示できない人

・温度や刺激の感覚が自覚できない人 ・自己免疫疾患のある人

次の人をご使用前に医師にご相談ください。

・急性疾患の人 ・感染症疾患の人 ・悪性腫瘍のある人 ・有熱性疾患の人 ・高血圧の人や血液疾患のある人

・発熱している人 ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人 ・神経障害のある人

・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人 ・通院して薬を服用中の人は

・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人

- 次のような場合や部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・お肌に傷や発疹、炎症やかゆみ等の異常がある場合 ・酒気帯びの場合 ・口内や陰部、粘膜など ・眼球

事故・トラブルの原因となります。ご自身で判断できない場合は、使用前に医師にご相談ください。



禁 止

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 使用中および使用後や停止後に水が残った状態で傾けたり、持ち運んだりしない。

ヤけどの原因となります。

- 本製品を連続して使用しない。

本体が高温になります。再度使用する時は1時間以上間をあけてから使用してください。（ロングモード除く）

- 水道水・精製水以外の液体やとろみやべたつきのある化粧品、また異物を給水タンクに入れない。

界面活性剤を含んだ洗剤や化粧品は絶対に入れないと。

熱湯が飛び出し、ヤけど・けが・故障の原因となります。

- 水道水・精製水・化粧水以外の液体やとろみやべたつきのある化粧品、また異物をミストタンクに入れないと。界面活性剤を含んだ洗剤や化粧品は絶対に入れないと。

ミスト吹出口の詰まりや故障の原因となります。

- 金属や磁石の近くで使用しない。

動作不良・本体が故障する原因となります。

- ぬれた手で使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。



禁 止

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 机の上など硬くて安定した水平な場所に設置する（傾斜面での使用はしない）。

布団や枕、絨毯の上などの不安定な場所に設置しない。

けがや本体が故障する原因となります。



禁 止

- 機器の上に重い物を置いたり、乗ったり、立ったりしない。

故障の原因になります。

- 使用前にLEDパネル・給水タンク・ミストタンク・風よけフラップの割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。

けが・肌トラブルの原因となります。

- 地震や雷を感じたら電源をオフにし、プラグを抜く。

火災・感電のおそれがあります。



必ず守る

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。

使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。

お肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

- 専用の給水タンクを取り付けて使用する。直接水を本体に注ぎ込まない。

本体が故障する原因となります。

- 専用のミストタンクを取り付けて使用する。本体が故障する原因となります。

- 使用中にLEDを直視し続けない。

事故・トラブルの原因となります。



- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

けがや本体が故障する原因となります。



- 自分の意思表示をできない人には使わない。子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。

子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。

事故・けがの原因となります。



使用者の制限

- 本体/LEDパネル/電源コードなどに水がかからないようにする（水につけたり、洗ったりしない）。また、水場・浴室内・入浴時に使用しない。感電・ショート・発火の原因となります。



水かけ禁止

- 屋外で使用しない。

本体が故障する原因となります。



屋外禁止

- 機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する。

火災・感電のおそれがあります。



落下禁止

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



分解禁止

- 次のような場所で機器を使用・保管しない。

- | | |
|--|--------------------------|
| ・浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近く | ・ほこりの多い場所 |
| ・直射日光の当たる場所や屋外 | ・傾斜、振動、衝撃のある場所 |
| ・引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近く | ・強い電波や磁気の発生する場所 |
| ・油煙、湯気の当たる場所 | ・発熱器具（ストーブ等）の近くなど高温になる場所 |
| ・温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具のそば） | ・布団や枕、絨毯の上などの不安定な場所 |

火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。



禁 止

- 異臭・異常発熱したときは使用を中止する。

そのまま使用すると破損・発火の原因となります。



異常時
使用禁止

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- スチーム／ミスト使用中や使用直後は吹出口付近に触れたり、ふさいだり、のぞいたりしない。けがをする原因となります。
- スチームを切った後（約1分間）、透明なスチームが出るため、吹出口には近づかない。やけどの原因となります。
- 本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。本体の表面に損傷を与える原因となります。
- 高温に弱いもの、熱いものの上には設置しない。変形・変色などの原因となります。



禁止

- 停電した時は、直ちに電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。事故のおそれがあります。



必ず守る

- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。他の電気製品（電気毛布・敷布・こたつ等）との同時使用はしない。誤動作による事故のおそれがあります。



禁止

- 使用中にLEDパネル／給水タンク／ミストタンクを外したり、水・化粧水を注ぎ足さない。また、本体内部には触れない。

CHECKランプが赤点滅（P.44）した場合には、本体を十分に冷ましてから給水・化粧水を注入してください。突沸により熱い湯滴や蒸気が飛び出しがあります。

- 持って移動するときは、傾けたり、逆さまにしたりしない。

- ・ 傾けると水がこぼれ、本体の故障の原因となります。
- ・ 持ち運びする際に落として異常が発生した場合は、保証の対象外となりますのでご注意ください。

- スチームは、2回以上連続で使用しない。肌トラブルの原因となります。
※ 2つのモードを連続して使用しないこと（ロングモード除く）
ロングモード時のスチームは顔に直接あてないように使用してください。



禁止

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- ・美容目的以外で使用しない。
- ・吹出口から排水しない。
- ・吹出口に手や先の鋭いものなどで触れない。



禁止

- ・スチーム使用時は、吹出口から20cm以上離れた位置で使用する。
近づきすぎるとやけどの原因となります。
- ・コンセントや電源コードにスチーム／ミストがかからないようにする。
漏電・感電・故障の原因となります。
- ・電源コードを本体に巻き付けて保管しない。
ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。
- ・以下の項目は必ず守る。
事故やけが、本体が故障する原因となります。
 - ・お肌の状態にあわせて使用する。
 - ・日焼け直後や、ピーリング、剃毛した直後の使用は控える。



必ず守る

- ・LEDパネル、給水タンク、ミストタンク、および本体を清潔に保つため、使用後は毎回水・化粧水を捨て洗浄する。本体に水・化粧水が付着したときは、すぐに水分を拭き取る。

ぬれたまま放置すると故障の原因となります。

- ・長期間使用しないときは、給水タンク、ミストタンク、および本体の中の水・化粧水を捨て洗浄し、十分に乾燥させてから保管する。
放置するとおいやミスト吹出口の詰まりの原因となります。



必ず守る


- ・ミストを使用する前に、ミストタンクのキャップがしっかりと閉まっている事を確認する。
- ・使用後は必ずミストタンクのキャップを閉じる。
- ・ミストタンクのキャップを閉めるときは、空気穴をふさがない。
ミスト吹出口から水（化粧水）がしみ出る場合があります。

■ 各部のなまえとはたらき


本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

本体

●正面

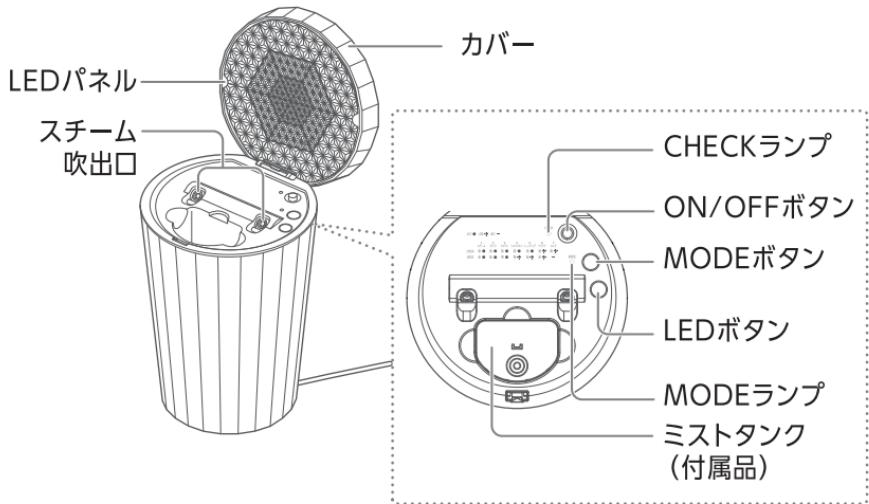

●背面

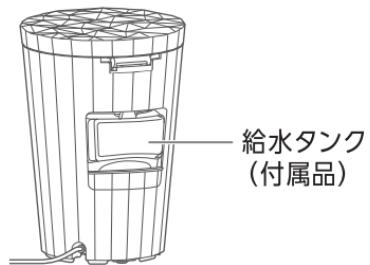

●底面




※初めて使用するとき、本体、給水タンク内、梱包袋に水滴が付着していることがあります。検査を行ったときの水が残っているもので、衛生上問題はありません。


LEDパネル

- LEDパネル（グリーン）※
 - LEDパネル（レッド）
- ※本体に取り付けて梱包

●正面

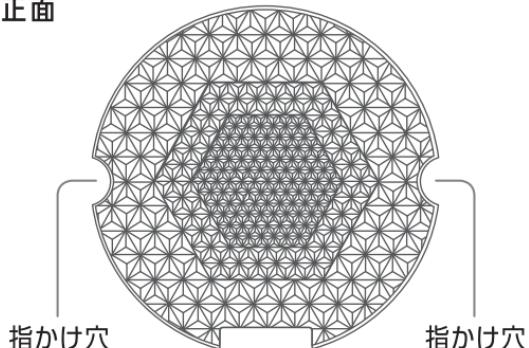

●背面

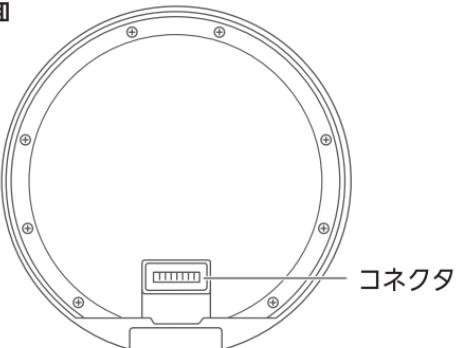


付属品

- 給水タンク*
- (本体に取り付けて梱包)

- 取扱説明書（保証書付）

※本製品以外では使用しないでください。

- ミストタンク*
- (本体に取り付けて梱包)

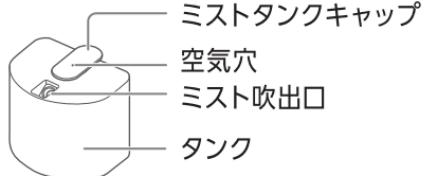

- 風よけフラップ*



はたらき

安全機能

- 転倒感知スイッチ

使用中に本体を持ち上げたり、移動させたりすると、本体底面にある転倒感知スイッチが作動して動作が停止します。

- 空焚き防止

空焚きを感知するとCHECKランプが赤点滅し、エラーを表示します。

電源をオフにし、10分ほど休ませてから、給水タンクに給水してください。

※すぐに給水すると、突沸により熱い湯滴や蒸気が飛び出しがあります。


- LEDパネル認識機能

LEDパネルが外れたり、正常に取り付けられていない場合にCHECKランプ・MODEランプが赤点灯し、エラーを表示します。


モードの説明

本製品では、次のモードを使用してお肌のお手入れをしていただけます。

MODEボタンを押すごとに、CHECKランプとMODEランプが以下の順番で切り替わります。

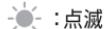

- : 消灯

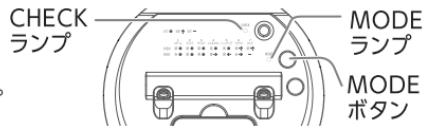


スチーム/ミスト	モード	時間	ランプ表示		説明
			CHECK	MODE	
温スチーム単独	1 スチーム	約 12 分	紫色 	赤色 	お肌をやわらげリラックスしたいときに 温スチーム(12分) → 洗顔
	2 クリーン	約 3 分	紫色 	紫色 	メイク落としに 温スチーム(3分) → 洗顔
冷ミスト単独	3 モイスト	約 1 分	紫色 	青色 	乾燥が気になるときに 洗顔 → 冷ミスト(25秒) → 停止(8秒) → 冷ミスト(25秒)
温冷組み合わせ	4 シルクスキン	約 8 分	紫色 	青色 	じっくりお肌をケアしたいときに 洗顔 → 温スチーム(5分) → 停止(8秒) → 冷ミスト(25秒) → 温スチーム(2分) → 停止(8秒) → 冷ミスト(25秒)
	5 トーンアップ	約 4 分	紫色 	紫色 	メイク前のお手軽美容 洗顔 → 温スチーム(3分) → 停止(8秒) → 冷ミスト(50秒)
温スチーム単独	6 アイケア	約 2 分	紫色 	赤色 	目もとケアコスメとの合わせづかいに 洗顔 → 温スチーム(50秒) → 停止(15秒) → 温スチーム(20秒) 2回繰り返し
温スチーム単独 (LED 照射なし)	7 ロング	約 8 時間	紫色 	-	長時間お肌をケアしたいときに 温スチーム(2分30秒) → 停止(67分) → 温スチーム(1分30秒) 7回繰り返し

●LED照射について

電源をオンにして、モードを選択していない場合にLEDボタンを押すと、LEDの単独使用ができます。
3分経過すると自動的に消えます。(ブザー音：「ピッピッ」)

【LED単独モード】

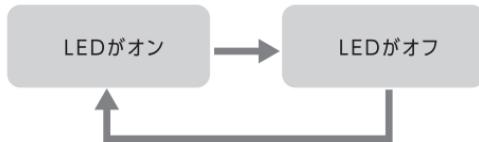

【温スチーム/冷ミスト噴霧中のLEDオフ】

温スチームや冷ミストのモード使用中にLEDボタンを押すと、LEDをオフにできます。

【LEDパネルの使い分け】

各モードにおすすめのLEDパネルは次のとおりです。

- 緑LED おすすめモード：シルクスキンモード、トーンアップモード
 - 赤LED おすすめモード：スチームモード、モイストモード、アイケアモード
 - 黄LED おすすめモード：スチームモード、モイストモード
- * LEDパネル(イエロー)は別売りです。

● LEDとは？

クリニックの光美容にも使われる安全性の高い光。

LEDはエステサロンだけではなくNASAもその効果について臨床試験を実施するなど、注目度の高い技術の1つです。
近年では美容だけでなく医療の現場でも使われています。


■ お使いになる前に

設置

1 本体を平らな場所に設置する

机の上など、硬くて平らな場所に設置してください。

- マットや絨毯の上では転倒感知スイッチが働き、作動しないことがあります。

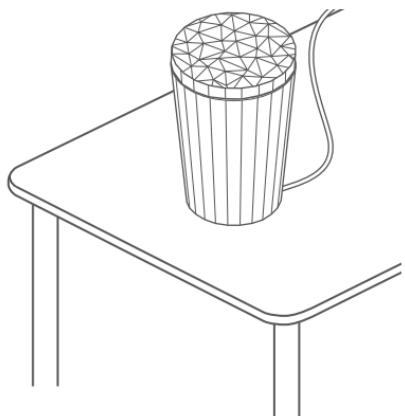

注意


- 本体が十分に冷めていることを確認してから給水してください。熱を持っている場合、突沸により熱い湯滴や蒸気が飛ぶおそれがあります。

給水する・化粧水を注入する

1 給水タンクを取り外す

給水タンクの天面を押し下げながらななめに引いて取り外してください。


- 本体が倒れないように片手で押さえながら取り外してください。

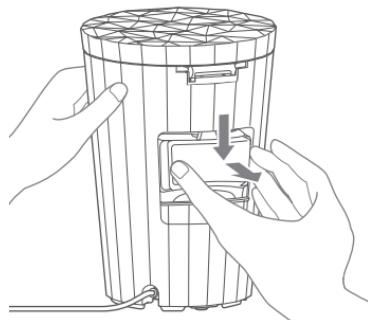

2 給水タンクに水を入れる

キャップを外して給水タンクに水を入れ、
しっかりとキャップを閉めてください。

- 持ち運ぶ際は、キャップ側を上向きにして
ください。

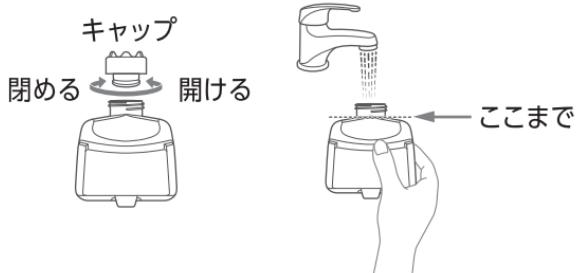


3 給水タンクを取り付ける

給水タンクの向きを確認し、カチッというまで
押してください。



タンクを下部へ当てながら本体に入れます。

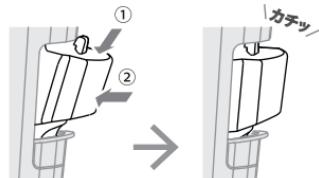


注意

- 水道水・精製水以外のものを給水タンクに入れないでください。動作中に熱湯が飛び出し、やけど・けがの原因となります。また、故障や本体寿命が短くなる原因となります。
- 給水タンクはしっかりと取り付けてください。給水タンクの取り付けが不十分では正常に作動しません。
また、取り付けの際には、本体に水がかからないよう注意してください。

4 ミストタンクを取り外す

本体のカバーを開けて、ミストタンクを上に持ち上げて取り外してください。

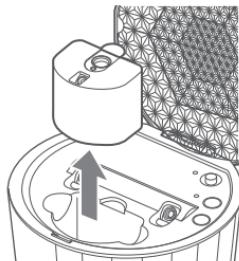

5 水または化粧水をミストタンクに入れ、しっかりキャップを閉じる

注意


- 水道水・精製水・化粧水以外の液体やとろみやべたつきのある化粧品やクエン酸洗浄剤をミストタンクに入れないでください。ミスト吹出口が詰まり、故障や本体寿命が短くなる原因となります。

6

ミストタンクを取り付ける

ミストタンクの向きを確認し、押し下げてください。


- キャップを閉じるときは、キャップの空気穴をふさがないでください。空気穴をふさいでキャップを閉めると、ミスト吹出口から水（化粧水）がしみ出る場合があります。

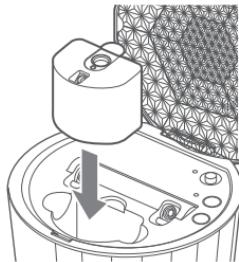

※一度入れた水（化粧水）は使い切ってください

水または化粧水を入れすぎると、キャップからあふれたり、吹出口から勢いよく飛び出ることがあります。

※空気穴をふさがないで

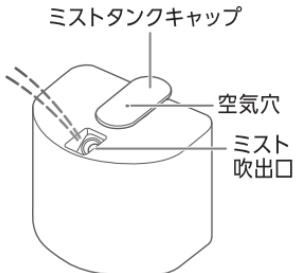


注意

- ミストタンクは奥まで押し込んでください。
※ミストタンクのまわりにすきまがあるため、完全に固定はされませんが、奥まで差し込まれていれば問題ありません。
- ミストタンクの取り付けが不十分では正常に作動しません。
また、取り付けの際には、本体に水や化粧水がかからないよう注意してください。

| 風よけフラップを取り付ける


1 風よけフラップを取り付ける

突起をミストタンク横のくぼみに合わせて取り付けてください。

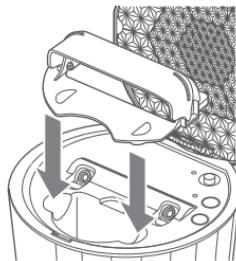

2 風よけフラップの角度を調整する


両側面を親指と人差し指で押さえて角度を調整してください。

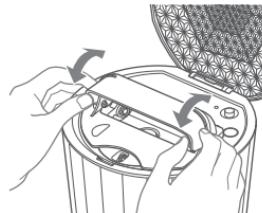

LEDパネルを取り付ける


●取り付け方

本体のカバーを開けて、本体とLEDパネルのコネクタ同士をあわせてしっかりと押し込んで取り付けてください。

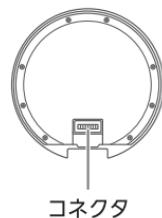

●取り外し方

電源をオフにして、指かけ穴に指をひっかけるようにして取り外してください。

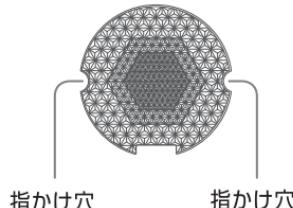


※使用直後は熱をもっているため、10分以上
おいてから取り外してください。


■ 使いかた

| 基本的な使いかた

- 1 電源コードを壁面コンセントに差し込む

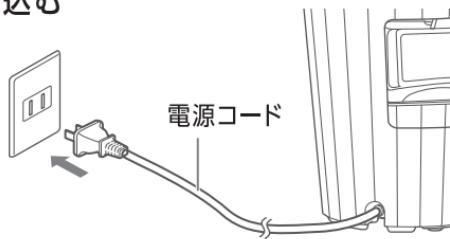

- 2 本体のカバーを開けて、LEDパネルを取り付ける

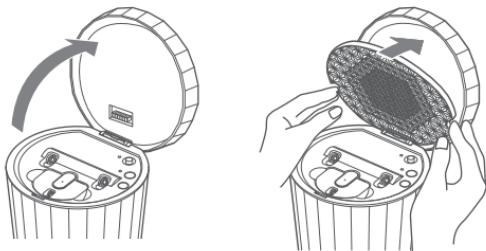


- 3 電源をオンにする

ON/OFFボタンを押してください。

CHECKランプが青色に点灯します（スタンバイ状態）。

■電源ボタンについてご注意

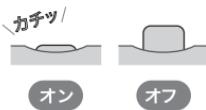

電源をオンにする時は、ボタンが下がりきっていることを確認してください。下まで押せていないと、電源ボタンがオフの位置に戻ってしまうことがあります。



- モードを選択していない場合にLEDボタンを押すと、LEDの単独使用ができます（P.17）。

注意

- 絶対にぬれた手で行わないでください。
- 本体とLEDパネルのコネクタに水分が付着していないか確認をしてから取り付けてください。


4 MODEボタンを押してお好みのモードを選ぶ

しばらくするとスチーム/ミストができます。

- モードは以下から選べます。
詳細は、「モードの説明」(P.16)をご参照ください。

：
点滅
●
：点灯
－
：消灯

MODEボタンを押すごとに以下の順番で切り替わります。

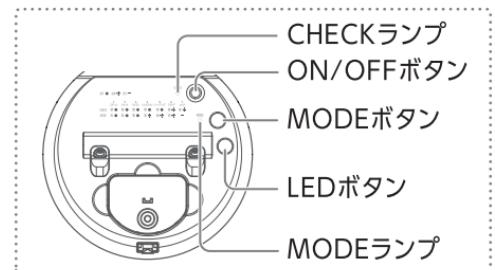

モード		スタンバイ	スチーム	クリーン	モイスト	シルクスキン	トーンアップ	アイケア	ロング
ランプ表示	CHECK (ランプの色)	—	温	温	冷	温/冷	温/冷	温	温
	MODE (ランプの色)	—	赤	紫	青	青	紫	赤	—


エラー表示		
給水	故障	LEDパネル
赤 	赤 	赤
— —	— —	赤

- MODEボタンを押すごとにモードが切り替わります。
- モイストモードおよびシルクスキンモードは、ミストタンクに化粧水を入れて使用することをおすすめします。
- 途中でモードを変更したいときは、MODEボタンを押してください。その場合、給水タンクの水やミストタンクの水または化粧水が不足し途中で止まることがあります、異常ではありません。

注意


- 水道水・精製水・化粧水以外の液体やとろみやべたつきのある化粧品やクエン酸洗浄剤をミストタンクに入れないでください。ミスト吹出口が詰まり、故障や本体寿命が短くなる原因となります。

5 LEDを使用しない場合は、LEDボタンを押して照射をオフにする

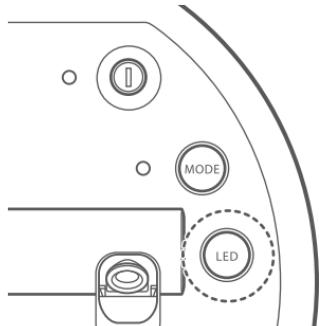

6 風よけフラップの角度を調整する

顔全体にスチーム / ミストがあたるように調整してください。

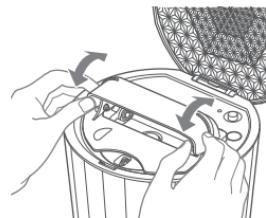

ポイント

- 両側面を親指と人差し指で押さえて角度を調整してください。

注意

- 吹出口付近は熱くなりますので、触れないでください。
- スチームの吹出開始後、しばらくするとスチームが高温になるため、風よけフラップの角度調整はおやめください。
やけどの原因となります。

7

スチーム/ミスト/LEDを浴びる



**スチーム使用時は20cm以上、
ミスト使用時は5cm程度離れる**

- 途中で止めたいときは、ON/OFFボタンを押してください。モードが終了するとスタンバイ状態（P.24）に戻ります。
- 使用中にスチーム/ミスト量が変動することがあります、異常ではありません。
- 本体を持ち上げたり傾けたりすると、スチーム/ミストが止まります。
- 衣服のぬれが気になるときは、首元にタオルを巻いてください。
- 空調の風の影響を受けない場所で使用してください。エアコンなどの風を受けると、スチーム及びミストが風に流されてまっすぐに届かないことがあります。
- ミストタンクに注入した水または化粧水は、毎回使い切ることをおすすめします。
- ミスト時に「ー」と音がしますがミスト発生音です。

ポイント

- ミストを浴びるときは、顔を動かしてあてたい部分に使用することをおすすめします。
- ミスト吹出口の先端に空気がたまっているとミストが出ない場合があります。ミストタンクキャップの空気穴部分を軽く押すとミストが出てきます。


8 ON/OFFボタンを押して電源をオフにする

- 使用後は熱くなっていますので、停止後約10分間は本体、LEDパネル、風よけフラップに触れないでください。
また、本体のカバーを閉じないでください。
- スチーム使用後はお手持ちの化粧水をつけるなど、普段のお手入れをしてください。

■カバー開閉センサー

※動作中にカバーを閉じると、動作を停止します

カバーの開閉を検知するセンサーがあるため、LEDの見え方が異なりますが、異常ではありません。

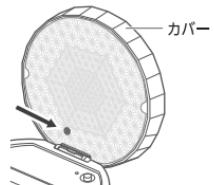


注意

- 使用中にカバーを閉じない
蒸気がこもり、故障や変形の原因となります。
- 使用中にLEDパネルを外さない
故障の原因となります。
また、LEDパネルの使用中及び使用直後は熱をもちますが、異常ではありません。
- スチーム使用時の湯滴注意
湯滴が飛び出すおそれがあるため、必ず吹出口から20cm以上離れて使用してください。
また、吹出口から湯滴が垂れることがありますが異常ではありません。MODEボタン付近に垂れた水滴は軽く拭き取ってください。
- 高温注意
スチーム使用時およびスチーム停止後約10分間は吹出口が熱くなっているため、絶対に触れないでください。
- 本体向き注意
コンセントや電源コードにスチーム / ミストがかからないようにしてください。水滴の付着により漏電・感電・故障の原因となります。
- スチームが熱く感じたら吹出口から顔を離す
- スチームは2回以上連続で使用しない（ロングモード除く）
肌トラブルの原因となります。

ロングモードの使いかた

1 本体を平らな場所に設置する

机の上など、硬くて平らな場所に設置してください。
ベッドサイドで使用するときは、顔から約80cm離して寝具の周辺に設置してください。

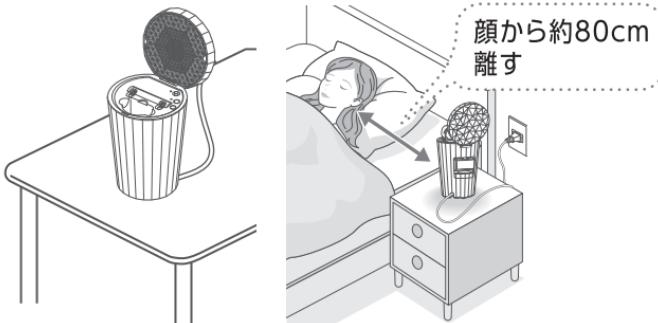

2 ON/OFFボタンを押して電源をオンにする

P.18~19の手順で給水タンクに給水し、電源をオンにしてください。


注意

ベッドサイドで使用するときは、以下の点にご注意ください。

- 就寝中に誤って身体が本体や電源コードにあたらない場所に設置してください。
- 電源コードは寝具と反対側に引き出してください。
- お子様と一緒にお休みになる際は、本体や電源コードに触れないよう、お子様とは反対側に本体を設置してください。

3 MODEボタンを押してロングモードを選ぶ

約8時間後に自動停止します（スタンバイ状態に戻ります）。

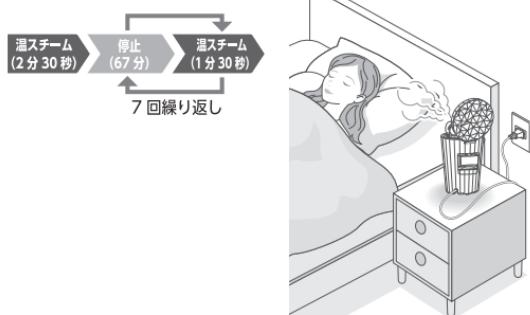

4 ON/OFFボタンを押して電源をオフにする

- 使用後は熱くなっていますので、停止後約10分間は本体に触れないでください。

■ 使い終わったら

お手入れのしかた


本体、給水タンク、およびミストタンクを清潔に保つため、使用後は毎回水または化粧水を捨ててください。

- 1 電源をオフにし、
壁面コンセント
から電源コード
を抜く

本体を10分以上放置し、
熱を冷ましてください。

- 2 給水タンクを
取り外す

図の部分を下に押し、
手前に引いて外しま
す。

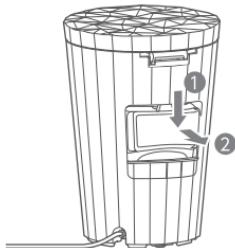

- 3 給水タンクの
残り水を捨てる



- 4 ミストタンクを
取り外し、残り
水または化粧水
を捨てる




警告

- お手入れの際は、必ず電源をオフにし、電源コードを抜く。
- 感電・ショート・発火の原因となります。

5 本体を傾けて本体内部の水を捨てる

- 徐々に傾けながら水を捨ててください。
- 本体内部に少し水が残りますが、衛生上問題ありません。

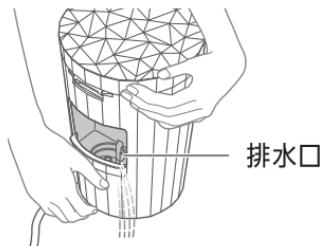

6 本体、給水タンク、およびミストタンクについての水滴を拭き取る

- ON/OFFボタンに水滴がついたら、よく拭き取ってください。

ポイント

- 本体だけでなく、以下の部分もお手入れをしてください。

LEDパネル/風よけフラップ



ミスト吹出口



ミスト吹出口

タオルなどの乾いた布で水滴を拭き取ってください。

吹出口に水がたまっている場合は、綿棒で優しく拭いてください。

ミストタンク

P.35~36の手順で水洗浄してください。

注意

- 使用後、本体内部の残り水は熱くなっていますので、手などにお湯がかからないよう注意してください。
ミストタンク洗浄は水で行う必要があります。

スチーム：定期的なメンテナンス（クエン酸洗浄）

スチームを快適にお使いいただくため、1ヵ月に一度を目安に本体及び給水タンクのメンテナンスをしてください。

こんな時におすすめ

- ・詰まったとき、においが気になるとき
- ・しばらく使用していないとき

1 クエン酸水を作る

給水タンクにクエン酸と適量の水を入れます。

クエン酸
小さじ1/3杯
(約2g)



2 クエン酸水で煮沸する


手順①の給水タンクを本体に取り付け、スチームモード（12分）で動かします。

- スチームが停止したら、本体を20分以上放置して冷ましてください。
- 煮沸中のスチームを浴びないでください。

3 本体内部からカルキなどを洗い流す

給水タンクを取り外し、排水口からクエン酸水を排水します。

- カルキなどがなくなるまで、排水口から水を入れて**本体のカバーを押さえながら回すようにして本体を揺らし**、本体内部の水を排水してください。
- 給水タンクは水で洗い流してください。
- スチームの吹出口から排水しないでください。

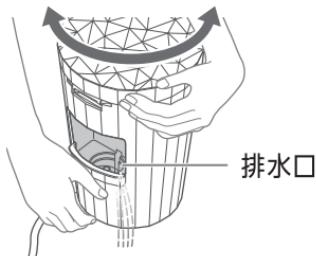

4 水で煮沸する

水を入れた給水タンクを本体に取り付け、スチームモード（12分）で動かします。本体を冷ました後に排水します。

- 汚れた水が出なくなるまで繰り返し行ってください。
- クエン酸が残らないよう必ず行ってください。

ポイント

- クエン酸洗浄剤は市販されている粉末状のものをおすすめします。
- 「クエン酸100%」と表示されたものであれば、市販されている電気ポット用の洗浄剤が使用できますが、使用量は1回につき約2gをお守りください。
- ご利用の際は、クエン酸洗浄剤の注意事項をよくお読みください。
- ミストタンクはクエン酸洗浄できません。「ミスト：毎回メンテナンス（水洗浄）(P.35～36)」の手順で水洗浄してください。
- 定期的な洗浄をせずに長期間ご使用になられた場合は、上記洗浄を複数回行ってください。

ミスト:毎回メンテナンス(水洗浄)

とろみやべたつきのある化粧品を入れた場合などに


すぐにミストタンクのミスト吹出口が詰まることがあります。

ミストを快適にお使いいただくため、水または化粧水使用後は毎回洗浄し、ミストタンクのメンテナンスをしてください。

化粧水がミストタンクに入ったまま放置すると、固まってミスト吹出口の詰まりの原因になります。

1 本体からミストタンクを取り外し、 ミストタンク内の化粧水を出す

- 本体はぬらさないでください。故障の原因となります。

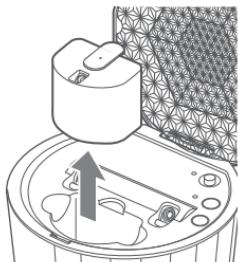

2 ミストタンクに水を半分程度入れて10回ほど振り、挿入口から水を捨てる

5回程度繰り返してください。


- ミストタンク内の汚れが気になる場合は、綿棒で掃除してください。

警告

- お手入れの際は、必ず電源をオフにし、電源コードを抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。

③ 再度ミストタンクに水を満タンになるまで入れて、本体にミストタンクを取り付ける

- 本体はぬらさないでください。故障の原因となります。

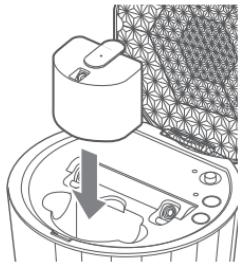


注意

- 洗浄の際は、水道水・精製水以外のものやクエン酸洗浄剤をミストタンクに入れないでください。ミスト吹出口が詰まり、故障や本体寿命が短くなる原因となります。

④ MODEボタンを押してモイストモードを選び、タンク内を空にする

ミスト吹出口から空気が出てくるまでモイストモードを作動してください。

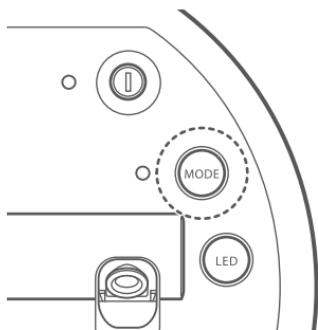

保管のしかた

- ・長期間使用しないときは、必ず水分を拭き取り、十分に乾燥させてから保管してください。水分がついた状態で放置すると、故障や不具合の原因となります。
- ・長期間使用しないときは、ミストタンク内部の残り水または化粧水を捨てて空にしてください。詰まりの原因となります。
- ・本体を使用しないときは、ミストタンクのキャップをしっかりと閉めてください。
- ・本体やLEDパネルのコネクタ部分が濡れたり、汚れたりしないように保管してください。水分が付着している場合は、乾いた布や綿棒で拭いて下さい。
- ・火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。

長期保管前のお手入れのしかた

本体内の残り水を蒸発させます。

あらかじめ、「お手入れのしかた」(P.31) の手順に沿ってお手入れを行ってください。

- ① 空にした給水タンクおよびミストタンクを本体に取り付ける
- ② 電源コードを壁面コンセントに差し込む
- ③ 電源をオンにし、クリーンモードを選ぶ
 - ・MODEボタンを2回押してください。
- ④ CHECKランプが赤点滅に変わるまで待つ
 - ・本体内に水が残っている場合はスチームが出ますが、しばらくするとスチームが止まり、チェックランプが赤点滅に変わります。
- ⑤ 電源をオフにし、電源コードを壁面コンセントから抜く
- ⑥ 本体を冷ます(10分以上)
- ⑦ 給水タンク取り付け部や給水タンクについた水滴を拭き取る
- ⑧ ミストタンク取り付け部やミストタンクについた水滴を拭き取る

保守・点検について

- ・長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- ・本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.41)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.45)までご相談ください。
- ・本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

おすすめ化粧品について

- ・製品詳細、お買い求めはヤーマンブランドサイト(www.ya-man-tokyo-japan.com)
または、ヤーマンオンラインストア(www.ya-man.com)にてご購入ください。
※予告なく販売を終了する場合があります。

スチーマー ハイドロ ローション



内容量：145ml
品 番：YTJ0016
価 格：¥2,750(税込)

■ お知らせ

製品仕様

定 格 電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	約550W
外 形 尺 法	本体：約W157×D157×H229 (mm) LEDパネル：約W150×D150×H11 (mm)
製 品 質 量	約1.6kg (LEDパネル/給水タンク/ミストタンク/風よけフラップ含む)
給水タンクの容量	約170mL
ミストタンクの容量	約3mL
材 質	ABS樹脂、PC、シリコン、ステンレス、アルミニウム
製 造 国	中国
付 属 品	LEDパネル(グリーン)1個(本体に取り付けて梱包) LEDパネル(レッド)1個 給水タンク1個(本体に取り付けて梱包) ミストタンク1個(本体に取り付けて梱包) 風よけフラップ1個 取扱説明書(保証書付)

故障かな?と思ったら 本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状

考えられる原因と対処法

電源が入らない

- ON/OFFボタンを押して電源をオンにしてください（P.24）。
- 本体が傾いています。机の上など、硬くて平らな場所に設置してください。

モードが
スタートしない

- 給水タンク、ミストタンクを本体に挿入してください。
- スタンバイ状態になっています。MODEボタンを押して、お好みのモードにしてください。

スチームが出ない
途中で止まる

- 給水タンクがきちんと取り付けられていません（浮いています）。奥まで挿入してください。
- 給水タンクに水が入っていない、または空になっています（CHECKランプが赤点滅）。
本体を10分以上冷ましてから給水タンクに水を入れてください。
- 本体が傾いています。机の上など、硬くて平らな場所に設置してください。
- カルキなど汚れが詰まっている可能性がございます。定期的なメンテナンス（クエン酸洗浄）を行ってください（P.33～34）

スチームの量が
変動する

- スチームの量は一定ではなく変動することがあります。異常ではありません。
- エアコンなど風の影響を受けています。
風よけフラップを取り付けて、エアコンなどの風の影響を受けない場所で使用してください。

スチーム中「ボコボコ」
という音がする

- スチーム発生時の動作音（沸騰音）です。異常ではありません。

ミスト時に回りが濡れる

- 風の影響を受けるとスチームミストが流されて、まっすぐ届かないことがあります。
風の影響のない場所で使用していくください。

こんな症状

考えられる原因と対処法

ミスト中「ウー」という音がする

- ミスト発生時の動作音です。異常ではありません。

ミストが出ない 途中で止まる

- ミストタンクがきちんと取り付けられていません（浮いています）。奥まで挿入してください。
- ミストタンクに水または化粧水が入っていない、または空になっています。本体を10分以上冷ましてからミストタンクに水または化粧水を入れてください。
- ミストタンクにとろみやべたつきのある化粧品を入れるとミスト吹出口が詰まる場合があります。ミスト吹出口のお手入れをしてください（P.35～P.36）。
- ミスト吹出口の先端に空気がたまっている場合があります。
ミストタンクキャップの空気穴部分を軽く押してください。
- 本体が傾いています。机の上など、硬くて平らな場所に設置してください。
- ミストタンクは奥まで挿入してください。ミストタンクのまわりには隙間があるため、完全に固定されませんが、奥まで差し込まれていれば問題ございません。

ミストの量が 変動する

- ミストの量は一定ではなく変動することがあります。異常ではありません。
- ミスト吹出口に水滴が付いています。吹出口のお手入れをしてください（P.32）。
- エアコンなど風の影響を受けています。
風よけフラップを取り付けて、エアコンなどの風の影響を受けない場所で使用してください。

本体が熱くなる

- 通常使用でも次第に熱を持ちます。異常ではありません。
再度使用するときは、1時間以上間をあけてから使用してください。

| よくあるご質問

Q 使用頻度・使用時間の目安は？

A 毎日ご使用可能です。温スチームは、別のモードであっても2回以上連続で使用しないでください。(ロングモード除く)
肌トラブルの原因となります。
※ロングモード時のスチームは顔に直接あてないように使用してください。

Q LED単独で使用する際の使用頻度は？

A 每日使用可能です。
LED単独での1回の使用目安は3分です。
3分経過するとLEDが消灯します。
※LEDは直視し続けないでください。

Q 美顔器と併用することはできますか？

A IPX4以上の防水機能がある美顔器と併用可能です。

Q ミストタンクやスチームタンクを取り外した底に、水や化粧水がたまります。


A ミストタンクと本体の間に噴霧した水分が入り、水や化粧水がたまる場合があります。その際は、水分をしっかりと拭き取ってください。

※お肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。

エラー表示

エラーが発生した場合は、本体のCHECK・MODEランプで確認できます。

CHECK ランプが 赤点滅	給水タンクに水が入っていません。 電源をオフにし、10分ほど休ませてから、給水タンクに給水してください。 ※すぐに給水すると、突沸により熱い湯滴や蒸気が飛び出しがあります。
CHECK ランプが 赤点灯	製品の故障が考えられます。 販売店またはヤーマンコールセンター（P.45）にご相談ください。
CHECK・ MODE ランプが 赤点灯	LEDパネルが外れている、または正常に取り付けられていない可能性があります。 アタッチメントの取り付け状態を確認してください。

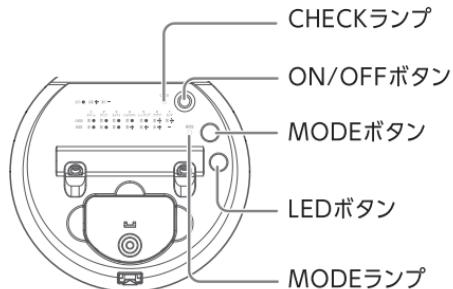

■ アフターサービス

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

お問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

 **0120-776-282** (通話料無料)

受付 9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっています。

携帯電話

 **0570-550-637** (通話料有料)

日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.45）にご相談ください。
- 弊社製品保証約款に照らしお客様の言動がカスタマーハラスメント行為に該当すると判断した場合は、保証対応をお断り、または中止させていただくことがあります。

無料修理規定

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
 - 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
 - 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
 - 使用上の誤り
 - お買い上げ後の輸送、転倒、落下
 - 弊社以外の第三者による修理・改造
 - 高温・多湿等の温度・湿度の使用環境
 - 接続する他の機器の異常
 - (家庭用製品の業務用使用等)想定を超える長時間又は異常電圧下での使用
 - (説明書等で指定がある場合) 指定方法以外での給電
 - 非純正部品の使用
 - 車両・船舶への搭載
 - 海外でのご使用

- 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
 - 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
 - 改造・分解の形跡がある場合
 - 説明書・注意書等で弊社から案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法(レンタル行為を含みます)でご使用された場合
 - 保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
 - 弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品(オークション購入や個人購買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合
 - 製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
 - その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でないと弊社が判断した場合
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

No. _____

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	YJSB1BGR
形名	フォトケア プラス		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体・LEDパネル	お買い上げ日から 1年間	
※販売者名	店名・住所・電話	ご購入日の または本保証書とあわせて 保管してください。	見本

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだつたりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など(通話料無料)

0120-776-282

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

携帯電話(通話料有料)

0570-550-637



www.ya-man.com