



取扱説明書

ジェットプロス
コンパクト
YOI-100

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ● ご使用前に「安全上の注意」(P.2~11)を必ずお読みください。
 ● 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
 ● お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
 ● 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

目次

1. 安全上の注意	2
2. 各部のなまえとはたらき	12
3. 使いかた	15
4. 使いかたのポイント	20
5. お手入れのしかた	21
6. 故障かな?と思ったら	23
7. 内蔵電池の取り出し方法	24
8. 製品仕様	25
9. アフターサービス	26

△警告(電源に関して)

必ず直流5V 1AのACアダプターを使用する(無料保証は国内のみ)。
 火災・感電・故障の原因となります。

充電用USBケーブルは、根元まで確実に差し込む。
 火災・感電・やけどの原因となります。

充電用USBケーブルを抜くときは、必ずUSBプラグを持って引き抜く。(金属部には触れないように)
 プラグを抜くときには、必ずUSBケーブルを持って引き抜く。(金属部には触れないように)
 プラグを抜くときには、必ずUSBケーブルを持って引き抜く。(金属部には触れないように)
 火災・感電・やけどの原因やコードの断線の原因となります。

お手入れの際は、必ず電源をオフにする。
 感電・火災・発火・やけどの原因となります。

充電用USBケーブルを引っ張って本製品を移動したり、持ち上げたりしない。
 感電・ショート・発火・断線の原因となります。

充電用USBケーブルを束ねたまま使用しない。
 火災・感電の原因となります。

必ず専用の充電用USBケーブルを使用する。
 感電・ショート・発火・故障の原因となります。

△充電用USBケーブルが傷んでいるときは使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。充電用USBケーブルが傷んでいるときは、必ずお買い上げの販売店窓口に修理をご相談ください。

万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにし充電用USBケーブルをすぐに外す。
 プラグを抜くときには、必ずUSBケーブルを持って引き抜く。(金属部には触れないように)

充電用USBケーブルに水や液体がかからないようにする(水につけたり、洗ったりしない)。また、充電用USBケーブルや充電接続部に水が付着していないことを確認してから使用する。
 感電・ショート・発火・故障の原因となります。

充電用USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。
 また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。
 破損の原因となります。

地震や雷を感じたら使用を中止し、電源を切る。充電用USBケーブルを抜く。

△タコ足配線しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

温泉や入浴剤入りのお湯、サウナで使用しない。
 故障の原因となります。

ノズルは家族や他人と共に使用しない。
 感染・トラブルの原因となります。

使用環境温度を守る。
 使用する場所の室温を確認してください。
 故障・破損の原因となります。


自分で意思表示ができない人、口腔内の感覚が弱い人に使わせない。また、子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。未成年の方は保護者同意の上、保護者監視のもとで使用する。
 感電・けが・やけどの原因となります。

本製品の給水口に異物を入れない。
 故障の原因となります。

分解や修理・改造はしない。
 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。
 ※本製品ではお客様ご自身で修理できる部品はありません。

2. 各部のなまえとはたらき

【本体】

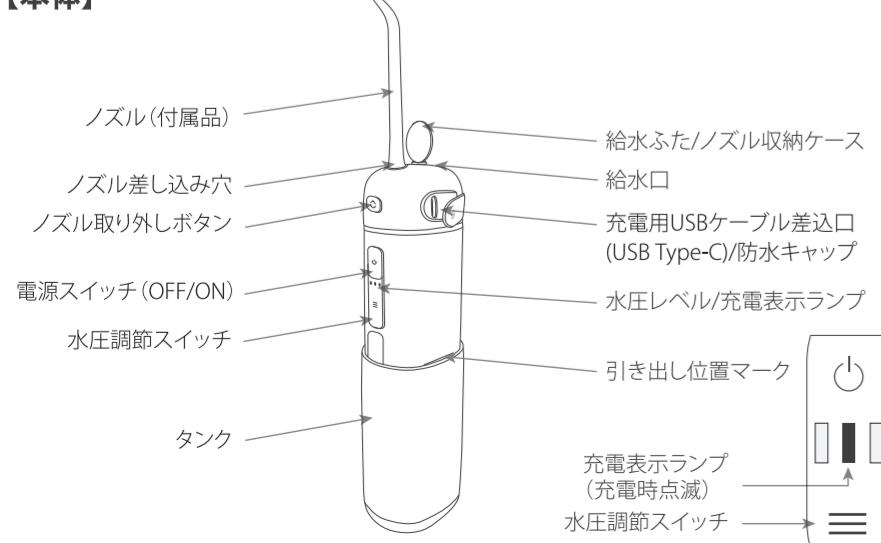

【付属品】

- 充電用USBケーブル(発熱検知センサーあり) 1本
- 収納ポーチ 1個
- 取扱説明書(保証書付)

充電は必ず付属のUSBケーブルを使用してください。
 本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。
 ノズル、および製品の使用方法に関する詳細については、ウェブサイト(<https://www.ya-man.com/>)をご覧ください。

1. 安全上の注意

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ● 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
 ● お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
 ● 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

安全上の注意

ご使用になる前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
 异常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
 故障状態のままで使用されると、口腔内に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
 ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じる想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について

- △ 危険:誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
 △ 警告:誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 △ 注意:誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容です。
 ※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

△ 危険(ご使用、保管に関して)

- △ 次に該当する人は使用しない。
 ◆ 医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。本製品を使用される前に必ず医師にご相談ください。
 ◆ 医用電気機器を使用している人
 • ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器
 • 人工心肺など生命維持用医用電気機器
 • 心電計などの装着型医用電気機器

△ 警告(電源に関して)

△ 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
 用途以外
 歯科医師の指示がある場合はそれに必ず従ってください。事故・けがの原因となります。

△ 専用のノズルや付属品のみを使用する。
 必ずする
 事故・けがの原因となります。

△ 次のような人は歯科医師に相談のうえ、使用する。
 必ずする
 • 歯周病の疑いがある人、治療中の歯や口腔内に気になる症状がある人は歯科医師に相談してください。
 • 歯科医師から抗生素質の投薬を受けている場合は、本製品またはその他の口腔衛生補助器具を使用する前に、歯科医師に相談してください。

△ 指定の部位以外や次のようないくつかの部位には使用しない。
 禁止
 目や鼻、耳、舌の裏、のどなどのデリケートな部位。本製品は強い水圧で噴射するため、これらのデリケートな部位に深刻な傷害を与える可能性があります。

△ 本製品をご使用の前に、口腔内のアクセサリーを取り外す。
 必ずする
 けがの原因となります。

△ タンクに熱湯をいれない。常温の水またはぬるま湯(40°C以下)を使用する。
 禁止
 やけどの原因となります。

△ ベットには使用しない。
 禁止
 けがの原因となります。

△ 口腔内に傷などの異常を起こしている場合は使用しない。
 禁止
 けがの原因となります。

△ 使用中に気分が悪くなったり、お身体に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。
 必ずする
 お身体に異常が生じていないかよく注意して使用してください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。


△ 使用後は毎回、「お手入れ方法」(P.21)を参照して、製品のお手入れを行う。
 必ずする
 そのまま使用すると、口腔内トラブルや故障の原因となります。

3. 使いかた


- 充電は、必ず付属のUSBケーブルを使用してください。
- 本体に水滴がついている場合は水滴をしっかり拭き取ってください。充電端子に水滴が付着した状態で充電すると故障の原因となります。
- 充電完了後は防水キャップをしっかりと閉めてください。

- 差込口の位置にある防水キャップの溝に爪をかけてキャップを外します。
- 充電用USBケーブルを充電用USBケーブル差込口に接続します。
- ACアダプター(市販品)を使用する際は、タコ足配線せず、壁面コンセントに直接差し込んでください。充電するときのACアダプターは高出力のものを避け、「DC5V 1.0A」のアダプターを使用してください。

家庭用コンセントを使用する

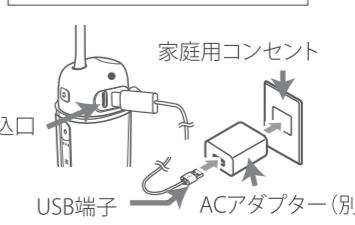

パソコンを使用する

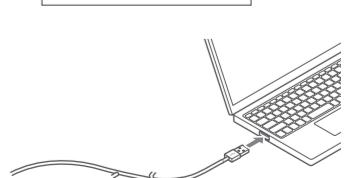


充電中	充電表示ランプが白色に点滅。
充電完了時	充電表示ランプが点滅を停止し、白く点灯。
充電時間	約2~3時間 ※電池残量や充電環境、ACアダプター（市販品）によって、充電時間は前後します。
動作時間	レベル弱：約40分、レベル中：約28分、レベル強：約25分 ※動作時間は使用環境によって変わります。

・周辺温度が10~40°Cの範囲で充電してください。
・充電表示ランプが見づらい場合は、照明が暗い場所で点灯をご確認ください。
注意：充電用USBケーブル差込口に水が付着していないことを確認してから接続してください。
感電・発火・故障の原因となります。

2 ノズルの取り付けと取り外し

- [1] ノズルの下部を本体上部のノズル差し込み穴に挿入します。
- [2] カチッと音がするまでしっかりと挿入します。
- [3] ノズルを取り外すときは、ノズル取り外しボタンを押したままノズルを軽く引き抜きます。
- [4] 外出時の持ち運びや収納の場合、または保管する場合には、ノズルを本体のノズル収納ケースに収めてください。
※ノズルは回転する仕様です。
- ※ノズルが入りづらい場合は、ノズル下部を水で濡らすと入りやすくなります。

⚠ 使用中にノズル取り外しボタンを押さないでください。

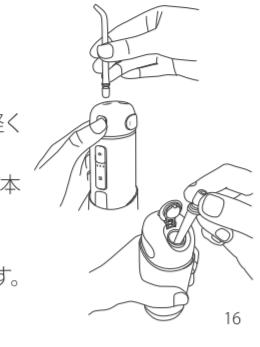

16

4. 使いかたのポイント

ジェットノズル

奥歯から前歯に向かっての使用がおすすめです。
ノズルを歯茎に沿って移動させてください。
水がねないように唇を軽く閉じ、口からシンクに水が流れるようにしてください。

うがい薬・口腔洗浄液などの使用

うがい薬・口腔洗浄液などと一緒に使用することができます。
ただし、希釈が必要なものは必ず液剤側の指示に従って希釈してからご使用ください。
また、使用後はパイプのつまりを防ぐために以下の通りお手入れしてください。
・タンクにぬるま湯(40°C以下)を入れ、ノズルをシンクに向けてから電源をオンにする。
そのままタンクが空になるまで排水する。

5. お手入れのしかた

お手入れ方法(毎回)

●本体

電源をOFFにし、柔らかい布と研磨剤を含んでいない中性洗剤を使用して、必要に応じて製品を拭いてください。

●ノズル


柔らかい布と研磨剤を含んでいない中性洗剤を使用して、拭いてください。

・ジェットフロスノズル用UV除菌ケース(別売品)を使用したお手入れもおすすめです。詳細については、ウェブサイト(<https://www.ya-man.com/>)をご覗ください。

20

3 給水


- [1] 本体右側の引き出し位置マークまでタンクを引き下げます。
- [2] 本製品上部にある給水ふたを引き上げます。
- [3] 本体をまっすぐ立てた状態で、水をいっぱいに注ぎます。
- [4] 満水後、給水ふたをしっかりと閉めます。

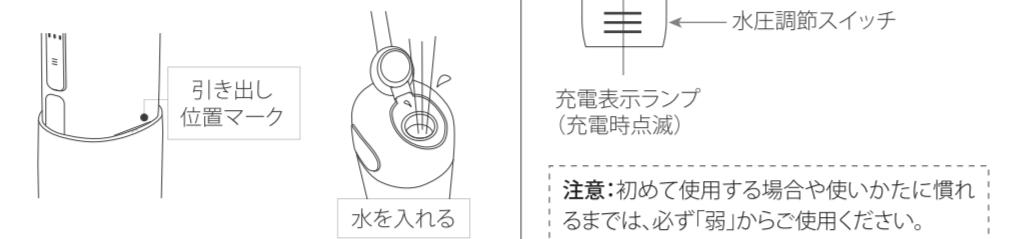

17

4 レベルを選択する

水圧調節スイッチを押して
レベルを選択します。

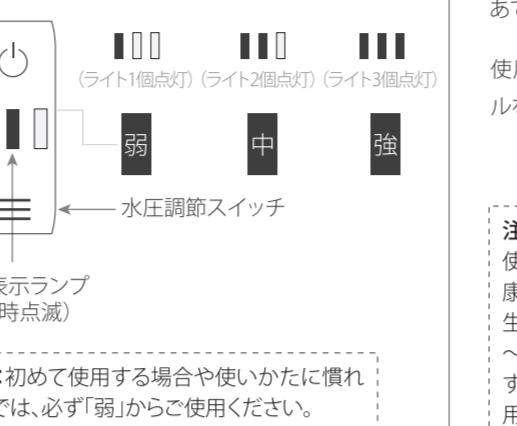

充電表示ランプ
(充電時点滅)


注意：初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、健康な歯茎でもかゆみや出血が生じる場合があります。通常1~2週間以内に出血は止まりますが、2週間以上続く場合は使用を中止し、歯科医師に相談してください。

5 ノズルを口に入れる

ノズルを口に入れたまま電源スイッチを押します。ノズルの先端を歯間や歯と歯ぎしの境目にあてるように口の中を移動させてください。

電源スイッチを押し、本製品の使用を開始します。
・初心者モード
この製品は初心者モードを備えています。動作が停止している状態で水圧レベル「弱」を選択した場合のみ、電源スイッチを長押しするとスイッチを押している間動作し、離すと止まります。

注意：誤動作を防ぐために、約90秒オートオフします。

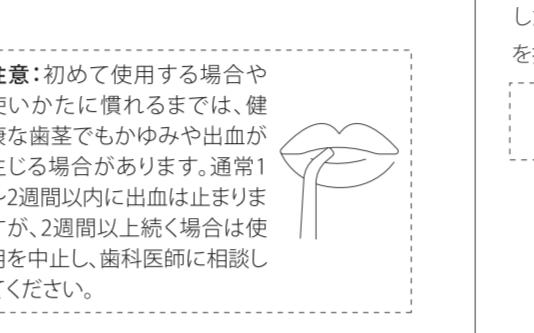

18

6 スイッチを押し、製品を使用する

使用中レベル表示ランプが点滅し始めた場合、速やかに充電してください。

電源スイッチを押し、本製品の使用を開始します。

使用をやめるときは必ず電源を切った後にノズルを口から出してください。

注意：初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、健

康な歯茎でもかゆみや出血が

生じる場合があります。通常1

~2週間以内に出血は止まりま

すが、2週間以上続く場合は使

用を中止し、歯科医師に相談し

してください。

7 使い終わったら

使用終了後ノズルを取り外し、タンクに残った水を捨ててください。

上部の給水ふたを開け、本体を逆さまにすると、残りの水をすべて排出することができます。


排水後は乾いた布などで拭き、ノズルはノズル収納ケースに入れて保管してください。

注意：残った水は毎回必ず排水してください。使用後はお手入れをしてください。(P.21参照)

19

7. 内蔵電池の取り出し方法

- ・電池を取り出す前に、必ず電源をオフにしてください。
- ・電池を取り出す際はドライバーを使用しないでください。
- ・電池を取り出す際は硬いもの等で電池を傷つけないようにご注意ください。※発熱発火の原因となります。
- ・取り外した電池は自治体の分別ルール(廃棄やリサイクル方法)に従って処理してください。

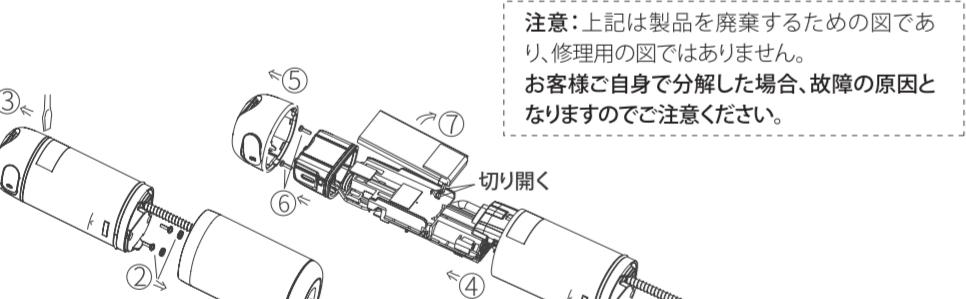

21

8. 製品仕様

定格電源	DC5V 1.0A
消費電力	約4W
外形寸法	約48mmx57mmx125mm(WxDxH)
製品質量	約200g
動作温度	5°C~40°C
防水機能	IPX7
材質	ABS樹脂、トライタン、ポリアセタール、ポリプロピレン
製造国	中国
付属品	ジェットノズル2本、充電用USBケーブル1本、収納ポーチ1個、取扱説明書(保証書付)

9. アフターサービス

充電池について

- ・充電池は消耗品です。(保証対象外)
- ・充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- ・充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.28)にご相談ください。



廃棄について

- ・本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- ・電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
- ・この製品に使用しているリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

25

保証について

- ・通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします
(消耗品・付属品は除く)。
- また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- ・保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.27)にご相談ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書を持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本物に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (1) お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
 - (2) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
 - (3) 以下①~⑥が原因による故障および損傷の場合
 - ① 使用上の誤り ② 買い上げ後の輸送、転倒・落丁
 - ③ 弊社以外の第三者による修理・改造
 - ④ 高温・湿気等の環境での使用
 - ⑤ 接続する他の機器の異常
 - ⑥ 家庭用製品の業務用等)想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用
 - ⑦ 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

29

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

お問い合わせ先

・本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS 0570-550-637 (通話料有料)

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理が依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっています。

日本国外からのお問い合わせ先

・販売店またはヤーマングローバルサイト(<https://www.ya-man.com/en/>)までお問い合わせください。

保証書

持込修理

品名 口腔洗浄器 型番 YOI-100

形名 ジェットフロス コンパクト

対象部分

期間

本体のみ お買い上げ日から 1年間

店名・住所・電話

ご購入日よりの用紙を貼付

または本保証書に記載の

個人情報の取扱いについて

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

※所定記入欄が空欄のままお買い上げ年月日・販売店名がわかるシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

本書は本記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

製造元 ヤーマン株式会社

0120-776-282 0570-550-637

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

2010-045 東京都江東区古石塚1-4-4

©2023 YA-MAN LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 無断複製および転載を禁ず。

