


YAMAN

取扱説明書

ジェットフロス
ノズル用UV除菌ケース

YOI-UV01

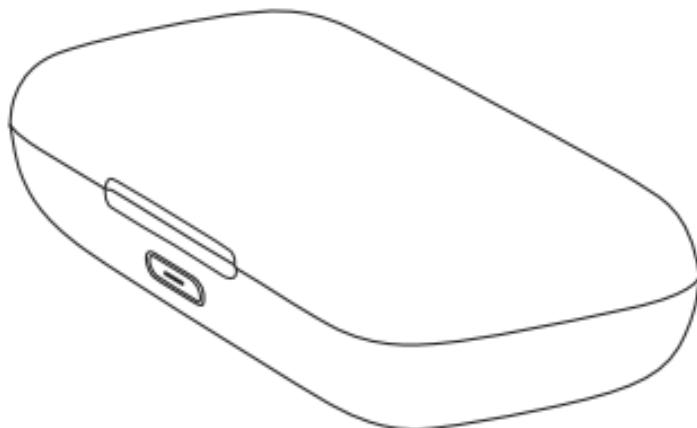

この取扱説明書をよくお読みのうえ、
製品を安全にお使いください。

また、本取扱説明書は
大切に保管してください。

YOIUV01-1-001

目次

1. 安全上のご注意	1
2. 各部のなまえ	3
3. 使いかた	3
4. 安全機能	4
5. ランプの説明	5
6. 使い終わったら	6
7. 付属品	8
8. 製品仕様	8
9. アフターサービス	9

1. 安全上のご注意

**ご使用になる前に、この「取扱説明書」を
よくお読みのうえ正しくお使いください。**

- 火の中に投入や、加熱、水に浸けたりしない。
- 製品の開口部に異物を落としたり、差し込んだりしない。
- 製品または充電用USBケーブルを加熱された場所に置かない。
- お手入れをする前に、製品が充電状態でないこと、電源が切れていることを確認する。
- 本取扱説明書に記載されている以外の方法で製品を操作しない。
- 自分で意思表示ができない人（子どもを含む）は、保護者監視のもとで製品を使用したりお手入れしたりする。
- 本製品は、子どもや乳幼児の手の届かないところに保管し、遊ばせない。
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
故障・けがの原因となります。
- 次のような場所で機器を使用・保管・充電しない。
 - 浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近く
 - ほこりの多い場所
 - 直射日光の当たる場所や屋外
 - 傾斜、振動、衝撃のある場所
 - 強い電波や磁気の発生する場所

- 引火性のもの(アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど)の近く
 - 油煙、湯気の当たる場所
 - 発熱器具(ストーブ等)の近くなど高温になる場所
 - 温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)
- 火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。

- 分解や修理・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。
- 機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する。
火災・感電のおそれがあります。
- 充電用USBケーブルが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。
- 水をかけたり、濡れた手で操作しない。
- 必ず直流5V 1AのACアダプターを使用する(無料保証は国内のみ)。
火災・感電・故障の原因となります。



本製品を子どもに触らせないでください。
目や皮膚に照射しないでください。
水で洗ったり、水に浸したりしないでください。


2. 各部のなまえ

正面



スタート／ランプ
ストップボタン

背面

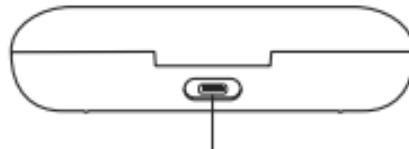


充電用USBケーブル差込口

3. 使いかた

1. 本体に付属の充電用USBケーブルで本体を充電してください。ランプが白く点灯したら(30分後に消灯)、充電完了となります。


背面

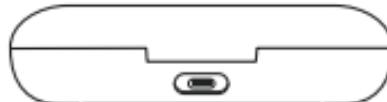

2. 本体のふたを開け、ノズルを入れます。
ノズルは下部を溝に合わせて差し込み、セットします(右図参照)。



3. 本体のふたを閉めます。スタートボタンを押すと、ランプが青点滅し、殺菌が開始します。停止するときは、もう一度ボタンを押してください。ふたを開いても自動的に停止します。

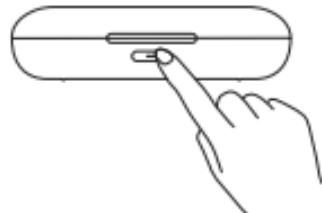

4. 6分間の紫外線照射が完了すると、ランプが消灯します。

注意:

必ず、ジェットフロス専用ノズルのお手入れのみにご使用ください。ノズルは、本体に入れる前にできるだけ水気を切ってください。使用後は本体内に残った水をふき取ってください。

4. 安全機能

動作中にふたが開くと自動的に動作を停止し、紫外線が漏れるのを防ぎます。

5. ランプの説明

充電表示

白点滅	充電中
白点灯	満充電状態です。充電用USBケーブルを抜いてください。(充電時間は約2時間です。ランプは30分間点灯した後消灯します)。

電池残量表示

ふたを開け、5秒間 白点灯した後消灯	電池残量20%以上
ふたを開け、5秒間 白点滅した後消灯	電池残量20%以下 充電してください。

動作表示

青点滅	動作中
消灯	終了

- i** 本製品は、ランプの色で充電/電池残量/動作状態を見分けることができます。

6. 使い終わったら

- 濡らした柔らかい布で製品表面および内部の汚れを拭いてください。水に浸したり、水道水で直接すすいだりしないでください。
- お手入れ後は、風通しのよい涼しい場所に保管してください。

内蔵電池の取り出し方法

- この製品には、充電式リチウムイオン電池を使用しております。
- 廃棄する前に、内蔵された電池を取り外してください。
- 外した電池は自治体の分別ルール(廃棄やりサイクル方法)にしたがって、処理をお願い致します。
- この図は、製品を廃棄するための分解図です(お客様ご自身で分解した場合、故障の原因となりますのでご注意ください)。


注意:

- 電池を取り外す前に、本製品の電源が入っていないことを確認してください。
- P.7の図1~4の順番で、本製品を分解し、電池を取り外します。
- 分解中に電池をショートさせたり、取り外した後に電池の「+、-」極をショートさせたりしないでください。接線部分には粘着テープを貼り付けて絶縁保護を行ってください。
- 電池を取り外した後は、製品に再通電しないでください。

① 下カバーを開けます




② 下カバーを取り外します

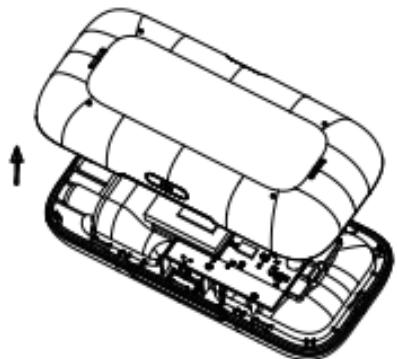


③ ケーブルを切断します

※必ず1本ずつ
切断してください。
2本まとめて切るとショート
によるけがの原因となります。

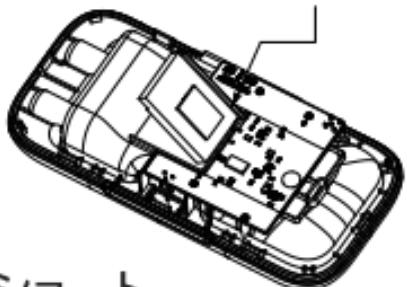

④ 電池を取り外します

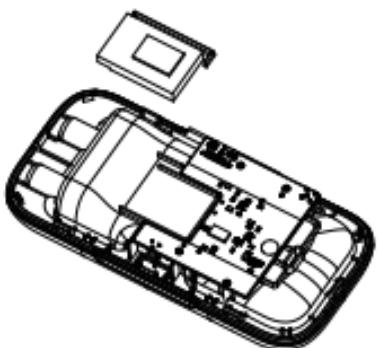

この図は、製品を廃棄するための図であり、
修理用の図ではありません。
お客様ご自身で分解・修理した場合、故障の
原因となりますのでご注意ください。

7. 付属品

- ・充電用USBケーブル 1本
- ・取扱説明書(保証書付)

8. 製品仕様

UVランプ数	1個
外形寸法(mm)	約127×60×33
製品質量(g)	約80g
LED波長	265~290nm
入力インターフェース	USB Type-Cポート
定格入力	5V = 1A
電池のパラメータ	電池の種類:リチウムイオン 電池の電圧:3.7V 電池の容量:250mAh
連続使用可能時間	約30日
UVランプ寿命	約2,000時間
推奨使用温度	10°C~40°C
製造国	中国
材質	ABS樹脂

9. アフターサービス

充電池について

- ・ 充電池は消耗品です。(保証対象外)
- ・ 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- ・ 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.10)にご相談ください。

廃棄について

- ・ 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- ・ 電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
- ・ この製品に使用しているリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。



お問い合わせ先

- ・本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

 **0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話・PHS

 **0570-550-637** (通話料有料)

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっています。

日本国外からのお問い合わせ先

- ・販売店またはヤーマングローバルサイト
(<https://www.ya-man.com/en/>)
までお問い合わせください。

保証について

- ・通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- ・保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.10)にご相談ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
 - (ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - (リ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

No.

保証書

持込修理

品名	口腔洗浄器	型番	YOI-UV01
形名	ジェットフロス ノズル用UV除菌ケース		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体のみ	お買い上げ日から 1年間	
店名・住所・電話 ※販売元者名	<p style="text-align: center;">見本</p> <p>ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。</p>		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ

(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。



製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区吉石場1-4-4

www.ya-man.com

固定電話など

0120-776-282

携帯電話・PHS

0570-550-637

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)